

Cycleur Liberty – Guide de l'utilisateur

© 2011 – 2012, Fresenius Medical Care — Tous droits réservés

Ce document contient des informations appartenant à Fresenius USA, Inc. s/n Fresenius Medical Care North America et ses membres affiliés (« Fresenius Medical Care »). Le contenu ne peut être divulgué à des tiers, copié ni reproduit, en totalité ou en partie, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de Fresenius Medical Care.

Fresenius, Fresenius Medical Care, le triangle, stay•safe et Liberty sont des marques de commerce de Fresenius Medical Care Holdings, Inc., et/ou de ses compagnies affiliées. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Selon les lois fédérales américaines, cet appareil ne peut être vendu que par un médecin ou sur l'ordonnance d'un médecin. La fréquence, la durée et les paramètres du traitement doivent être déterminés par le médecin prescripteur.

Indications d'emploi : Le cycleur Liberty de Fresenius est destiné à la dialyse péritonéale aiguë et chronique.

Le présent document s'applique aux versions 2.8 et plus récentes du logiciel.

Mes Paramètres de traitement

Utilisez cette page pour les paramètres du traitement prescrits par votre médecin. Utilisez une seule de ces fiches de prescription pour votre traitement.

thérapie	DPCC	<input type="checkbox"/> Selon le traitement
cycles/pauses	volumes	durées
	volume total	durée sommeil
	vol. perfusion	
	dernier vol.	

thérapie	DPCC	<input type="checkbox"/> Selon le cycle
cycles/pauses	volumes	durées
# perfusions	vol. perfusion	durée contact
		durée perfusion
	dernier vol.	durée drainage

thérapie	DPI	<input type="checkbox"/> Selon le traitement
cycles/pauses	volumes	durées
	volume total	durée sommeil
	vol. perfusion	
# pauses	vol. de pause	

thérapie	DPI	<input type="checkbox"/> Selon le cycle
cycles/pauses	volumes	durées
# perfusions	vol. perfusion	durée contact
# pauses	vol. de pause	durée perfusion
		durée drainage

thérapie	DP+	<input type="checkbox"/> Selon le traitement
cycles/pauses	volumes	durées
	volume total	durée sommeil
	vol. perfusion	
# pauses	vol. de pause	
	dernier vol.	

thérapie	DP+	<input type="checkbox"/> Selon le cycle
cycles/pauses	volumes	durées
# perfusions	vol. perfusion	durée contact
# pauses	vol. de pause	durée perfusion
	dernier vol.	durée drainage

thérapie	TIDAL	<input type="checkbox"/> Selon le traitement
cycles/pauses	volumes	durées
	volume total	durée sommeil
# pauses	vol. de pause	
	premier vol.	
	volume tidal	
	drain tidal	
	dernier vol.	

thérapie	TIDAL	<input type="checkbox"/> Selon le cycle
cycles/pauses	volumes	durées
# pauses	vol. de pause	durée contact
	premier vol.	durée perfusion
# perfusions	volume tidal	durée drainage
	drain tidal	
	dernier vol.	

patient

no patient	poids

options

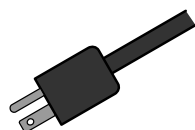
compter UF jour	opt. dern. sac	
langue	SI unités	données pers.
USB activé		

Notes : _____

Description rapide du contenu

Cette page est un rappel de l'endroit où vous trouverez certaines procédures:

Urgences



Panne de courant : 212

Messages d'erreur – Dépannage: 180

Réglages du cycleur Liberty



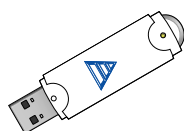
Comment régler les unités (SI) de poids : 80

Comment changer l'heure/la date : 82

Comment activer l'écran éteint : 82

Comment ajuster le volume d'alarme : 82

Réglages de traitement



Comment utiliser l'unité IQdrive : 162

Comment régler vos paramètres : 46

Liste des vérifications avant traitement : 86

Échanges



Comment sauter un échange : 158

Comment faire un drainage AUSSITÔT : 156

Durée de drainage en fonction du volume de perfusion : 194

Numéro du soutien technique : 1 877 633-0013

Table des matières

Mes Paramètres de traitement	2
Description rapide du contenu.....	7
Introduction.....	12
Exigences.....	12
Indications d'utilisation (buts de l'utilisation du cycleur Liberty)...	13
Contre-indications (quand ne pas utiliser l'appareil).....	13
Précautions relatives à la dialyse péritonéale.....	13
Le guide de l'utilisateur	14
Lectures suggérées	15
Des questions? Appelez le soutien technique	15
Avertissements généraux	16
Faites la connaissance de votre cycleur Liberty	20
Le panneau de commande	24
La barre d'état.....	26
Les boutons de l'écran tactile	28
Navigation avec les boutons écrans.....	30
Le module de pompe	32
La cassette et l'ensemble de tubulures	34
Le système <i>stay•safe</i>	36
Le plateau réchaud	38
Installation de votre cycleur Liberty	40
Entrée de la prescription	44
Réglage des paramètres du traitement.....	46
Sélection de l'onglet thérapie	48
Réglages DPCC selon le traitement	50
Réglages DPCC selon le cycle	52
Réglages DPI selon le traitement.....	54
Réglages DPI selon le cycle.....	56
Réglages DP+ selon le traitement.....	58
Réglages DP+ selon le cycle	60
Réglages DP fluctuante (tidal) selon le traitement.....	62
Réglages DP fluctuante (tidal) selon le cycle	66
Onglet Patient.....	70
Onglet Options.....	80
Onglet Équipement.....	82

Vérifications avant le traitement	86
Début de votre traitement.....	88
Amorçage.....	102
Votre branchement	112
Échanges	116
Échange : Drain 0	118
Échange : Perf 1	120
Échange : Pause.....	122
Échange : Contact	126
Fin de votre traitement	130
Sommaire du traitement.....	134
Arrêt du cycleur	142
Annexe	146
Bouton écran Mes Dossiers.....	148
Utilisation de la touche STOP	154
Utilisation de l'option drain AUSSITÔT	156
Saut d'échange	158
Utilisation de l'unité IQdrive	162
Déplacement de votre cycleur Liberty.....	166
Avertissements et alarmes	170
Avertissement : Bouton Aide.....	174
Alarme : Barre d'état rouge	178
Dépannage.....	180
Différentes personnes, drainent différemment.....	194
Panne de courant.....	196
Nettoyage de votre cycleur.....	202
Caractéristiques du Cycleur	204
Déclaration de CEM du fabricant.....	207
Politique d'amélioration des produits	211
Garantie	211
Glossaire	215
Index.....	219

Page laissée intentionnellement vide

Introduction et aperçu

Introduction

Le nouveau cycleur Liberty de Fresenius vous apporte une véritable liberté. Chez Fresenius Medical Care, nous savons que la vie sous dialyse péritonéale peut être compliquée et nous avons fait tout ce qu'il fallait pour la simplifier. Votre cycleur Liberty est léger, portable et d'un emploi simple. Il est doté d'une cassette facile à installer et ses menus simples sur écran tactile vous guideront durant les réglages et le traitement. En suivant attentivement les instructions de votre médecin, vous disposerez au bout de vos doigts de la commodité et de la liberté que confère la dialyse péritonéale. Lisez attentivement ce guide et conformez-vous à toutes ses instructions et à tous ses avertissements.

Exigences

Les utilisateurs du cycleur Liberty doivent avoir reçu une formation pour procéder à une dialyse péritonéale sous la direction d'un médecin. En outre, ils doivent :

- Bien connaître les modalités de la dialyse péritonéale et ses effets sur l'organisme
- S'être exercés aux techniques d'asepsie et autres techniques de la dialyse péritonéale
- S'être bien familiarisés avec le contenu du guide
- Avoir reçu une formation complète à l'utilisation compétente du cycleur. Vous devez pouvoir distinguer entre un fonctionnement normal et un fonctionnement anormal.

Indications d'utilisation (buts de l'utilisation du cycleur Liberty)

L'utilisation du cycleur Liberty de Fresenius est indiquée pour la dialyse péritonéale de courte durée (aiguë) et de longue durée (chronique).

Le cycleur Liberty peut être utilisé pour les thérapies suivantes : dialyse péritonéale cyclique continue (DPCC), dialyse péritonéale intermittente (DPI), dialyse péritonéale plus (DP+) et dialyse péritonéale TIDAL (DP fluctuante).

Contre-indications (quand ne pas utiliser l'appareil)

La DPCA et la DPCC sont des choix efficaces et intéressants pour les patients en IRT; toutefois, il n'y a pas de thérapie qui soit applicable à tous les patients. Les problèmes de santé suivants sont susceptibles d'empêcher ou de compliquer l'utilisation du cycleur Liberty :

- Fuites à travers des membranes recouvrant les organes internes (fuite transdiaphragmatique)
- Métabolisme destructif (hypercatabolisme)
- Surface de membrane péritonéale trop petite
- Opérations abdominales multiples

Il s'agit d'une recommandation seulement. C'est à votre médecin que revient la décision d'utiliser ou non un appareil médical, quel qu'il soit.

Précautions relatives à la dialyse péritonéale

Votre médecin vous a prescrit une dialyse péritonéale (DP). Bien que la dialyse péritonéale s'accompagne de certains risques, il estime que ce traitement est préférable. Voici certains éléments dont votre médecin doit tenir compte : Vous devez effectuer les traitements de dialyse péritonéale conformément à la prescription de votre médecin et aux instructions du fabricant. Cela est indispensable pour éviter des effets nocifs. Parmi les problèmes de traitement possibles, il faut citer la douleur abdominale, l'hémorragie, l'infection de la membrane péritonéale (péritonite) et le blocage du cathéter. Certaines solutions de dialysat sont plus fortes que d'autres (pourcentage plus élevé de dextrose) pour l'extraction de liquide. Il est donc important d'utiliser la solution qui correspond à vos besoins, pour éviter une extraction excessive (hypovolémie) ou insuffisante de liquide de votre organisme, une chute de la tension artérielle (hypotension), un gonflement (œdème) ou des crampes musculaires. Vous devez maintenir une extraction correcte de liquide de votre organisme. Il est indispensable que vous collaboriez avec l'infirmière de dialyse pour surveiller votre poids et vos niveaux de chimie

sérique. Vous devez également être attentif à la manière dont vous vous sentez et signaler tout changement à l'infirmière. Cela vous aidera à éviter des problèmes comme l'insuffisance cardiaque congestive, l'hypovolémie, la surcharge de solution, l'état de choc et un traitement inadéquat. Conformez-vous à la prescription de votre médecin et à ses instructions pour réduire le risque d'apparition de tels problèmes, qui peuvent s'accompagner de complications graves.

Les soignants doivent surveiller attentivement les patients pour pouvoir déceler tout signe ou symptôme ci-dessus.

Le guide de l'utilisateur

Le guide de l'utilisateur constitue un document de référence pour l'utilisation à domicile du cycleur Liberty de Fresenius par des personnes correctement formées. Il ne peut toutefois remplacer la formation pratique du personnel de soins. Son rôle n'est pas de vous conseiller ni de remplacer les conseils cliniques.

Le guide est rédigé de manière à en faciliter la lecture et la compréhension. Les modalités du traitement sont illustrées et s'accompagnent d'instructions détaillées.

Suivez les instructions apparaissant sur l'écran du cycleur. Utilisez le guide pour vous aider à interpréter les écrans de l'appareil. Vous devez lire le guide au complet avant de commencer le traitement. Prenez note des symboles destinés à attirer votre attention, qui sont expliqués ci-dessous:

Symboles



Avertissement : Ce symbole identifie des situations ou des actions dangereuses pour vous. Si vous ignorez ces instructions, vous risquez une atteinte grave, voire mortelle.



Risque de choc électrique : Ce symbole vous avertit d'un risque de choc électrique intense en cas d'utilisation incorrecte de l'appareil.



Mise en garde : Ce symbole vous avertit que si vous ne vous conformez pas aux instructions, vous endommagerez l'appareil.



Remarque : Ce symbole indique des renseignements supplémentaires utiles sur les fonctions de l'appareil. Dans certains cas, les remarques contiennent aussi des instructions. Elles peuvent aussi comporter des instructions pour les cas uniques.

Autres symboles importants



Degré de protection contre les chocs électriques :
Type BF



MARCHÉ : Ce symbole, placé au-dessus du commutateur, à l'arrière de l'appareil, indique que le commutateur est à la position de MARCHÉ.



ARRÊT : Ce symbole, placé au-dessous du commutateur, à l'arrière de l'appareil, indique que le commutateur est à la position d'ARRÊT.

Lectures suggérées

Les documents suivants contiennent des renseignements relatifs au cycleur Liberty de Fresenius :

- Carte de procédures: Démarrage du traitement (P/N 480039-02)
- Guide Pratique Liberty (P/N 480040-02)
- Fresenius Liberty Cyclor Field Service Bulletins. Vous pouvez obtenir ces bulletins techniques au site Web de Fresenius : www.FMCNA.com ou en contactant votre professionnel de soins de santé pour plus de renseignements.
- Preventative Maintenance Requirements (09-PD-001) (Entretien préventif)
- Communiquez avec Fresenius Medical Care Quality Systems pour plus de renseignements sur les procédures des tests de vérification des articles stériles

Des questions? Appelez le soutien technique

Si vous avez des questions, vous pouvez contacter le soutien technique de Fresenius Medical Care à tout moment, au **1 877 633-0013**.

Avertissements généraux

Lisez tous les avertissements avant de commencer le traitement. Vous trouverez d'autres messages d'avertissement, associés à des sujets spécifiques, dans tout le guide.



Avertissement : Lisez le guide de l'utilisateur au complet avant de commencer le traitement. Vous devez vous familiariser avec l'utilisation de l'appareil et avec ses fonctions. Si vous ne suivez pas les instructions d'installation et d'entretien de l'appareil, vous risquez des lésions graves, voire mortelles.



Avertissement : Votre médecin doit vous prescrire le traitement au complet. L'utilisation de valeurs incorrectes peut se traduire par des lésions graves, voire mortelles. N'utilisez pas les valeurs données en exemple dans les illustrations d'écran.



Avertissement : Vérifiez le bon fonctionnement de l'appareil avant de commencer le traitement. Une anomalie non identifiée ou une défaillance d'alarme pourrait vous exposer à un grave danger.



Avertissement : Tenez vos doigts à distance des pièces mobiles.



Avertissement : Le cycleur Liberty n'est pas stérile. Seul l'intérieur des ensembles de tubulures est stérilisé. Vous devez employer une technique aseptique (port d'un masque et lavage des mains) prescrite par votre infirmière de dialyse pour prévenir l'infection. Les infections peuvent entraîner des lésions graves, voire mortelles.



Avertissement : Vérifiez le plateau-réchaud pour vous assurer que rien ne fait obstacle et qu'il ne touche pas le haut du boîtier du cycleur. Tout contact avec le plateau-réchaud peut fausser les pesées de dialysat, avec risque de lésion pour le patient.



Avertissement : Danger d'explosion. N'utilisez pas l'appareil en présence de substances inflammables comme les anesthésiques.



Avertissement : Vérifiez que les tubulures ne sont ni pliées ni endommagées avant de commencer le traitement.



Avertissement : N'utilisez pas de cassette endommagée et ne laissez pas de liquide couler sur ou dans l'appareil. Les fuites durant le traitement peuvent entraîner des lésions graves, voire mortelles. En cas de fuite, contactez immédiatement le soutien technique. Ne tentez pas de nettoyer ou de désinfecter l'intérieur du cycleur en cas de fuite.



Avertissement : Vous devez nettoyer votre appareil pour empêcher la contamination et l'infection.



Avertissement : N'utilisez aucun dispositif émetteur de rayonnements électromagnétiques intenses, comme les téléphones portables, les appareils de communication radio (émetteurs-récepteurs portatifs, etc.), les émetteurs radio et les systèmes similaires, à proximité de l'appareil. Un fonctionnement incorrect peut se produire. L'utilisation d'un téléphone cellulaire numérique peut être autorisée dans certaines conditions. Arrêtez d'utiliser tout dispositif émetteur produisant des interférences (affichage d'une tension erronée, par exemple) qui disparaissent à l'interruption du signal extérieur



Avertissement : Il y a surcharge de solution ou volume intrapéritonéal accru (VIPA) dans la cavité péritonéale lorsque la quantité de liquide dans l'abdomen est supérieure au volume de perfusion prescrit : Le VIPA peut se traduire par des lésions graves, voire mortelles, résultant de troubles comme : hernies de la paroi abdominale et/ou du diaphragme, hydrothorax, insuffisance cardiaque, hypertension aiguë, œdème pulmonaire, diminution de la fonction pulmonaire et épanchement péricardique.

Patients et soignants doivent surveiller les signes potentiels de VIPA. Ces signes comprennent : difficulté à respirer; vomissements ou expectorations; sensations de plénitude, de distension ou de surcharge après le traitement; douleur ou gêne abdominale; abdomen dilaté ou tendu; gonflement localisé autour de la région génitale, du nombril ou du tunnel du cathéter de dialyse ou au site d'émergence du cathéter; fuite de liquide au site d'émergence du cathéter de dialyse et augmentation inattendue de la tension artérielle. Contactez votre médecin ou l'infirmière de dialyse si l'un quelconque de ces symptômes apparaît.

Si vous remarquez l'un de ces symptômes ou si vous sentez une forte montée de la pression accompagnée de douleur durant la perfusion, ne terminez pas le cycle. Appuyez immédiatement sur la touche **STOP** pour arrêter le cycleur et appelez votre infirmière de dialyse ou le médecin; allez à la page 156 pour plus de détails. Une surcharge peut entraîner des lésions graves, voire mortelles.



Avertissement : Si une **dernière perfusion** n'est pas programmée dans votre cycleur et si vous avez effectué une **perfusion manuelle** durant la journée, le cycleur ignore que vous devez drainer une quantité supplémentaire de liquide. Si la tubulure du cathéter est pliée durant Drain 0 et que le drainage

s'arrête, le cycleur peut passer à Perf 1 avant d'avoir fini le drainage. Il peut en résulter une situation de surcharge de liquide qui peut se traduire par des lésions graves, voire mortelles. Vous devez toujours vérifier qu'une quantité suffisante de liquide est drainée durant la phase Drain 0 quand le cycleur commence une phase Perf 1.



Avertissement : Risque de choc électrique. N'enlevez pas le couvercle de l'appareil. Confiez l'entretien à un technicien qualifié. L'alimentation doit être monophasée, à trois conducteurs, de 120/250 VCA, 60 Hz. Votre cycleur doit comporter une mise à la terre électrique pour votre protection. Vous devez vérifier et entretenir la prise de courant dans laquelle vous branchez votre cycleur pour assurer une bonne mise à la terre et vous protéger contre tout risque de choc électrique.



Avertissement : Risque de choc électrique. L'appareil doit être branché directement dans une prise électrique. N'utilisez ni rallonge ni barre multiprise. Utilisez uniquement les cordons d'alimentation fournis avec le cycleur. Si vous devez brancher le cycleur à une source de 240 V, demandez au soutien technique de vous fournir un cordon pour alimentation de 240 V.



Mise en garde : Ne placez pas le cycleur près d'une source extérieure de chauffage ou de refroidissement, par exemple, une bouche de chaleur ou de climatisation.




Mise en garde : Votre cycleur Liberty contient une pile interne, qui ne requiert pas de remplacement périodique et que vous ne devez pas remplacer.





Mise en garde : Votre cycleur Liberty est un appareil médical électromécanique piloté par ordinateur. Il doit être installé dans un milieu approprié (à l'intérieur), sans extrêmes de température ni d'humidité, et doit être raisonnablement protégé de la poussière et de la contamination par la saleté ou les éclaboussures. L'installation de votre cycleur Liberty sans respect pour ces consignes peut entraîner des erreurs de fonctionnement ou une défaillance précoce de l'appareil ou de certains de ses composants.





Mise en garde : Le poids total maximum autorisé sur la balance de votre cycleur est 15 kg (33 lb) ou trois sacs de 5000 mL de solution. Une surcharge de la balance peut endommager la cellule de charge du cycleur.

 **Mise en garde :** Utilisez uniquement les ensembles de tubulures prévus pour votre cycleur Liberty de Fresenius.

 **Mise en garde :** N'appliquez que le bout de vos doigts sur l'écran tactile et sur les touches du cycleur. L'utilisation de tout autre objet, par exemple un stylo, peut endommager l'écran ou les touches ou provoquer une défaillance prématurée de l'appareil.

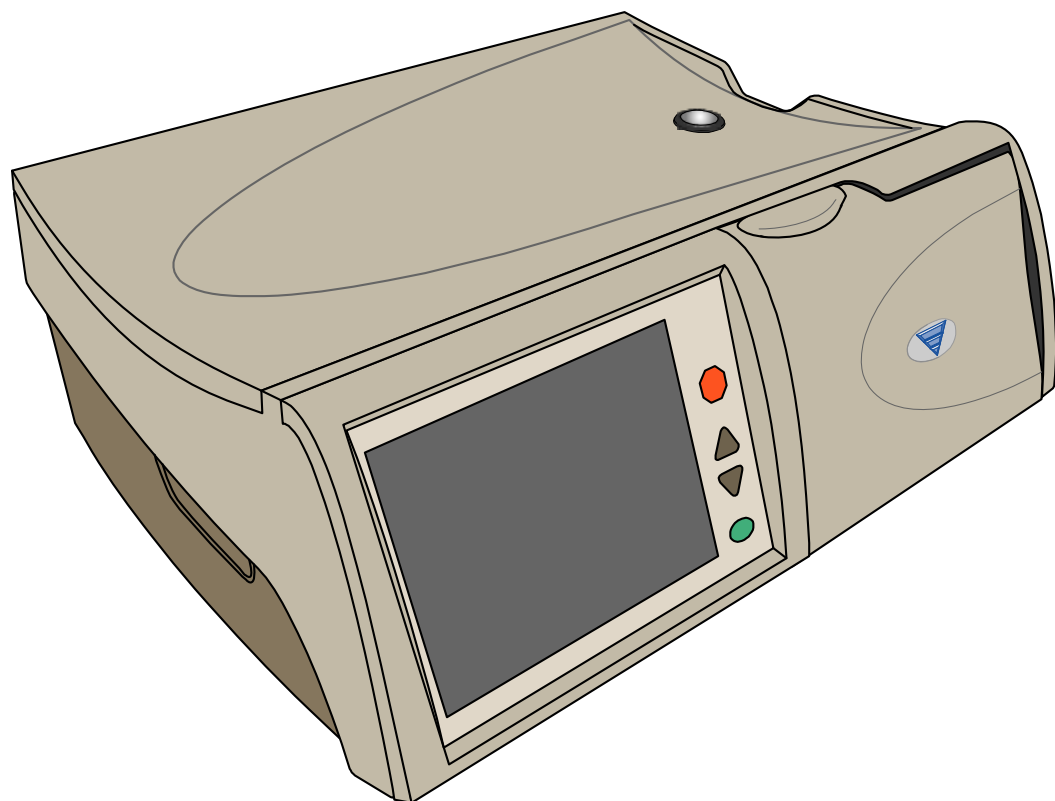
 **Mise en garde :** La porte de cassette est sous pression. Attendez, avant d'ouvrir la porte de cassette, que l'appareil vous en donne l'instruction.

 **Remarque :** L'utilisation de votre appareil implique des liquides : des fuites accidentelles sont donc possibles. De telles fuites peuvent endommager les revêtements de sol et autres surfaces. Pour les contenir, placez l'appareil sur une surface résistante aux effets des fuites. Nettoyez immédiatement tout liquide répandu.

 **Remarque :** Le présent guide montre un ensemble de tubulures modèle 050-87212, avec deux connecteurs *stay•safe* sur la tubulure du patient. Si vous utilisez un ensemble de tubulures différent, c'est au personnel de soins de vous fournir les instructions correspondantes.

Fresenius Medical Care fabrique des ensembles de tubulures pour l'utilisation avec le cycleur modèle Liberty. Elle ne peut garantir la performance des ensembles de tubulures qu'elle n'a pas fabriqués; le choix de ces tubulures est la responsabilité du médecin prescripteur

Faites la connaissance de votre cycleur Liberty



Caractéristiques du cycleur Liberty

Votre cycleur Liberty aide votre organisme à faire le travail de vos reins. Le cycleur pompe le dialysat (solution utilisée pour extraire les déchets et l'excédent de liquide de votre circulation sanguine) dans la cavité péritonéale vide. Une fois là, il absorbe les déchets à travers la membrane naturelle qui s'y trouve, pendant une période de temps fixée. À la fin de cette période, le cycleur draine le liquide et les déchets de la cavité. L'appareil recommence le cycle aussi souvent que prescrit par le médecin. Le dialysat et les déchets sont canalisés par un ensemble de tubulures stériles, qui sont jetées après chaque traitement.

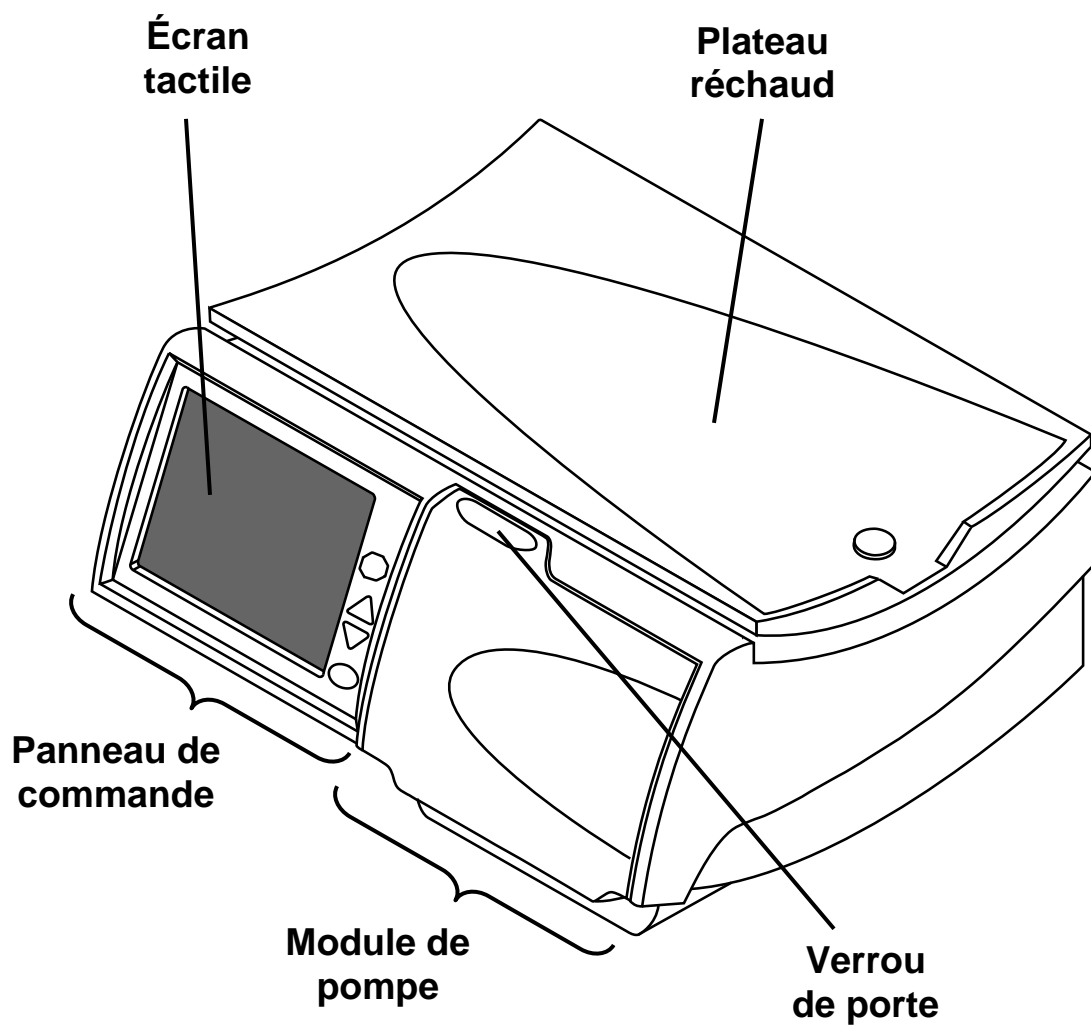
Le cycleur Liberty offre quatre types de thérapie, qui elles-mêmes se classent en deux catégories : les *thérapies continues* et les *thérapies intermittentes*.

Dans le cas d'une *thérapie continue*, la cavité péritonéale contient constamment du dialysat. La DPCC et la DP+ sont deux thérapies continues.


Dans le cas d'une *thérapie intermittente*, la cavité péritonéale peut être vide ou contenir seulement une petite quantité de dialysat à certains moments. La DPI (dialyse péritonéale intermittente) et la DPT (dialyse péritonéale « TIDAL ») sont habituellement des thérapies intermittentes.

Pour plus de renseignements sur ces thérapies, rendez-vous à la page 116.

Le guide de votre cycleur Liberty présente en détail chaque type de dialyse. Lisez-le au complet avant de commencer votre traitement, pour vous familiariser avec ses fonctions.




Votre cycleur Liberty – Vue avant

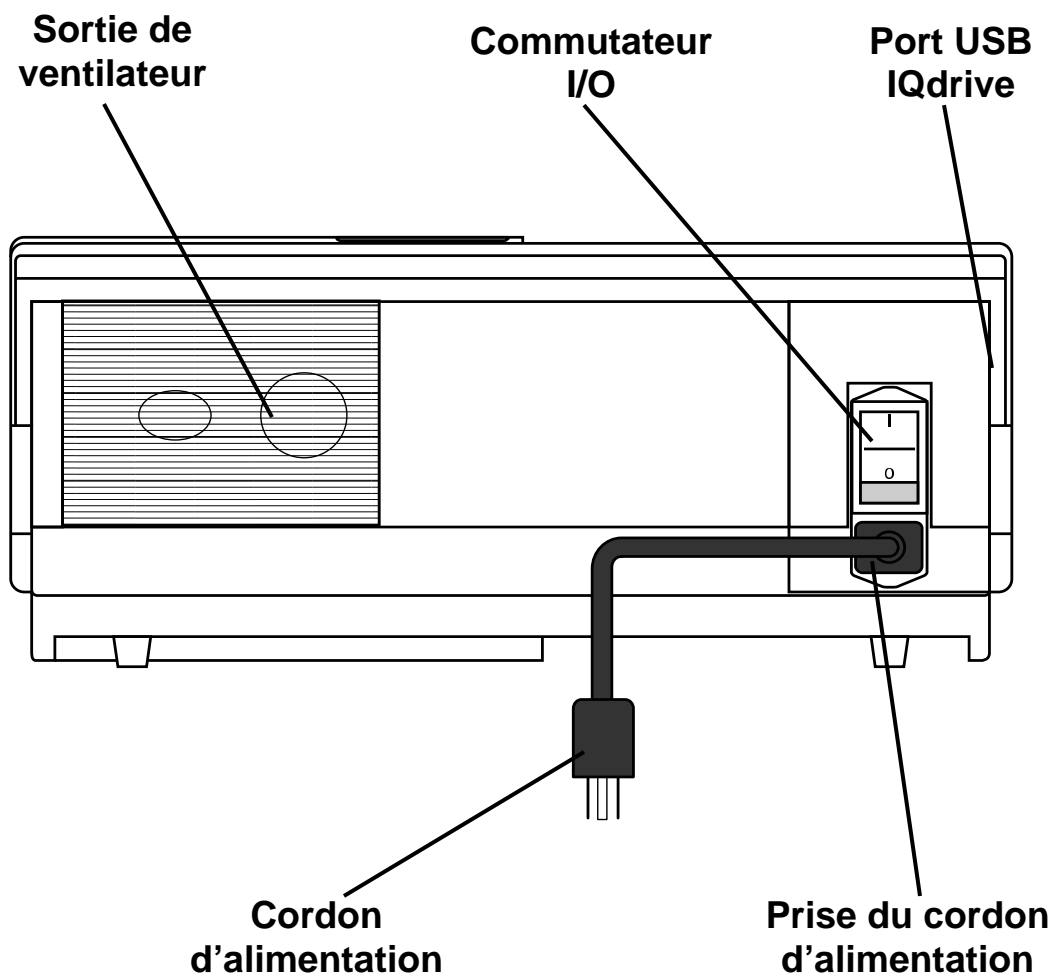

Votre cycleur Liberty – Vue arrière

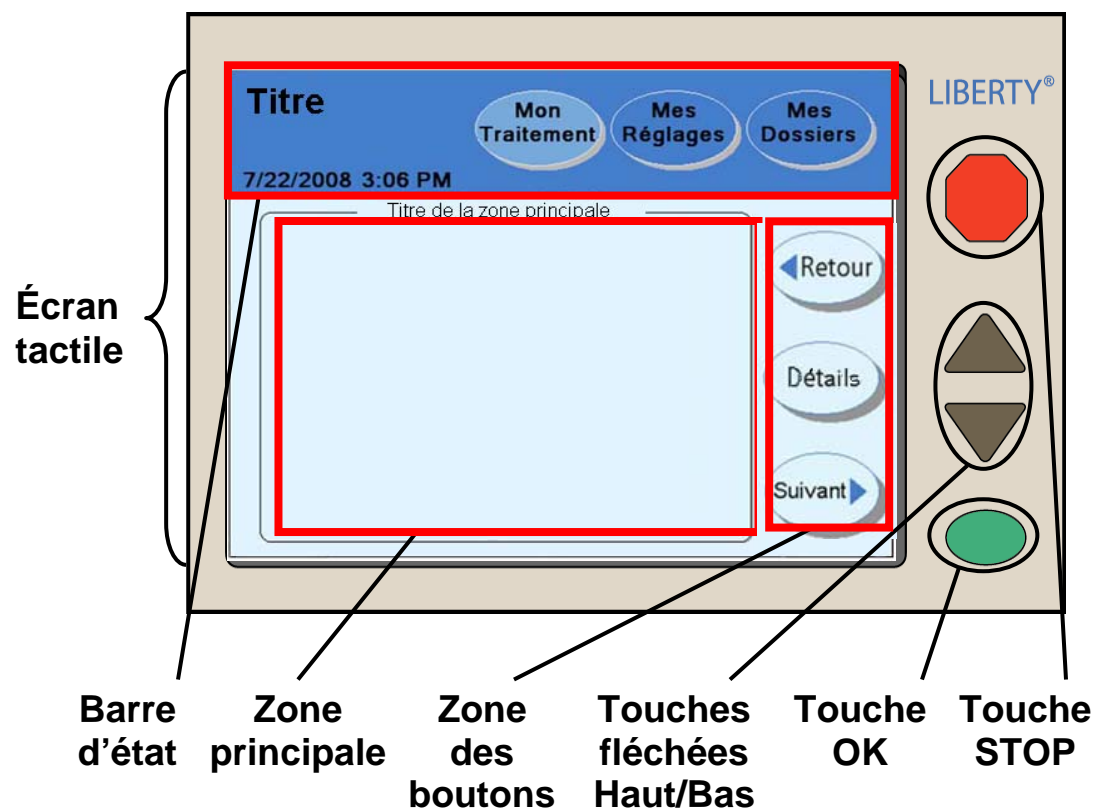Le panneau de commande



Panneau de commande

Le panneau de commande contient toutes les touches et tous les boutons nécessaires aux réglages et à l'exécution du traitement.

Écran tactile

L'écran tactile est un écran de visualisation qui réagit à la pression des doigts. Il vous permet de surveiller votre traitement et de choisir les options de traitement à l'aide des boutons. Les différents types de boutons de l'écran tactile sont décrits à la page 28. L'écran tactile peut être réglé de manière à s'éteindre automatiquement après dix minutes, pour plonger la chambre du patient dans l'obscurité durant la nuit (allez à « Onglet Équipement », page 82). Il suffit de toucher l'écran pour le rallumer.

Barre d'état

Allez à la page 26 pour une description de la barre d'état.

Zone principale

La zone principale de l'écran affiche des renseignements et des modalités en cours. Vous pouvez aussi faire vos choix de traitement à cet endroit.

Zone des boutons

La zone des boutons contient les boutons de navigation **Suivant**, **Retour** et **Détails**.

Touches fléchées Haut/Bas

Les touches **fléchées Haut/Bas** (▼/▲) sont utilisées pour augmenter ou diminuer les valeurs d'un bouton.

Touche OK

La touche **OK** confirme les choix faits à l'écran tactile. Durant le traitement, la touche **OK** vous fait passer à l'étape suivante. Vous pouvez utiliser la touche **OK** pour sauter certaines actions comme Drainage et Perfusion. Appuyez pendant quatre secondes environ sur la touche **OK** pour afficher l'écran « Saut d'une phase ». Vous pouvez alors choisir de sauter une phase du traitement (allez à la page 158 pour plus de renseignements).

Touche STOP

La touche **STOP** arrête les fonctions de l'appareil. Appuyez sur la touche **STOP** durant une alarme sonore pour couper le son pendant dix minutes.

La barre d'état

Prêt

3/23/2011 11:32 AM

Mon Traitement Mes Réglages Mes Dossiers

Irrigation

7/9/2009 10:41 AM

Mon Traitement Mes Réglages Mes Dossiers

Amorçage Arrêté

9/4/2008 2:37 PM

Mon Traitement Mes Réglages Mes Dossiers

Avertissement Balance

8/1/2008 1:36 PM

Mon Traitement Mes Réglages Mes Dossiers

Réchauffeur Alarme

7/31/2008 11:55 AM

Mon Traitement Mes Réglages Mes Dossiers

Barre d'état

La barre d'état se trouve à la partie supérieure de l'écran tactile. Elle affiche différents modes, avertissements, alarmes ainsi que la date et l'heure. Elle peut prendre cinq couleurs de fond suivant les conditions de fonctionnement de l'appareil (page précédente) :

Fond bleu

Le fond de la barre d'état est bleu quand le fonctionnement de l'appareil est normal, qu'aucun problème n'a été détecté ou que rien ne se passe (fond vert ci-dessous).

Fond vert

Le fond de la barre d'état passe au vert quand l'appareil exécute une fonction : perfusion, irrigation (rinçage), amorçage, pause, contact ou drainage.

Fond jaune

Le fond de la barre d'état passe au jaune chaque fois que vous appuyez sur la touche **STOP** durant l'exécution d'une fonction (fond vert ci-dessus). Allez à « Utilisation de la touche STOP », page 154.




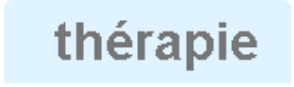




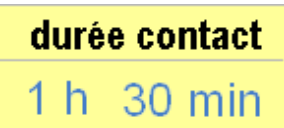



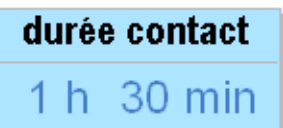
Fond orange

Les avertissements à fond orange requièrent votre attention immédiate. Lors d'un avertissement, le fond de la barre d'état tourne à l'orange, les boutons écrans deviennent inaccessibles, l'exécution de toutes les fonctions s'arrête et un signal sonore retentit. Appuyez sur la touche **STOP** pour couper le signal sonore.

Fond rouge

Les alarmes à fond rouge indiquent une panne critique de l'appareil. L'exécution de toutes les fonctions s'arrête, les boutons écrans sont inaccessibles et un signal sonore se déclenche. Si la barre d'état de l'appareil tourne au rouge, vous devez absolument arrêter le traitement et appeler un technicien. Pour plus de renseignements sur les alarmes, reportez-vous à « Avertissements et alarmes », page 170.

Les boutons de l'écran tactile

	Normaux Couleur vive ou fond de couleur vive	Choisis Couleur plus sombre ou fond de couleur plus claire	Inaccessibles ou affichage seulement Gris ou bleu clair
Boutons écrans	 	 	
Boutons navigation	 		
Boutons paramètres	  	  	 



Remarque : Les valeurs montrées ne sont que des exemples. Vous devez utiliser les valeurs prescrites par votre médecin.

Description des boutons

Les boutons sont des formes de l'écran qui contiennent un texte. Ils exécutent certaines fonctions quand on les touche.

Boutons écrans

Les boutons écrans sont de forme ovale. On les trouve habituellement dans la barre d'état, en haut de l'écran tactile. Ils jouent le rôle de « porte d'accès » à un autre ensemble d'écrans. Quand vous appuyez sur un bouton écran, il prend une couleur plus claire et affiche l'écran correspondant. Les boutons écrans sont de la même couleur que le fond de la barre d'état. Lorsqu'ils sont grisés, ils sont inaccessibles. On trouve aussi des boutons écrans à l'écran « Réglages », sous la forme d'onglets qui se trouvent dans la partie haute de la « zone principale ». Allez à la page suivante pour plus de renseignements sur les boutons écrans de la barre d'état.

Boutons navigation

Les boutons navigation sont de forme ovale et de couleur bleu clair. On les trouve habituellement dans la zone des boutons de l'écran tactile. Ils permettent de passer d'un écran à son sous-écran et vice-versa. Par exemple, quand on est dans un écran « Traitement », le bouton **Détails** vous envoie à un écran pour présenter les détails de l'écran « Traitement ».

Boutons paramètres

Les boutons paramètres sont des rectangles jaune clair qui affichent chacun une valeur du traitement. Quand vous appuyez sur un bouton paramètre, il tourne à l'orange, vous permettant de changer la valeur du paramètre affiché. Dépendant du bouton, vous pouvez changer le paramètre directement ou par l'intermédiaire d'un autre écran en utilisant d'autres touches et boutons. Les boutons paramètres grisés sont inaccessibles. Les boutons paramètres bleus ne sont pas modifiables, car ils affichent des paramètres dépendant d'autres boutons paramètres actifs.

Navigation avec les boutons écrans

The screenshot shows a medical software interface. At the top, there is a blue header with the text "Mes Réglages" on the left. To its right, three circular buttons are displayed: "Mon Traitement", "Mes Réglages", and "Mes Dossiers". These three buttons are enclosed in a red rectangular box. Below the header, the date and time "5/13/2008 3:02 PM" are shown. Underneath, there are four tabs: "thérapie", "patient", "options", and "équipement". The "patient" tab is selected. The main content area displays patient information in a yellow-bordered box:

votre prénom	
Michael	
votre nom de famille	
Smith	
no patient	poids
123456789	69.5 kg
date de naissance	sexe
04/29/1959	Mâle

Boutons écrans



Remarque : Les valeurs montrées ne sont que des exemples. Vous devez utiliser les valeurs prescrites par votre médecin.

Mon Traitement

Le bouton écran **Mon Traitement** exécute les modalités de traitement que vous avez choisies. Allez à « Début de votre traitement », page 88, pour plus de renseignements.

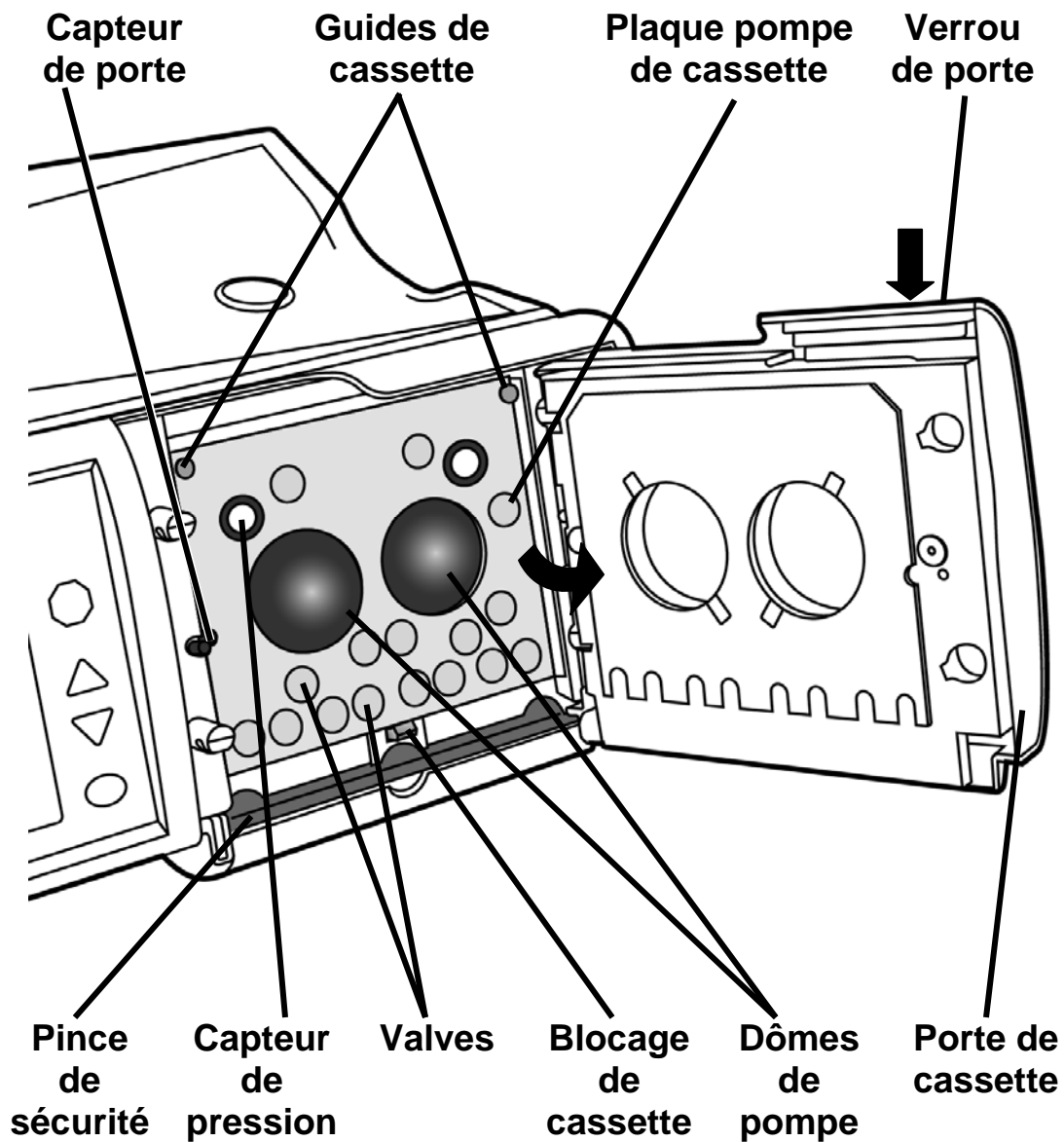
Mes Réglages

Le bouton écran **Mes Réglages** vous permet de modifier les différents réglages. Aux écrans « Réglages », vous pouvez entrer les paramètres du traitement, les données concernant le patient et les options de logiciel et d'équipement. Allez à « Réglage des paramètres du traitement », page 46, pour les instructions d'entrée des paramètres.

Mes Dossiers

Le bouton écran **Mes Dossiers** vous permet de visualiser les données du traitement courant et des traitements antérieurs. Pour plus de renseignements, allez à « Bouton écran Mes Dossiers », page 148.

Le module de pompe



Module de pompe

Le module de pompe est chargé de la perfusion dans la cavité péritonéale et du drainage de la solution de dialysat. Il commande les valves et les chambres de pompage de la cassette.

Capteur de porte

Le capteur de porte informe l'appareil que la porte est ouvert ou fermé.



Mise en garde : Ne touchez pas au capteur de porte, car ce faisant, vous indiqueriez à l'appareil que la porte est fermé, ce qui déclencherait la mise en pression du porte de cassette.

Pince de sécurité

La pince de sécurité est une barre métallique qui pince instantanément toutes les tubulures de la cassette en cas d'alarme.

Capteurs de pression

La plaque pompe de la cassette comporte également deux capteurs de pression blancs chargés de surveiller la pression durant le traitement.



Mise en garde : Ne touchez pas aux capteurs de pression blancs du module de pompe, car la pression des doigts pourrait les endommager.

Guides de cassette et blocage de cassette

Lorsque la cassette est insérée durant le traitement, elle s'adapte aux tiges métalliques se trouvant à la partie supérieure de la plaque pompe. Au bas de la plaque pompe se trouve un blocage qui maintient en place le bas de la cassette.

Plaque pompe de la cassette

La plaque pompe de la cassette est une cloison métallique épaisse percée d'orifices. Les pompes et les valves sont placées en arrière de la plaque et exercent une pression sur la cassette par les orifices.



Mise en garde : Quand la cassette est correctement en place dans l'appareil, les dômes sont orientés vers l'extérieur. Une insertion incorrecte de la cassette peut endommager l'appareil.

Porte de cassette

Une fois verrouillé, la porte de cassette maintient la cassette en place contre la plaque pompe.

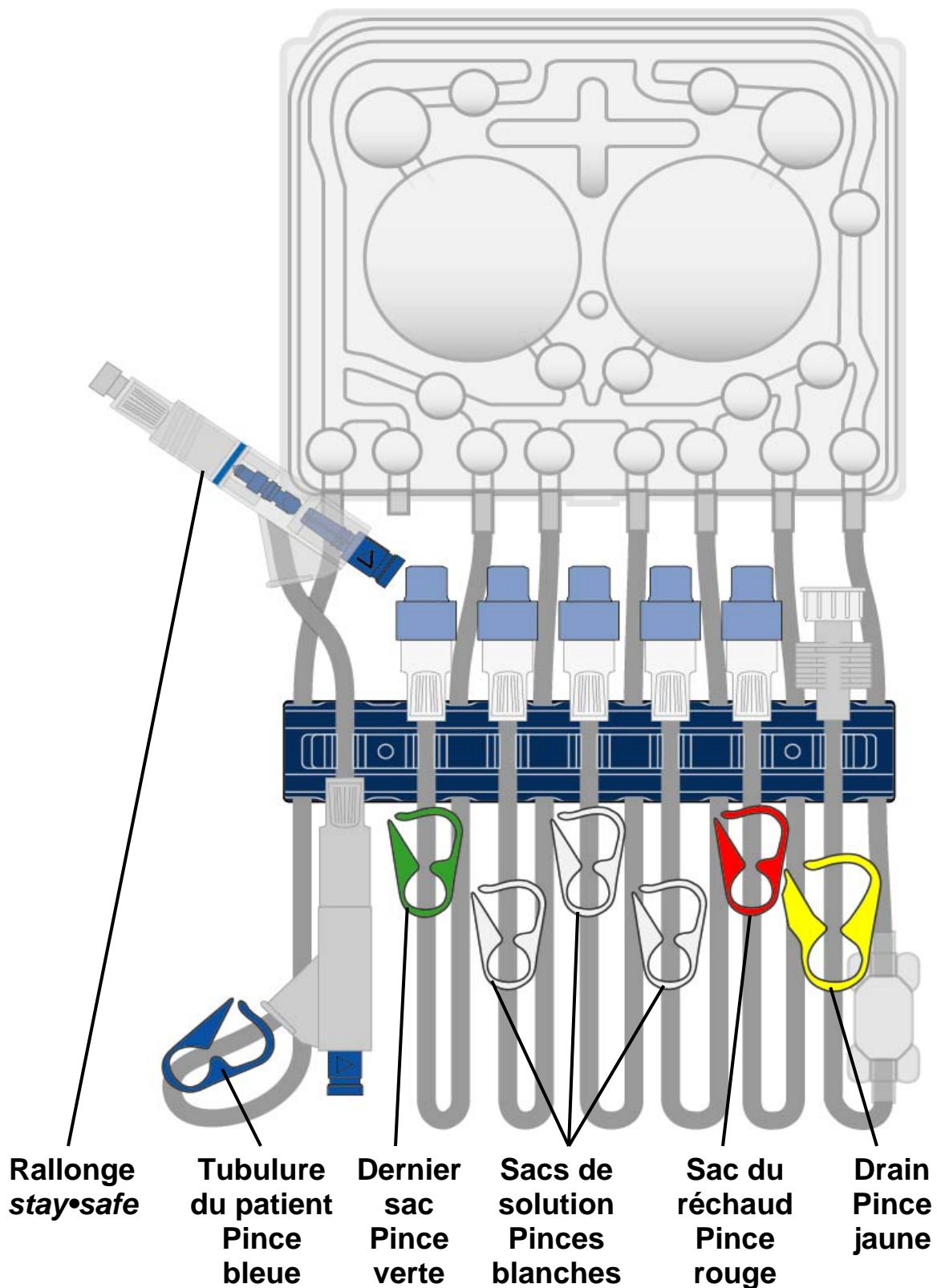
Verrou de porte

Le verrou de porte maintient la porte de pompe fermé. Durant le traitement, vous ne devez pas tenter de déverrouiller la porte de pompe à moins d'instructions dans ce sens.



Avertissement : Tenez vos doigts à distance des pièces mobiles.

La cassette et l'ensemble de tubulures



Cassette

Le dialysat et les déchets sont canalisés par un jeu de tubulures stériles, à jeter après chaque traitement. La pièce de plastique rigide insérée dans le cycleur est la « cassette ». La cassette comporte deux grands dômes de plastique. Lorsque le cycleur pousse contre la membrane située en arrière des dômes, le liquide s'écoule dans les tubulures. La cassette comporte aussi de petits dômes, ou valves, qui, lors de la compression, ferment une voie d'écoulement.

Sous la cassette, on trouve un ensemble de tubulures qui dépend du numéro du modèle. Un système organisateur de tubulures bleu foncé maintient chaque tubulure en place pendant le branchement du patient :

Connecteur de rallonge *stay•safe*

Le connecteur *stay•safe* se trouve sur la tubulure du patient à pince bleue. Il comporte un déclencheur bleu à l'extrémité et une goupille (obturateur) bleue à l'intérieur. Quand vous appuyez sur le déclencheur bleu, la goupille ferme la tubulure sans que vous ayez à y toucher.

Tubulure du patient – pince bleue

La tubulure du patient comporte une pince bleue. Elle est reliée à la rallonge du cathéter.

Tubulure de dernier sac – pince verte

La tubulure 4 comporte une pince verte. Au besoin, elle est reliée au dernier sac, qui peut contenir la même solution ou une solution différente pour la dernière perfusion.

Tubulure 3 de solution – pince blanche

La tubulure 3 comporte une pince blanche. Elle est reliée au troisième sac de solution au besoin.

Tubulure 2 de solution – pince blanche

La tubulure 2 comporte une pince blanche. Elle est reliée au deuxième sac au besoin.

Tubulure 1 de solution – pince blanche

La tubulure 1 comporte une pince blanche. Elle est reliée au premier sac au besoin.

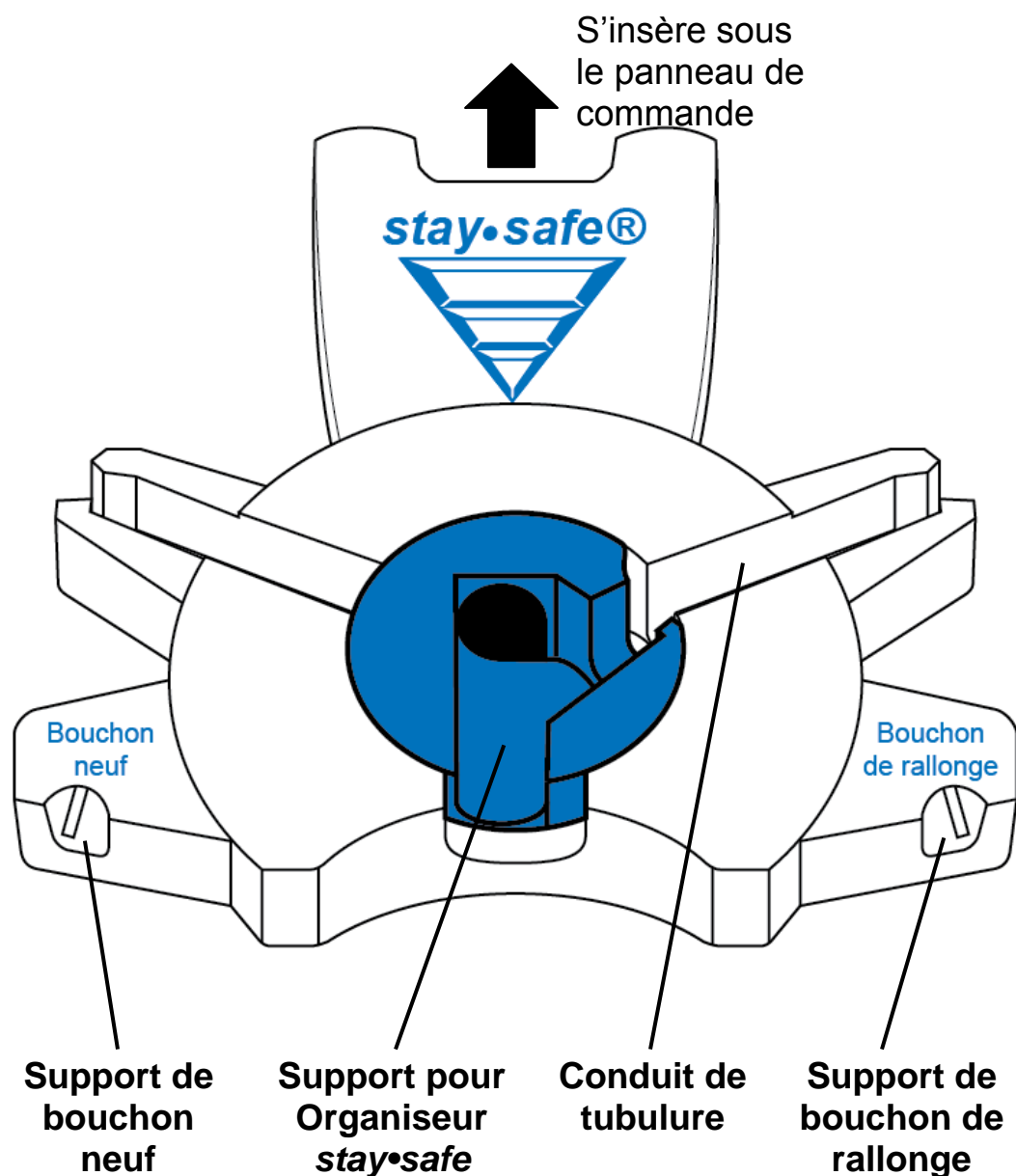
Tubulure de sac de réchaud – pince rouge

La tubulure de sac de réchaud comporte une pince rouge. Elle est reliée au sac de solution de dialysat placé sur le plateau réchaud.

Tubulure de drainage – pince jaune

La tubulure de drainage comporte une pince jaune. Elle est reliée à la tubulure de drainage ou à l'ensemble du sac de drainage. Une « fenêtre » transparente permet de vérifier la limpidité du liquide ou la présence de fibrine pendant le pompage vers le drain.

Le système *stay•safe*



Système stay•safe

Une technique aseptique durant le traitement permet de réduire le risque d'infection. Le système *stay•safe* vous aide à utiliser une telle technique aseptique. Insérez le système *stay•safe* sur la languette de montage du cycleur sous le panneau de commande. Le système *stay•safe* est prêt à recevoir le connecteur *stay•safe* durant les réglages du traitement. Pour plus de renseignements sur le connecteur *stay•safe*, allez à la page 34.

Support de bouchon neuf

Insérez un bouchon *stay•safe* neuf dans ce support pour le garder propre pendant que vos deux mains sont occupées à installer les tubulures. C'est une manière de vous rappeler de toujours utiliser un bouchon *stay•safe* neuf.

Support pour Organiseur *stay•safe*

Le connecteur *stay•safe* de la tubulure patient à pince bleue s'insère dans ce support. L'organiseur le maintient en place pour vous permettre de vous y brancher quand le cycleur vous en donne l'instruction.

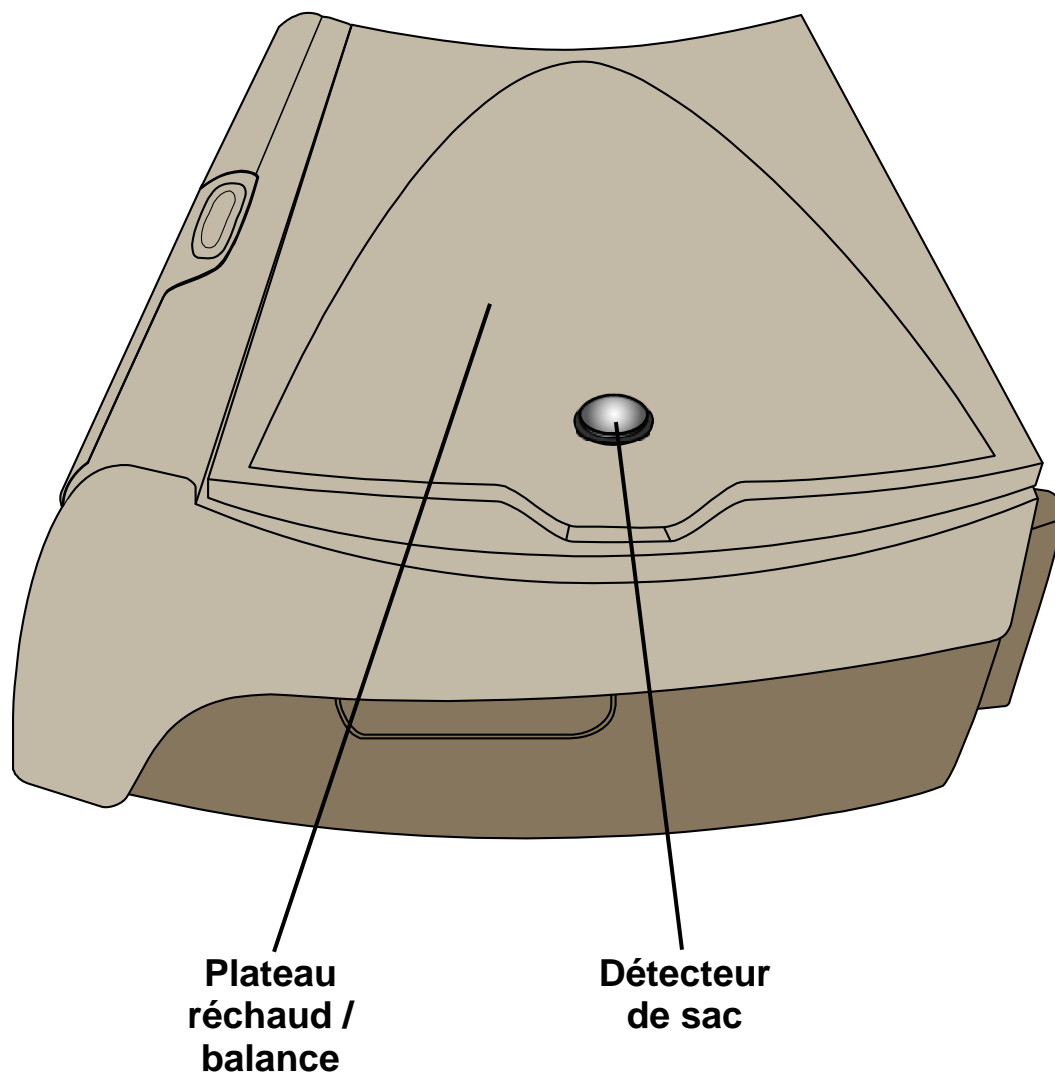
Conduit de tubulure

C'est là que vous insérez la tubulure aboutissant à la cassette, pour la maintenir en place. Veillez à insérer fermement la tubulure dans le conduit pour l'empêcher de sortir.

Support de bouchon de rallonge

Le support de bouchon de rallonge maintient le bouchon usagé en place pendant que vous l'enlevez de l'extrémité de la rallonge. Insérez le bouchon usagé alors qu'il est connecté, dévissez-le et branchez la tubulure à un connecteur *stay•safe* neuf.

Le plateau réchaud



Plateau réchaud / balance

Le plateau réchaud réchauffe le sac de solution de dialysat à la température fixée en 20 minutes environ. Le plateau réchaud joue aussi le rôle de balance, en pesant le sac de solution.



Avertissement : Vérifiez le plateau réchaud pour vous assurer que rien ne fait obstacle et qu'il ne touche pas le haut du boîtier du cycleur (il doit y avoir un écart uniforme entre les deux sur tout le pourtour de l'appareil.) Tout contact avec le plateau peut fausser les pesées de dialysat, avec risque de lésion pour le patient.

Avertissement : Durant le réchauffement de la solution, le plateau réchaud peut atteindre 50° C (122° F) et peut vous brûler si vous le touchez.



Mise en garde : Ne saisissez pas l'appareil par le plateau de réchauffeur/balance, car cela pourrait endommager la balance.

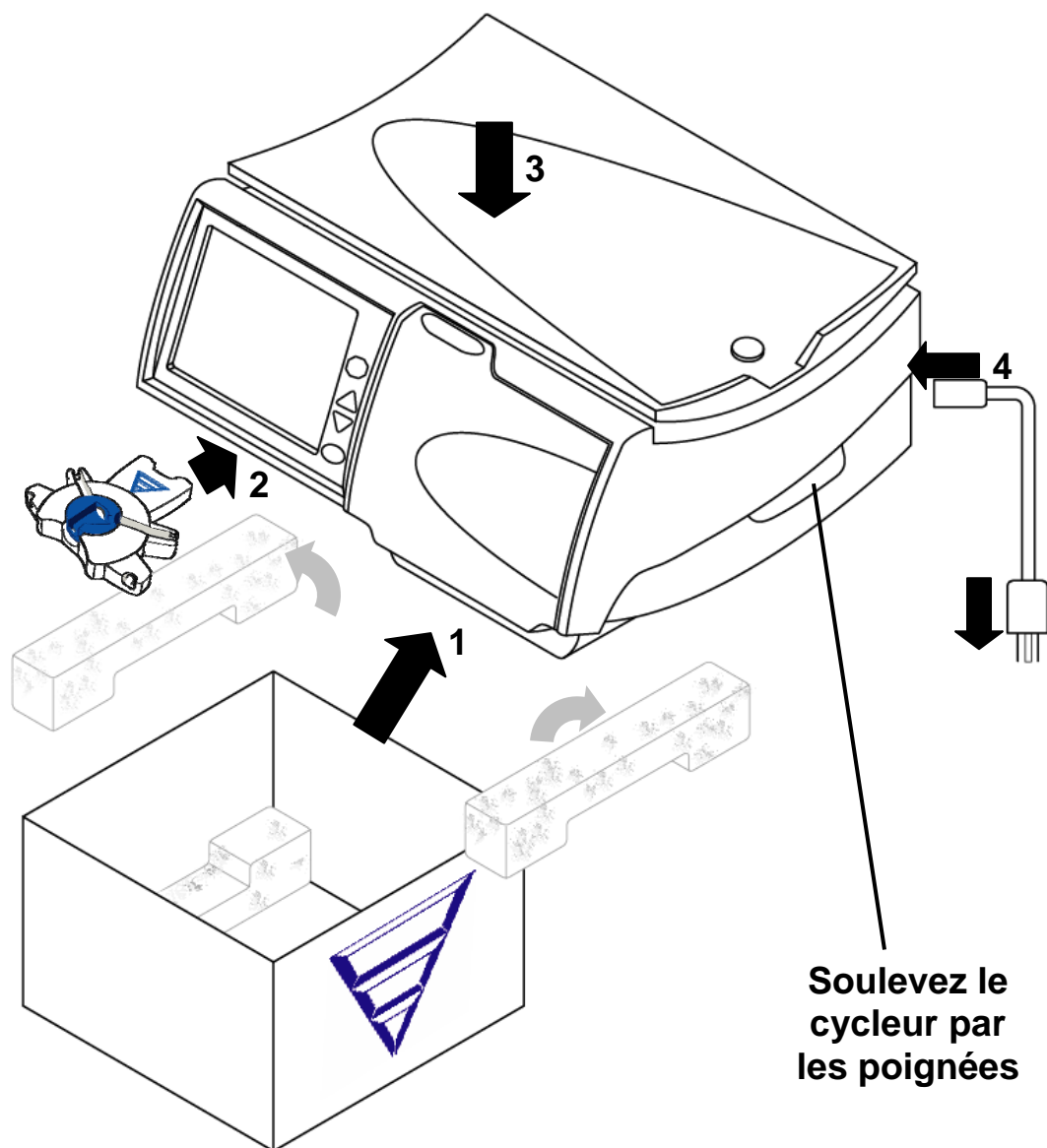
Mise en garde : Ne placez rien d'autre que des sacs de solution sur le plateau réchaud.

Mise en garde : Ne surchargez pas la balance. Les charges dépassant 15 kg (33 lb) ou trois sacs de 5000 mL de solution peuvent endommager l'appareil.

Détecteur de sac

Le détecteur de sac mesure la température de la solution de dialysat du sac du réchaud.

Installation de votre cycleur Liberty



Installation de votre cycleur Liberty

L'installation de votre cycleur Liberty est simple. Suivez les instructions ci-dessous :

1 Sortez le cycleur Liberty de la boîte

- Saisissez le cycleur par les poignées qui se trouvent de chaque côté.
- Soulevez-le avec précaution pour le sortir de la boîte. Placez-le sur une surface horizontale stable, par exemple une table, l'écran vers vous.
- Enlevez la mousse de protection des deux côtés de votre cycleur Liberty. Conservez toute la mousse et tout l'emballage pour pouvoir remballer le cycleur au besoin.
- Positionnez votre cycleur près du bord de la table ou du chariot pour permettre aux tubulures de la cassette de pendre sans risque de pliure ou de pincement.



Avertissement : Utilisez une technique appropriée : soulevez le cycleur en pliant les genoux et en gardant le dos droit.



Mise en garde : Ne soulevez pas l'appareil par le plateau. Vous pourriez endommager la balance.

Mise en garde : Assurez-vous que la sortie de ventilateur, à l'arrière de l'appareil, est dégagée.

2 Connectez le système *stay•safe*

Poussez le système *stay•safe* sur la languette de montage sous le panneau de commande.

3 Vérifiez le plateau réchaud installé sur le boîtier du cycleur



Avertissement : Vérifiez le plateau réchaud pour vous assurer que rien ne fait obstacle et qu'il ne touche pas le haut du boîtier du cycleur (c'est-à-dire qu'il doit y avoir un écart uniforme entre les deux sur tout le pourtour de l'appareil.) Tout contact avec le plateau peut fausser les pesées de dialysat, avec risque de lésion pour le patient.

4 Branchez l'appareil

Branchez le cordon d'alimentation dans la prise à l'arrière de l'appareil. Branchez la fiche à trois broches du cordon dans une prise électrique de 120 volts. Allez à la page 44 pour une illustration de l'arrière de l'appareil .

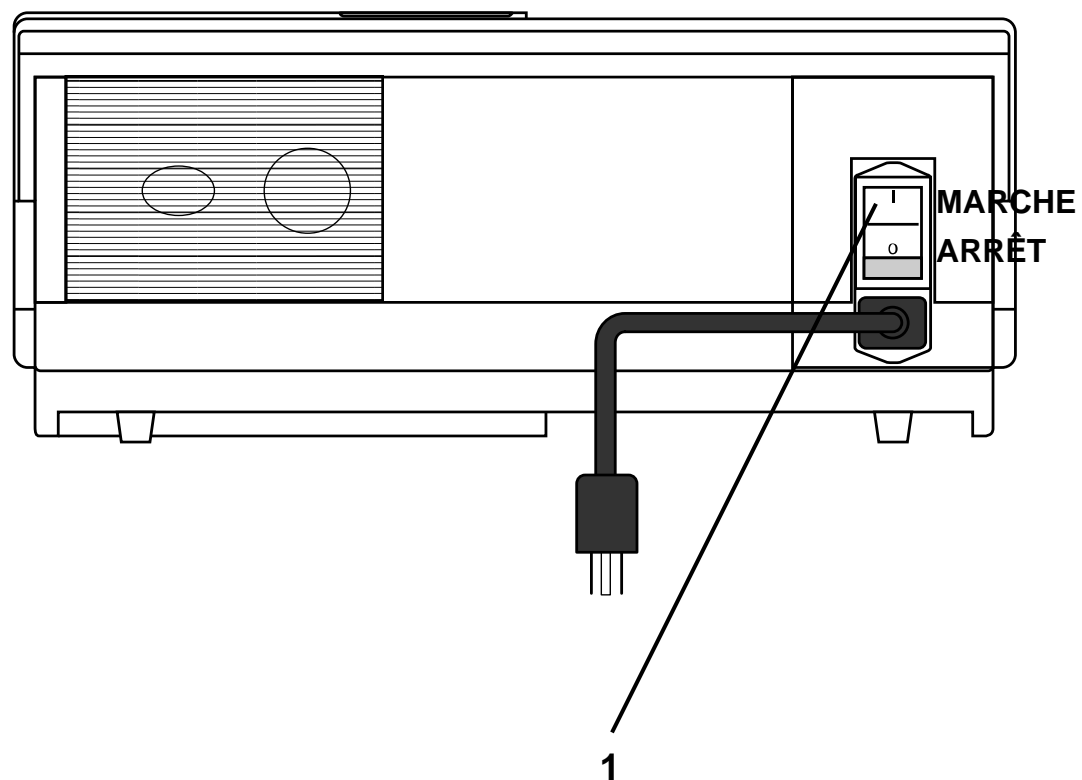


Avertissement : Si la fiche n'entre pas dans la prise de l'appareil ou dans la prise électrique, contactez le service technique. Ne modifiez pas le cordon d'alimentation. L'appareil doit être branché directement dans une prise électrique. N'utilisez ni rallonge, ni barre multiprise.

Page laissée intentionnellement vide

Mes Réglages

Entrée de la prescription



Entrée de la prescription

Avant de commencer votre premier traitement, vous devez entrer les paramètres du traitement prescrit par votre médecin. Vous n'aurez plus besoin de le faire par la suite, à moins que votre prescription ne change.

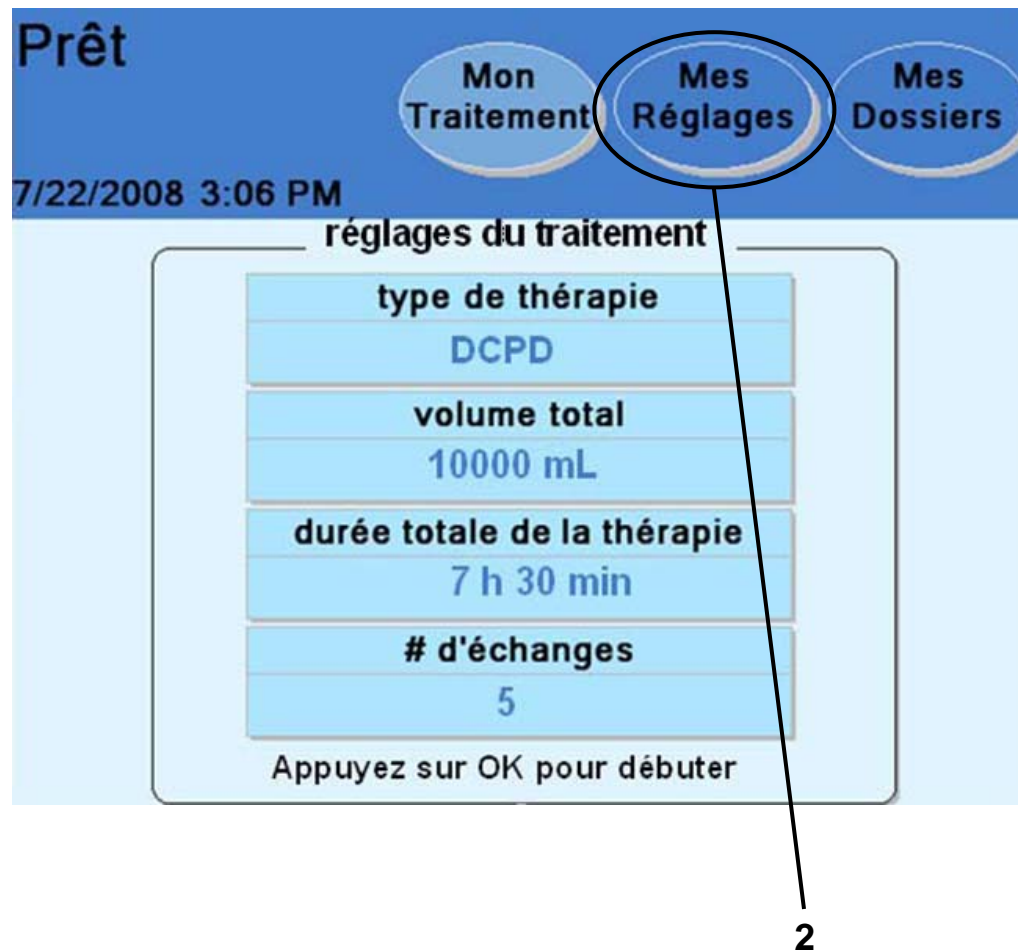
Si le personnel de soins vous a fourni une unité IQdrive et que l'option USB est réglée sur OUI (allez à « Onglet Options », page 80), vous pouvez insérer maintenant l'unité IQdrive dans le port USB, à l'arrière de l'appareil. Allez à « Utilisation de l'unité IQdrive », page 162, pour plus de détails sur l'insertion de l'unité IQdrive.

Les éléments numérotés dans l'image à gauche correspondent aux étapes de cette page. Exécutez les étapes dans l'ordre, en portant une attention toute particulière aux remarques, aux mises en garde et aux avertissements.

1 Mettez le commutateur du cycleur à la position de marche (I)

Localiser le commutateur blanc à l'arrière de l'appareil et placez-le à la position de marche (I). L'écran « Prêt » s'affiche peu après à l'écran tactile.

Réglage des paramètres du traitement



Remarque : Les valeurs montrées ne sont que des exemples. Vous devez utiliser les valeurs prescrites par votre médecin.



Remarque : Il est inutile d'entrer votre nom et les paramètres de votre traitement s'ils sont déjà affichés à l'écran. Vous pouvez commencer votre traitement en allant à la page 86.

2 Appuyez sur **Mes Réglages**

La première fois que vous mettez l'appareil en marche, l'écran « Prêt » affiche des valeurs de traitement par défaut, pour un patient « inconnu ».

Avant de commencer votre premier traitement, vous devez donc entrer les paramètres du traitement prescrit par votre médecin, s'ils ne sont pas déjà programmés par l'intermédiaire de l'unité IQdrive. Utilisez les paramètres de la fiche « Mes Paramètres de traitement », à la page 2, ou suivez les instructions du personnel de soins.

Pour commencer à entrer les réglages du traitement, appuyez sur le bouton écran **Mes Réglages**. Vous passez alors à l'écran « Mes Réglages ».



Remarque : Si l'option « USB activé » à « Mes Réglages/Onglet Options » est réglée sur OUI et si une unité IQdrive est insérée correctement dans le port USB du cycleur, il se peut que cet écran ne s'affiche pas immédiatement. Allez à «Utilisation de l'unité IQdrive », page 162, pour plus de détails.

Remarque : Si l'option « USB activé » est réglée sur OUI alors qu'il n'y a pas d'unité IQdrive dans le port USB du cycleur, les données de traitement sont sauvegardées uniquement dans le cycleur.

Remarque : Si vous utilisez l'unité IQdrive pour programmer votre traitement, vous n'avez pas à entrer les données de thérapie. Allez à la page 70 pour entrer vos réglages de patient, d'options et d'équipement

Sélection de l'onglet thérapie

Mes Réglages

Mon Traitement Mes Réglages Mes Dossiers

5/14/2008 3:57 PM

thérapie patient options équipement

type de thérapie

DPCC DPI

DP+ TIDAL

Pour enfants

Selon le traitement

Selon le cycle

3 4

3 Choisissez le mode de programme

L'écran « Mes Réglages » affiche les options de thérapie à votre disposition.

Appuyez sur le mode de programme sur lequel votre prescription est basée : selon le traitement ou selon le cycle. Une croix indique le mode de programme choisi.

Selon le traitement - Indique que vous fixez la durée totale du traitement. Votre cycleur vous fournira le traitement dans les délais spécifiés. Ce mode est utile pour les personnes qui ont besoin de finir le traitement à une certaine heure pour pouvoir honorer d'autres obligations, professionnelles par exemple.

Selon le cycle - Indique que votre cycleur maintiendra toujours la durée de contact que vous fixez. De cette manière vous êtes sûr de bénéficier de la durée de contact spécifique qui permet à vos reins de filtrer les déchets et d'éliminer l'excédent de liquide. La durée totale du traitement peut varier suivant la manière dont vous drainez ou remplissez le liquide ou s'il y a eu des alarmes.

Selon les résultats du traitement, votre médecin ou l'infirmière de dialyse peut vous faire passer du mode selon le traitement au mode selon le cycle et inversement.

4 Choisissez le type de thérapie

Appuyez sur le bouton relatif au traitement prescrit. L'appareil affiche l'écran qui lui correspond. Allez à la page correspondante dans la liste ci-après :

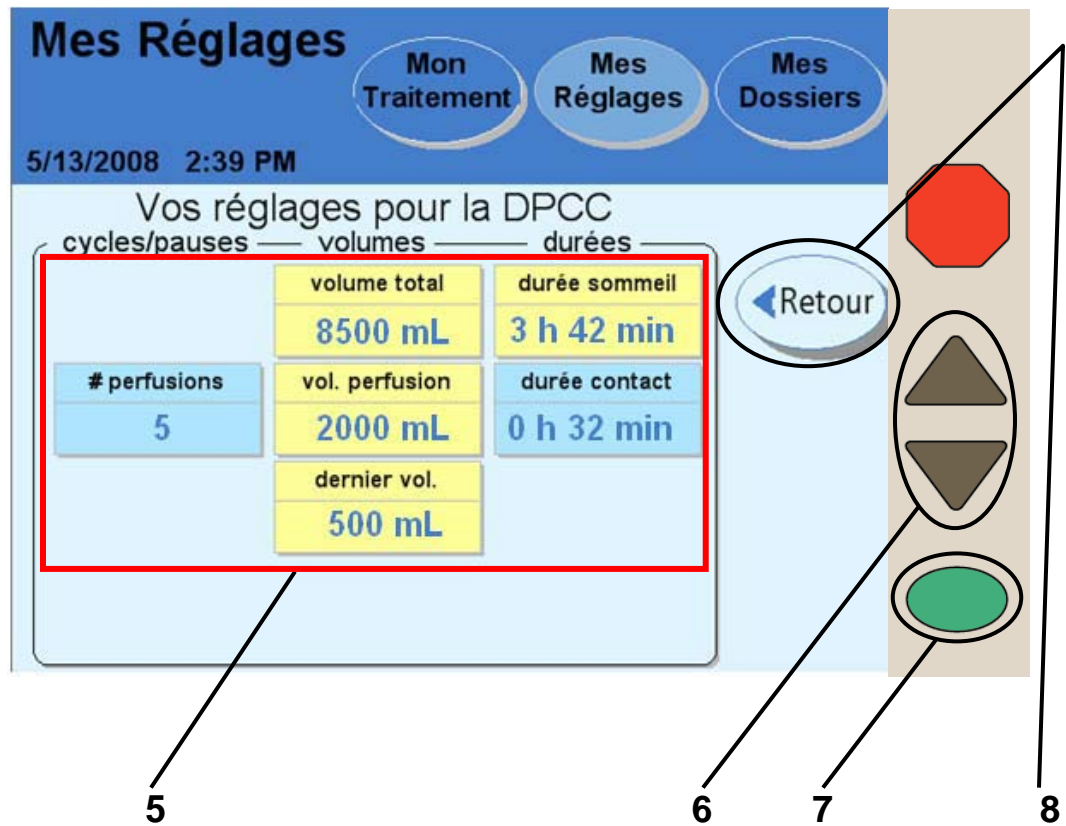
- **DPCC : Selon le traitement** — Allez à la page 50
- **DPCC : Selon le cycle** — Allez à la page 52
- **DPI : Selon le traitement** — Allez à la page 53
- **DPI : Selon le cycle** — Allez à la page 55
- **DP+ : Selon le traitement** — Allez à la page 58
- **DP+ : Selon le cycle** — Allez à la page 59
- **TIDAL : Selon le traitement** — Allez à la page 62
- **TIDAL : Selon le cycle** — Allez à la page 65
- **Pour enfants** — N'est pas encore disponible

Allez à la page 116 des renseignements sur les différents types de thérapie.



Remarque : Les valeurs montrées ne sont que des exemples. Vous devez utiliser les valeurs prescrites par votre médecin. Allez à « Mes Paramètres de traitement », page 2.

Réglages DPCC selon le traitement



Remarque : Les valeurs montrées ne sont que des exemples. Vous devez utiliser les valeurs prescrites par votre médecin



Remarque : Si une thérapie selon le cycle vous est prescrite, les options affichées seront différentes. Allez à la page 52 pour la DPCC selon le cycle.

5 Choisissez les valeurs

Appuyez sur le bouton jaune pour choisir la valeur correspondante :

- **Volume total** — Quantité de dialysat utilisée durant tout le traitement
- **Volume perfusion** — Quantité prévue pour chaque perfusion (sauf la dernière)
- **Dernier volume** — Quantité de la dernière perfusion
- **Durée sommeil** — Total estimatif de tous les temps de drainage, perfusion et contact durant le traitement



Remarque : Les boutons bleu clair ne peuvent être choisis. Votre appareil calcule les valeurs affichées aux boutons bleus en fonction des valeurs que vous avez entrées aux boutons jaunes.

Remarque : Si l'option « dernier sac » était réglée sur OUI, le bouton **dernier volume** affichera en fait le volume du dernier sac. Pour régler l'option de dernier sac, allez à « Onglet Options », page 80.

6 Entrez les valeurs

Quand vous appuyez sur un bouton jaune, il tourne à l'orange. Utilisez les touches **fléchées Haut/Bas** (▼/▲) pour choisir la valeur prescrite.

Recommencez pour entrer toutes les valeurs prescrites.

7 Appuyez sur **OK**

Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer les réglages et les enregistrer.

8 Appuyez sur **Retour**

Appuyez sur le bouton **Retour** pour retourner à l'écran principal « Mes Réglages ».

Allez à la page 70 pour entrer vos réglages personnels à l'« Onglet Patient ».

Réglages DPCC selon le cycle

Mes Réglages

Mon Traitement Mes Réglages Mes Dossiers

5/13/2008 2:42 PM

Vos réglages pour la DPCC

cycles/pauses	volumes	durées	
# perfusions	vol. perfusion	durée contact	
5	2000 mL	0 h 37 min	
		durée perfusion	
		0 h 10 min	
	dernier vol.	durée drainage	
	500 mL	0 h 12 min	
	volume total	durée sommeil	
	8500 mL	4 hr 18min	

5 6 7 8



Remarque : Les valeurs montrées ne sont que des exemples.
Vous devez utiliser les valeurs prescrites par votre médecin.



Remarque : Si une thérapie selon le traitement vous est prescrite, les options affichées seront différentes. Allez à la page 50 pour la DPCC selon le traitement.

5 Choisissez les valeurs

Appuyez sur le bouton jaune pour choisir la valeur correspondante :

- **# perfusions** — Nombre de perfusions durant le traitement
- **Volume perfusion** — Quantité de chaque perfusion (sauf la dernière)
- **Dernier volume** — Quantité de la dernière perfusion
- **Durée contact** — Durée de contact péritonéal du dialysat
- **Durée perfusion** — Temps disponible pour la perfusion
- **Durée de drainage** — Temps disponible pour le drainage après le contact



Remarque : Les boutons bleu clair ne peuvent être choisis. Votre appareil calcule les valeurs affichées par les boutons bleus en fonction des valeurs que vous avez entrées aux boutons jaunes.

Remarque : Si l'option « dernier sac » était réglée sur OUI, le bouton **dernier volume** affichera en fait le volume du dernier sac. Pour régler l'option de dernier sac, allez à « Onglet Options », page 80.

6 Entrez les valeurs

Quand vous appuyez sur un bouton jaune, il tourne à l'orange. Utilisez les touches **fléchées Haut/Bas** (▼/▲) pour choisir la valeur prescrite.

Recommencez pour entrer toutes les valeurs prescrites.

7 Appuyez sur **OK**

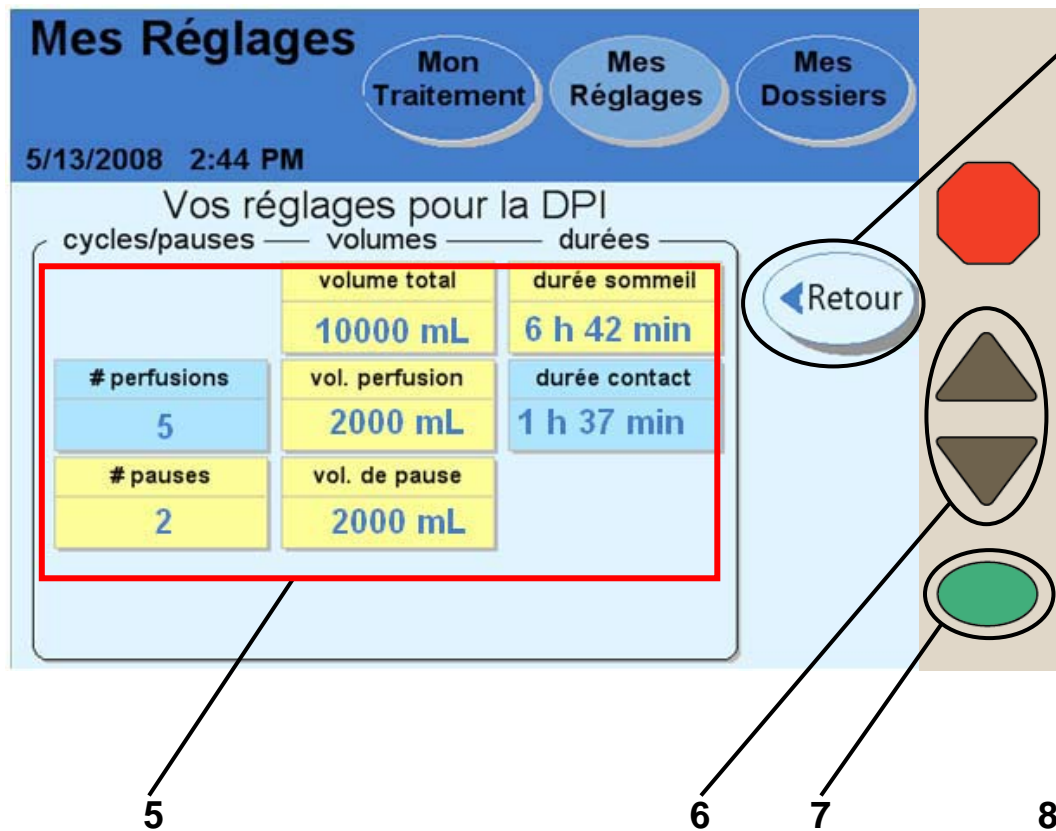
Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer les réglages et les enregistrer.

8 Appuyez sur **Retour**

Appuyez sur le bouton **Retour** pour retourner à l'écran principal « Mes Réglages ».

Allez à la page 70 pour entrer vos réglages personnels à l'« Onglet Patient ».

Réglages DPI selon le traitement



Remarque : Les valeurs montrées ne sont que des exemples.
Vous devez utiliser les valeurs prescrites par votre médecin



Remarque : Si une thérapie selon le cycle vous est prescrite, les options affichées seront différentes. Allez à la page 56 pour la DPI selon le cycle.

5 Choisissez les valeurs

Appuyez sur le bouton jaune pour choisir la valeur correspondante :

- **# pauses** — Nombre de pauses durant le traitement
- **Volume total** — Quantité de dialysat utilisée pour tout le traitement
- **Volume perfusion** — Quantité de chaque perfusion
- **Volume de pause** — Volume de perfusion à chaque pause
- **Durée sommeil** — Total estimatif de tous les temps de drainage, perfusion et contact durant le traitement



Remarque : Les boutons bleu clair ne peuvent être choisis. Votre appareil calcule les valeurs affichées par les boutons bleus en fonction des valeurs entrées aux boutons jaunes.

Remarque : Si l'option « dernier sac » était réglée sur OUI, le bouton **dernier volume** affichera en fait le volume du dernier sac. Pour régler l'option dernier sac, allez à « Onglet Options », page 80.

6 Entrez les valeurs

Quand vous appuyez sur un bouton jaune, il tourne à l'orange. Utilisez les touches **fléchées Haut/Bas** (▼/▲) pour choisir la valeur prescrite.

Recommencez pour entrer toutes les valeurs prescrites.

7 Appuyez sur **OK**

Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer les réglages et les enregistrer.

8 Appuyez sur **Retour**

Appuyez sur le bouton **Retour** pour retourner à l'écran principal « Mes Réglages ».

Allez à la page 70 pour entrer vos réglages personnels à l'« Onglet Patient ».

Réglages DPI selon le cycle

Mes Réglages Mon Traitement Mes Réglages Mes Dossiers

5/13/2008 2:47 PM

Vos réglages pour la DPI

cycles/pauses		volumes	durées	
# perfusions	vol. perfusion		durée contact	
5	2000 mL		0 h 37 min	
# pauses	vol. de pause		durée perfusion	
2	2000 mL		0 h 12 min	
			durée drainage	
			0 h 15 min	
		volume total	durée sommeil	
		10000 mL	4 h 6 min	

5 6 7 8



Remarque : Les valeurs montrées ne sont que des exemples.
Vous devez utiliser les valeurs prescrites par votre médecin.



Remarque : Si une thérapie selon le traitement vous est prescrite, les options affichées seront différentes. Allez à la page 53 pour la DPI selon le traitement.

5 Choisissez les valeurs

Appuyez sur le bouton jaune pour choisir la valeur correspondante :

- **# perfusions** — Nombre de perfusions durant le traitement
- **# pauses** — Nombre de pauses durant le traitement
- **Volume perfusion** — Quantité de chaque perfusion
- **Volume de pause** — Volume de perfusion à chaque pause
- **Durée contact** — Durée de contact péritonéal du dialysat
- **Durée perfusion** — Temps disponible pour la perfusion
- **Durée drainage** — Temps disponible pour le drainage après la période de contact



Remarque : Les boutons bleu clair ne peuvent être choisis. Votre appareil calcule les valeurs affichées par les boutons bleus en fonction des valeurs que vous avez entrées aux boutons jaunes.

6 Entrez les valeurs

Quand vous appuyez sur un bouton jaune, il tourne à l'orange. Utilisez les touches **fléchées Haut/Bas** (▼/▲) pour choisir la valeur prescrite.

Recommencez pour entrer toutes les valeurs prescrites.

7 Appuyez sur **OK**

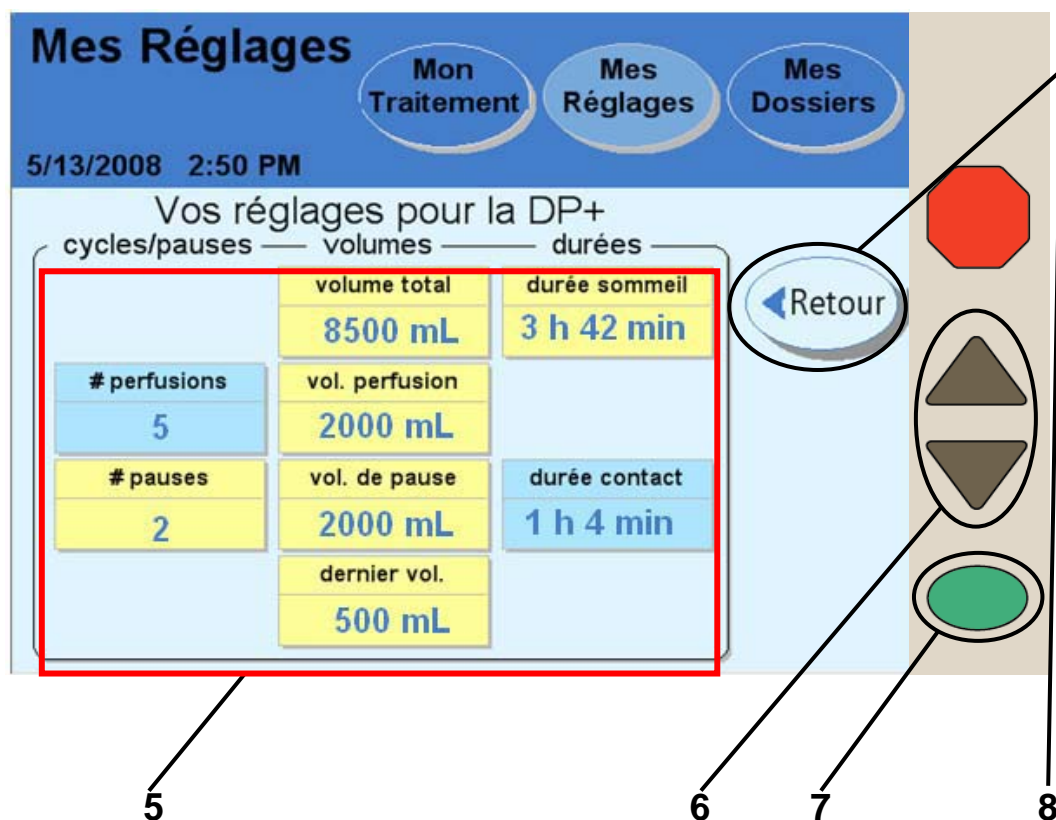
Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer les réglages et les enregistrer.

8 Appuyez sur **Retour**

Appuyez sur le bouton **Retour** pour retourner à l'écran principal « Mes Réglages ».

Allez à la page 70 pour entrer vos réglages personnels à l'« Onglet Patient ».

Réglages DP+ selon le traitement



Remarque : Les valeurs montrées ne sont que des exemples.
Vous devez utiliser les valeurs prescrites par votre médecin.



Remarque : Si une thérapie selon le cycle vous est prescrite, les options affichées seront différentes. Allez à la page 60 pour la DP+ selon le cycle.

5 Choisissez les valeurs

Appuyez sur le bouton jaune pour choisir la valeur correspondante :

- **# pauses** — Nombre de pauses durant le traitement
- **Volume total** — Quantité de dialysat utilisée pour tout le traitement
- **Volume perfusion** — Quantité de chaque perfusion (sauf la dernière)
- **Volume de pause** — Volume de perfusion à chaque pause
- **Dernier volume** — Quantité de la dernière perfusion
- **Durée sommeil** — Total estimatif de tous les temps de drainage, perfusion et contact durant le traitement



Remarque : Les boutons bleu clair ne peuvent être choisis. Votre appareil calcule les valeurs affichées par les boutons bleus en fonction des valeurs que vous avez entrées aux boutons jaunes.

Remarque : Si l'option « dernier sac était réglée sur OUI, le bouton **dernier volume** sera en fait le volume du de dernier sac. Pour régler l'option de dernier sac, allez à « Onglet Options », page 80.

6 Entrez les valeurs

Quand vous appuyez sur un bouton jaune, il tourne à l'orange. Utilisez les touches **fléchées Haut/Bas** (▼/▲) pour choisir la valeur prescrite.

Recommencez pour entrer toutes les valeurs prescrites.

7 Appuyez sur

Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer les réglages et les enregistrer.

8 Appuyez sur

Appuyez sur le bouton **Retour** pour retourner à l'écran principal « Mes Réglages ».

Allez à la page 70 pour entrer vos réglages personnels à l'« Onglet Patient ».

Réglages DP+ selon le cycle

Mes Réglages Mon Traitement Mes Réglages Mes Dossiers

5/13/2008 2:53 PM

Vos réglages pour la DP+
cycles/pauses — volumes — durées

# perfusions	vol. perfusion	durée contact
5	2000 mL	0 h 37 min
# pauses	vol. de pause	durée perfusion
2	2000 mL	0 h 10 min
	dernier vol.	durée drainage
	500 mL	0 h 12 min
	volume total	durée sommeil
	8500 mL	4 h 2 min

Retour

5 6 7 8



Remarque : Les valeurs montrées ne sont que des exemples. Vous devez utiliser les valeurs prescrites par votre médecin.



Remarque : Si une thérapie selon le traitement vous est prescrite, les options affichées seront différentes. Allez à la page 58 pour la DP+ selon le traitement.

5 Choisissez les valeurs

Appuyez sur le bouton jaune pour choisir la valeur correspondante :

- **# perfusions** — Nombre de perfusions durant le traitement
- **# pauses** — Nombre de pauses durant le traitement
- **Volume perfusion** — Quantité de chaque perfusion (sauf la dernière)
- **Volume de pause** — Volume de perfusion à chaque pause
- **Dernier volume** — Quantité de la dernière perfusion
- **Durée contact** — Durée de contact péritonéal du dialysat
- **Durée perfusion** — Temps disponible pour la perfusion
- **Durée drainage** — Temps disponible pour le drainage après le contact



Remarque : Les boutons bleu clair ne peuvent être choisis. Votre appareil calcule les valeurs affichées par les boutons bleus en fonction des valeurs entrées aux boutons jaunes.

Remarque : Si l'option « dernier sac était réglée sur OUI, le bouton **dernier volume** affichera en fait le volume du dernier sac. Pour régler l'option de dernier sac, allez à « Onglet Options », page 80.

6 Entrez les valeurs

Quand vous appuyez sur un bouton jaune, il tourne à l'orange. Utilisez les touches **fléchées Haut/Bas** (▼/▲) pour choisir la valeur prescrite.

Recommencez pour entrer toutes les valeurs prescrites.

7 Appuyez sur

Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer les réglages et les enregistrer.

8 Appuyez sur

Appuyez sur le bouton **Retour** pour retourner à l'écran principal « Mes Réglages ».

Allez à la page 70 pour entrer vos réglages personnels à l'« Onglet Patient ».

Réglages DP fluctuante (tidal) selon le traitement

Mes Réglages Mon Traitement Mes Réglages Mes Dossiers

5/13/2008 2:55 PM

Vos réglages pour la DP fluctuante (tidal)

cycles/pauses — volumes — durées

	volume total	durée sommeil
	6500 mL	6 h 43 min
# pauses	vol. de pause	
1	2000 mL	
	premier vol.	
	2000 mL	
# perfusions	volume tidal	durée contact
5	1000 mL	1 h 50 min

Retour

Suivant

5 6 7 8



Remarque : Les valeurs montrées ne sont que des exemples. Vous devez utiliser les valeurs prescrites par votre médecin.



Remarque : Si une thérapie selon le cycle vous est prescrite, les options affichées seront différentes. Allez à la page 65 pour la DP fluctuante selon le cycle.

5 Choisissez les valeurs

Appuyez sur le bouton jaune pour choisir la valeur correspondante :

- **# pauses** — Nombre de pauses durant le traitement
- **Volume total** — Quantité de dialysat utilisée pour tout le traitement
- **Volume de pause** — Volume de perfusion à chaque pause
- **Premier volume** — Quantité de la première perfusion
- **Volume tidal** — Quantité de perfusion à chaque échange
- **Durée sommeil** — Total estimatif de tous les temps de drainage, perfusion et contact durant le traitement



Remarque : Les boutons bleu clair ne peuvent être choisis. Votre appareil calcule les valeurs affichées par les boutons bleus en fonction des valeurs entrées aux boutons jaunes.

6 Entrez les valeurs

Quand vous appuyez sur un bouton jaune, il tourne à l'orange. Utilisez les touches **fléchées Haut/Bas** (▼/▲) pour choisir la valeur prescrite.

Recommencez pour entrer toutes les valeurs prescrites.

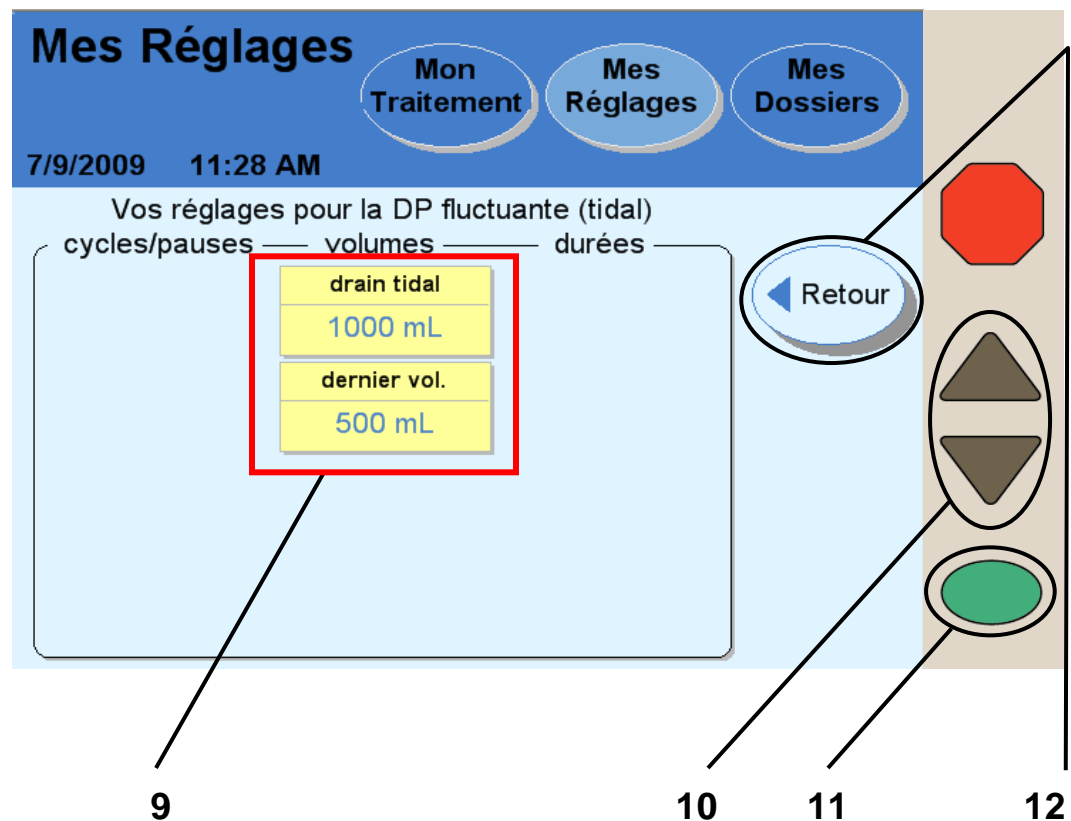
7 Appuyez sur **OK**

Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer les réglages et les enregistrer.

8 Appuyez sur **Suivant**

Appuyez sur le bouton **Suivant** pour passer à l'écran suivant.

Réglages DP fluctuante (tidal) selon le traitement (suite)



Remarque : Les valeurs montrées ne sont que des exemples. Vous devez utiliser les valeurs prescrites par votre médecin.

9 Choisissez les valeurs

Appuyez sur le bouton jaune pour choisir la valeur correspondante :

- **Drain tidal** — Quantité à drainer à chaque échange
- **Dernier volume** — Quantité de la dernière perfusion



Avertissement : Le volume de drainage TIDAL doit comprendre le volume de perfusion TIDAL plus l'UF attendue du contact TIDAL pour empêcher une situation de surcharge. Une surcharge de liquide peut causer des lésions graves voire mortelles.



Remarque : Les boutons bleu clair ne peuvent être choisis. Votre appareil calcule les valeurs affichées par les boutons bleus en fonction des valeurs entrées aux boutons jaunes.

Remarque : Si l'option « dernier sac » était réglée sur OUI, le bouton **dernier volume** affichera en fait le volume du dernier sac. Pour régler l'option de dernier sac, allez à « Onglet Options », page 80.

10 Entrez les valeurs

Quand vous appuyez sur un bouton jaune, il tourne à l'orange. Utilisez les touches **fléchées Haut/Bas** (▼/▲) pour choisir la valeur prescrite.

Recommencez pour entrer toutes les valeurs prescrites.

11 Appuyez sur **OK**

Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer les réglages et les enregistrer.

12 Appuyez sur **Retour**

Appuyez sur le bouton **Retour** pour revenir à l'écran précédent, puis appuyez à nouveau sur le bouton **Retour** pour retourner à l'écran principal « Mes Réglages ».

Allez à la page 70 pour entrer vos réglages personnels à l'« Onglet Patient ».

Réglages DP fluctuante (tidal) selon le cycle

Mes Réglages Mon Traitement Mes Réglages Mes Dossiers

5/13/2008 2:59 PM

Vos réglages pour la DP fluctuante (tidal)

cycles/pauses	volumes	durées
# pauses	vol. de pause	durée contact
1	2000 mL	0 h 37 min
	premier vol.	durée perfusion
	2000 mL	0 h 10 min
# perfusions	volume tidal	durée drainage
5	1000 mL	0 h 6 min
	volume total	durée sommeil
	6500 mL	3 h 11 min

5 6 7 8



Remarque : Les valeurs montrées ne sont que des exemples. Vous devez utiliser les valeurs prescrites par votre médecin.



Remarque : Si votre ordonnance concerne une thérapie selon le traitement, cet écran affichera des options différentes. Allez à la page 62 pour la DP fluctuante selon le traitement.

5 Choisissez les valeurs

Appuyez sur le bouton jaune pour choisir la valeur correspondante :

- **# pauses** — Nombre de pauses durant le traitement
- **# perfusions** — Nombre de perfusions durant le traitement
- **Volume de pause** — Volume de perfusion à chaque pause
- **Premier volume** — Quantité de la première perfusion
- **Volume tidal** — Quantité de perfusion à chaque échange
- **Durée contact** — Durée de contact péritonéal du dialysat
- **Durée perfusion** — Le temps disponible pour la perfusion
- **Durée drainage** — Le temps disponible pour le drainage après le contact



Remarque : Les boutons bleu clair ne peuvent être choisis. Votre appareil calcule les valeurs affichées par les boutons bleus en fonction des valeurs entrées aux boutons jaunes.

6 Entrez les valeurs

Quand vous appuyez sur un bouton jaune, il tourne à l'orange. Utilisez les touches **fléchées Haut/Bas** (▼/▲) pour choisir la valeur prescrite.

Recommencez pour entrer toutes les valeurs prescrites.

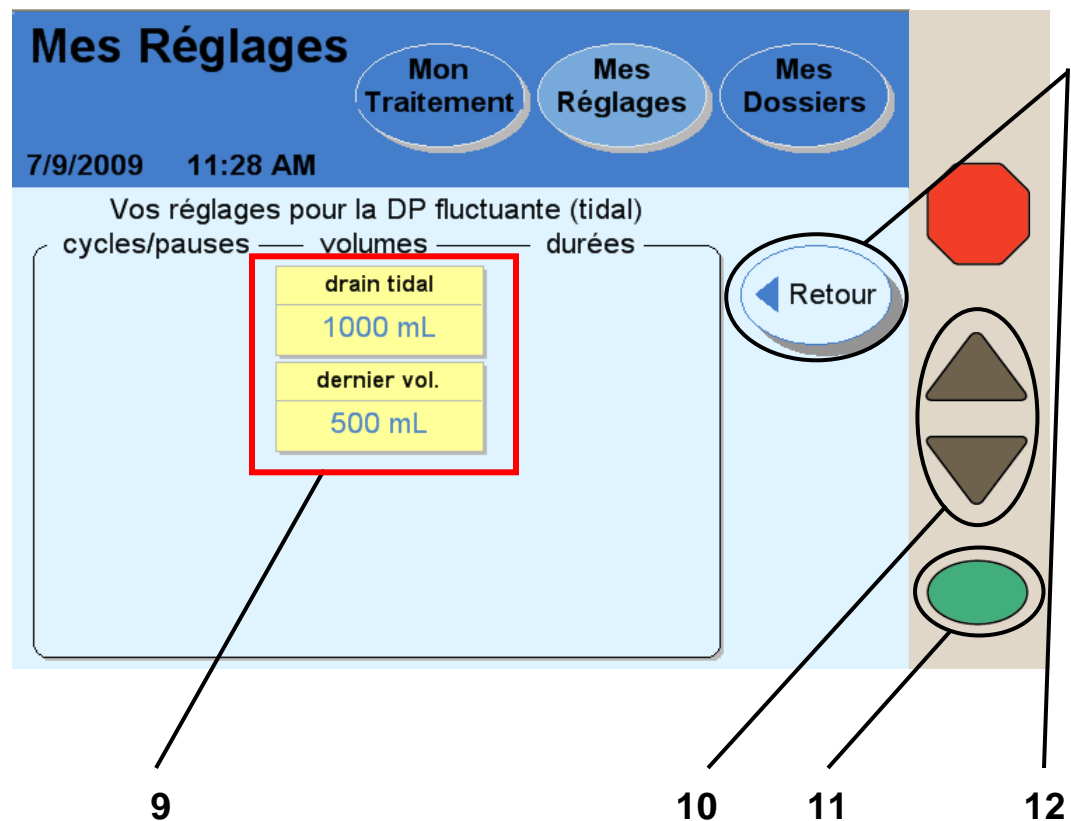
7 Appuyez sur **OK**

Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer et enregistrer les réglages.

8 Appuyez sur **Suivant**

Appuyez sur le bouton **Suivant** pour passer à l'écran suivant.

Réglages DP fluctuante (tidal) selon le cycle (suite)



Remarque : Les valeurs montrées ne sont que des exemples.
Vous devez utiliser les valeurs prescrites par votre médecin.

9 Choisissez les valeurs

Appuyez sur le bouton jaune pour choisir la valeur correspondante :

- **Drain tidal** — Quantité à drainer à chaque échange
- **Dernier volume** — Quantité de la dernière perfusion



Avertissement : Le volume de drainage TIDAL doit comprendre le volume de perfusion TIDAL plus l'UF attendue du contact TIDAL pour empêcher une situation de surcharge. Une surcharge de liquide peut causer des lésions graves, voire mortelles.



Remarque : Les boutons bleu clair ne peuvent être choisis. Votre appareil calcule les valeurs affichées par les boutons bleus en fonction des valeurs entrées aux boutons jaunes.

Remarque : Si l'option « dernier sac » était réglée sur OUI, le bouton **dernier volume** affichera en fait le volume du dernier sac. Pour régler l'option de dernier sac, allez à « Onglet Options », page 80.

10 Entrez les valeurs

Quand vous appuyez sur un bouton jaune, il tourne à l'orange. Utilisez les touches **fléchées Haut/Bas** (▼/▲) pour choisir la valeur prescrite.

Recommencez pour entrer toutes les valeurs prescrites.

11 Appuyez sur **OK**

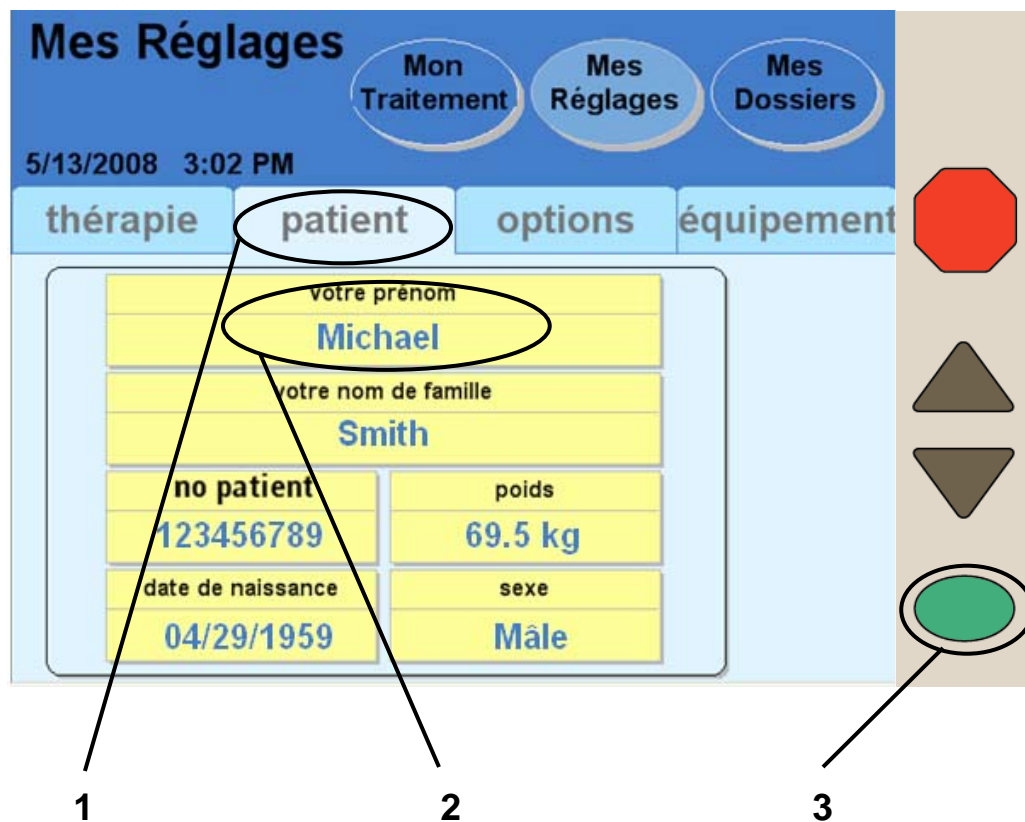
Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer les réglages et les enregistrer.

12 Appuyez sur **Retour**

Appuyez sur le bouton **Retour** pour revenir à l'écran précédent, puis appuyez à nouveau sur le bouton **Retour** pour retourner à l'écran principal « Mes Réglages ».

Allez à la page 70 pour entrer vos réglages personnels à l'« Onglet Patient ».

Onglet Patient



Remarque : Les valeurs montrées ne sont que des exemples. Vous devez utiliser les valeurs prescrites par votre médecin.

1 Appuyez sur **patient**

Appuyez sur **patient** pour passer à l'écran « Mes Réglages/votre prénom ».

2 Appuyez sur **votre prénom**

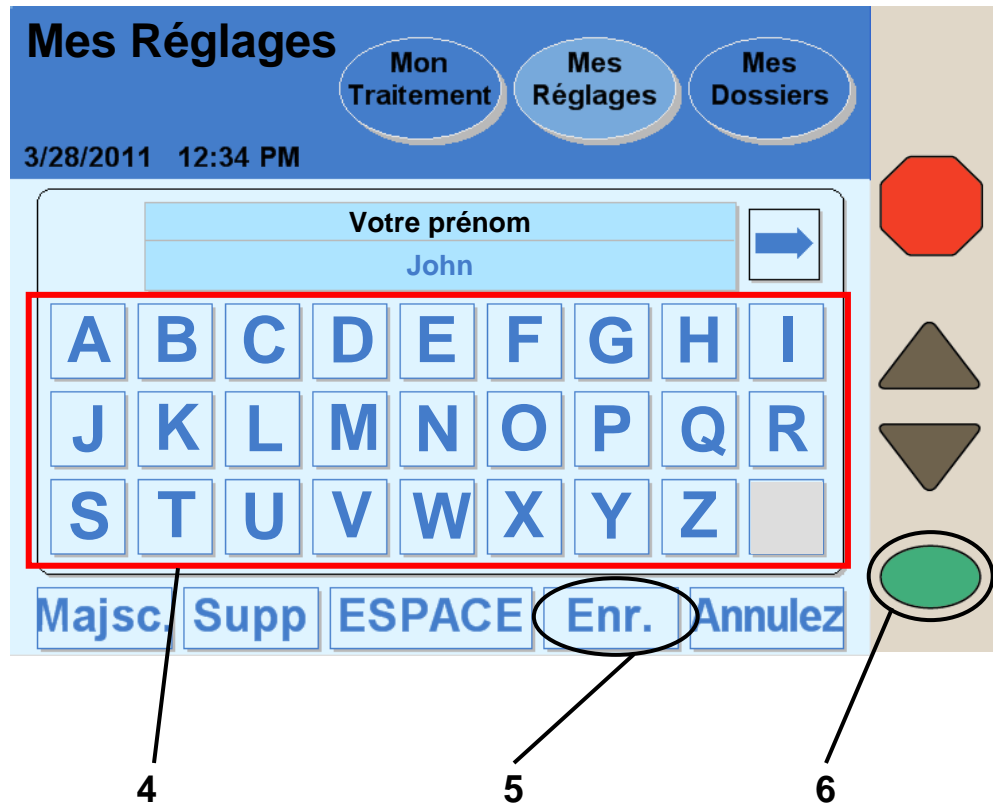
3 Appuyez sur **OK**

Appuyez sur **votre prénom**, puis sur la touche **OK** pour entrer votre prénom. Vous passez automatiquement au clavier tactile.



Remarque : L'entrée de vos renseignements personnels n'est nécessaire que la première fois que vous mettez en marche votre appareil. Vos renseignements personnels seront mémorisés pour les traitements ultérieurs.

Entrée du prénom



4 Entrez votre prénom

Utilisez le clavier affiché à l'écran pour entrer votre prénom en touchant chaque lettre qui le compose. Le prénom s'affiche à mesure dans la boîte « votre prénom ».



Remarque : Supprimez le prénom par défaut de la boîte avant d'entrer votre prénom. Pour effacer une lettre, appuyez sur le bouton **Supp.** Pour passer des majuscules aux minuscules et vice-versa, appuyez sur le bouton **Majsc.** Pour sortir de cet écran sans changement, appuyez sur le bouton **Annulez**, puis sur la touche **OK**.

Remarque : Pour entrer un chiffre ou un symbole, appuyez sur le bouton ⇨ à droite de la boîte, au dessus du clavier. Pour revenir aux lettres, appuyez sur le bouton ⇩ qui apparaît à gauche de la boîte, au dessus du bloc numérique.

5 Appuyez sur **Enr.**

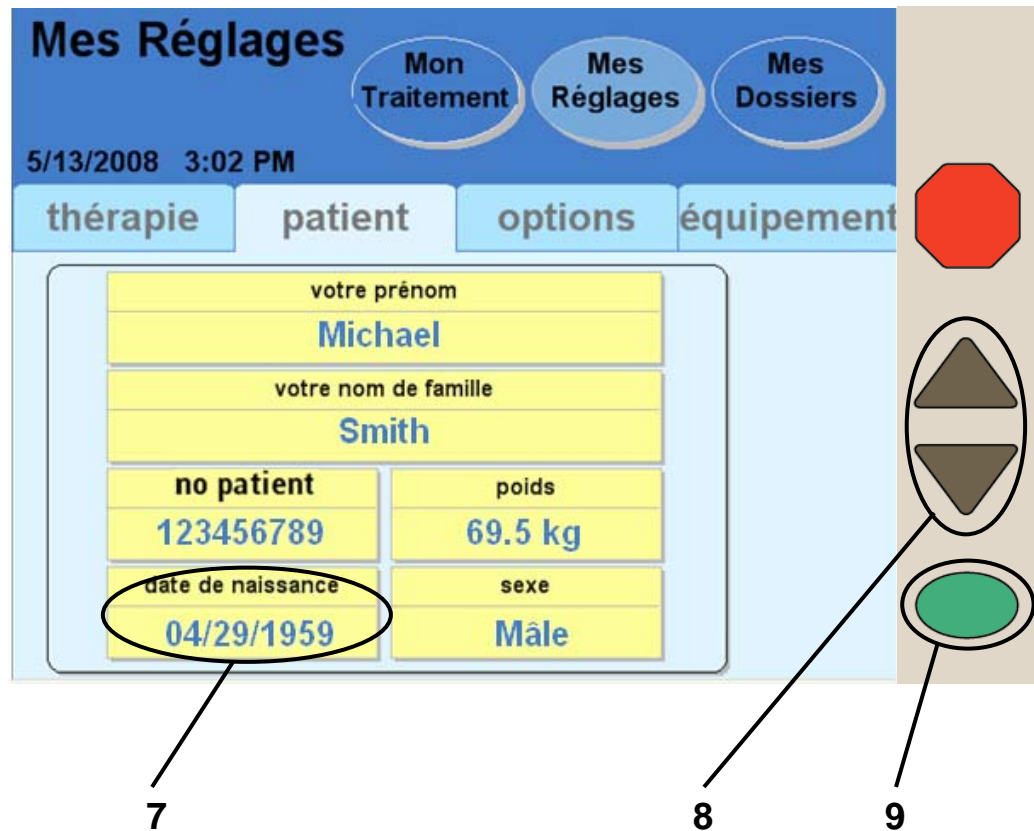
Une fois que vous avez entré votre prénom, Appuyez sur le bouton d'enregistrement **Enr.**

6 Appuyez sur **OK**

Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer les réglages et les enregistrer. Vous retournez à l'onglet « Patient » à l'écran « Mes Réglages ».

En vous basant sur l'exemple précédent, appuyez sur les boutons **votre nom de famille** et **votre n° patient** à l'écran « Onglet Patient ». Votre numéro de patient vous est affecté par le personnel de soins et est indiqué dans la fiche « Mes Paramètres de traitement », page 6.

Entrée de la date de naissance



Remarque : Les valeurs montrées ne sont que des exemples. Vous devez utiliser les valeurs prescrites par votre médecin.

7 Appuyez sur **date de naissance**

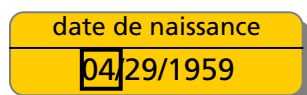
Appuyez sur le bouton **date de naissance** pour entrer votre date de naissance. Le bouton tourne à l'orange et le premier groupe de chiffres est activé.




Remarque : Dépendant du format de date adopté, il se peut qu'il faille entrer le jour avant le mois. Le bouton de réglage format de date se trouve à la section « Onglet Équipement », page 82.

8 Entrez votre date de naissance


Utilisez les touches fléchées **Haut/Bas** (▼/▲) pour changer les deux premiers chiffres du mois de la date de naissance. Par exemple :



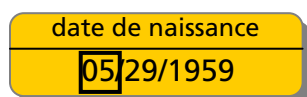
Utilisez les touches fléchées pour le réglage



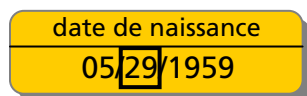Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer l'entrée et passez au groupe de chiffres suivant de la date de naissance.



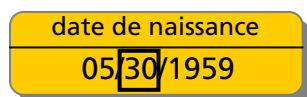
Utilisez les touches fléchées pour le réglage



Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer l'entrée et, de la même manière, passez à au réglage de l'année.

9 Appuyez sur **OK**

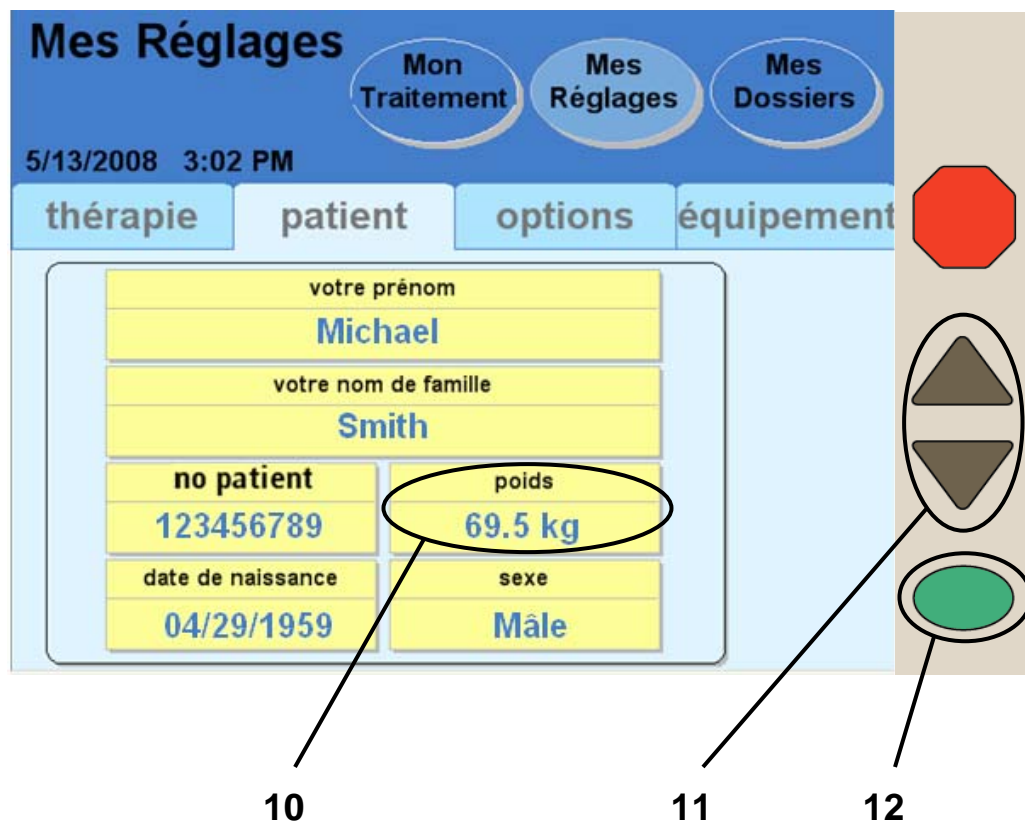Après avoir entré l'année de naissance, appuyez sur la touche **OK** pour confirmer votre date de naissance et l'enregistrer. Passez à la page suivante pour entrer votre poids.



Remarque : Les valeurs montrées ne sont que des exemples. Vous devez utiliser les valeurs prescrites par votre médecin.

10 Appuyez sur **poids**

Appuyez sur le bouton **poids** pour entrer votre poids sec, tel que prescrit par votre médecin.



Remarque : Le poids entré doit être votre poids sec estimatif ou le poids cible prescrit par votre médecin. Allez à « Mes Paramètres de traitement », page 2. Si vous n'entrez pas les paramètres de traitement qui vous sont prescrits, vous risquez des complications qui pourraient être graves.

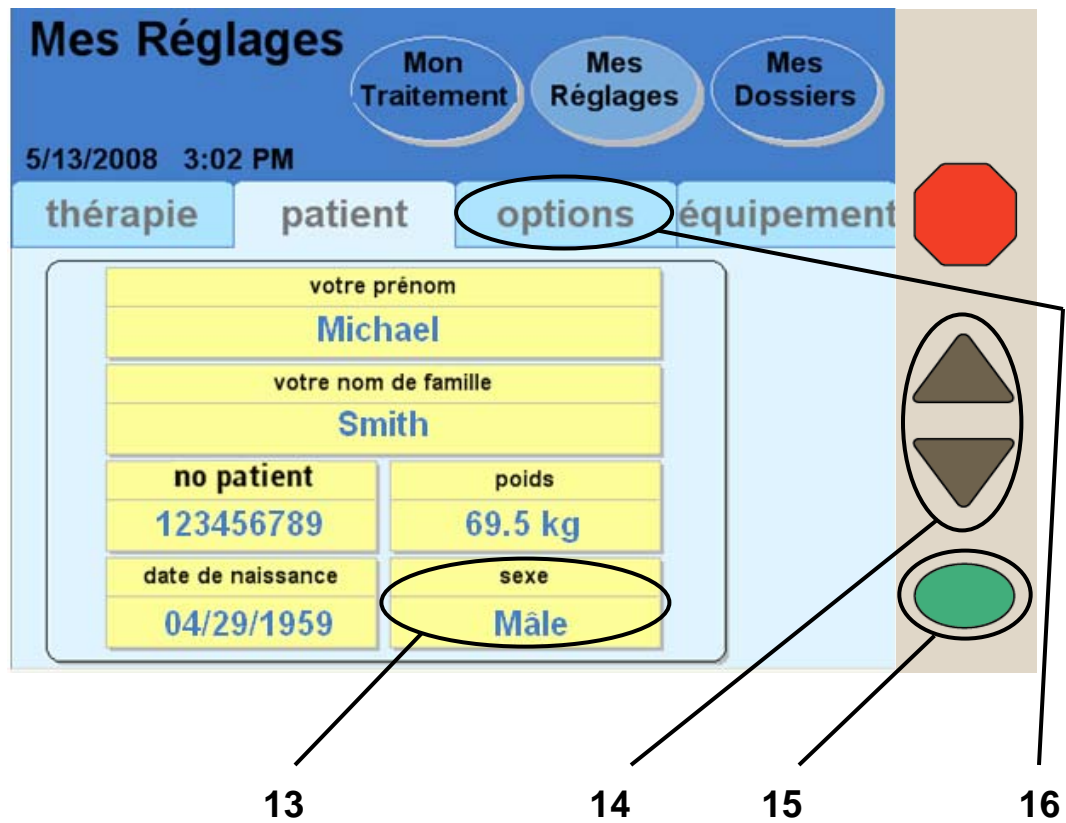
Remarque : Vous pouvez entrer votre poids en livres (lb) ou en kilogrammes (kg). Allez à « Onglet Options », page 80.

11 Entrez votre poids

Utilisez les touches **fléchées Haut/Bas** (▼/▲) pour entrer votre poids.

12 Appuyez sur **OK**

Après avoir entré votre poids, appuyez sur la touche **OK** pour confirmer l'entrée et l'enregistrer. Passez à la page suivante pour entrer votre sexe.



Remarque : Les valeurs montrées ne sont que des exemples.
Vous devez utiliser les valeurs prescrites par votre médecin.

13 Appuyez sur **sexe**

Appuyez sur le bouton **sexe** pour entrer votre sexe.

14 Entrez votre sexe

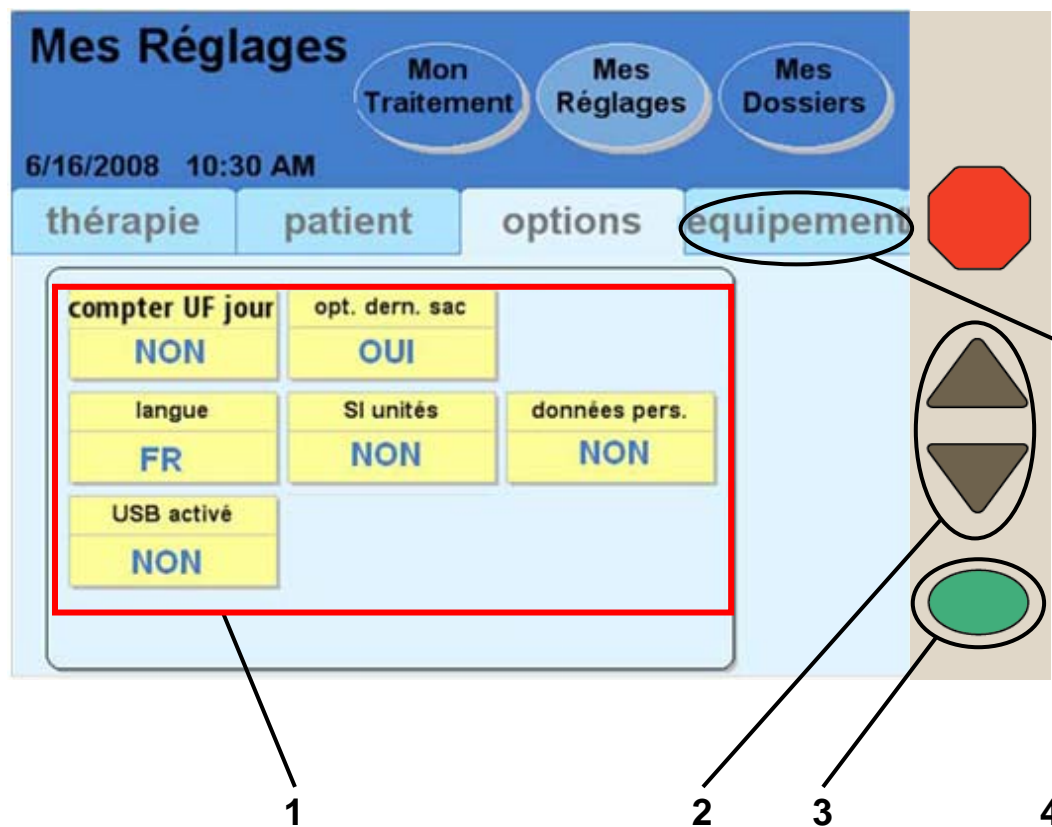
Utilisez les touches **fléchées Haut/Bas (▼/▲)** pour passer de « Masculin » (Mâle) à « Féminin » (Femelle) et vice-versa.

15 Appuyez sur **OK**

Après avoir entré votre sexe, appuyez sur la touche **OK** pour confirmer l'entrée et l'enregistrer.

16 Appuyez sur **options**

Appuyez sur le bouton **options** pour passer à l'onglet « Options ».



Remarque : Les valeurs montrées ne sont que des exemples. Vous devez utiliser les valeurs prescrites par votre médecin.

1 Choisissez les valeurs

Appuyez sur le bouton jaune pour y entrer la valeur correspondante :

- **Compter UF jour** — Inclure ou non Drain 0 dans l'ultrafiltration totale durant la journée. Le volume UF total est donc plus important. La valeur par défaut est NON.
- **Langue** — Français, Anglais ou Espagnol.
- **Option Dernier sac** — Si cette option est choisie, le cycleur utilise uniquement le dernier sac (tubulure à pince verte) pour votre dernière perfusion péritonéale.
- **Unités SI** — Si le réglage est NON, votre poids est exprimé en lb et votre glycémie, en mg/dL. Si le réglage est OUI, votre poids est exprimé en kg et votre glycémie, en mmol/dL.
- **Données personnelles** — Si l'option est réglée sur OUI (recommandé), le cycleur demande l'entrée de données de santé à jour après la fin de chaque traitement.
- **USB activé** — Indique s'il faut utiliser IQdrive pour transférer et enregistrer les réglages et les données de traitement.

2 Entrez les valeurs

Quand vous appuyez sur un bouton jaune, il tourne à l'orange. Utilisez les touches **fléchées Haut/Bas** (▼/▲) pour entrer la valeur voulue. Recommencez pour toutes les valeurs prescrites.

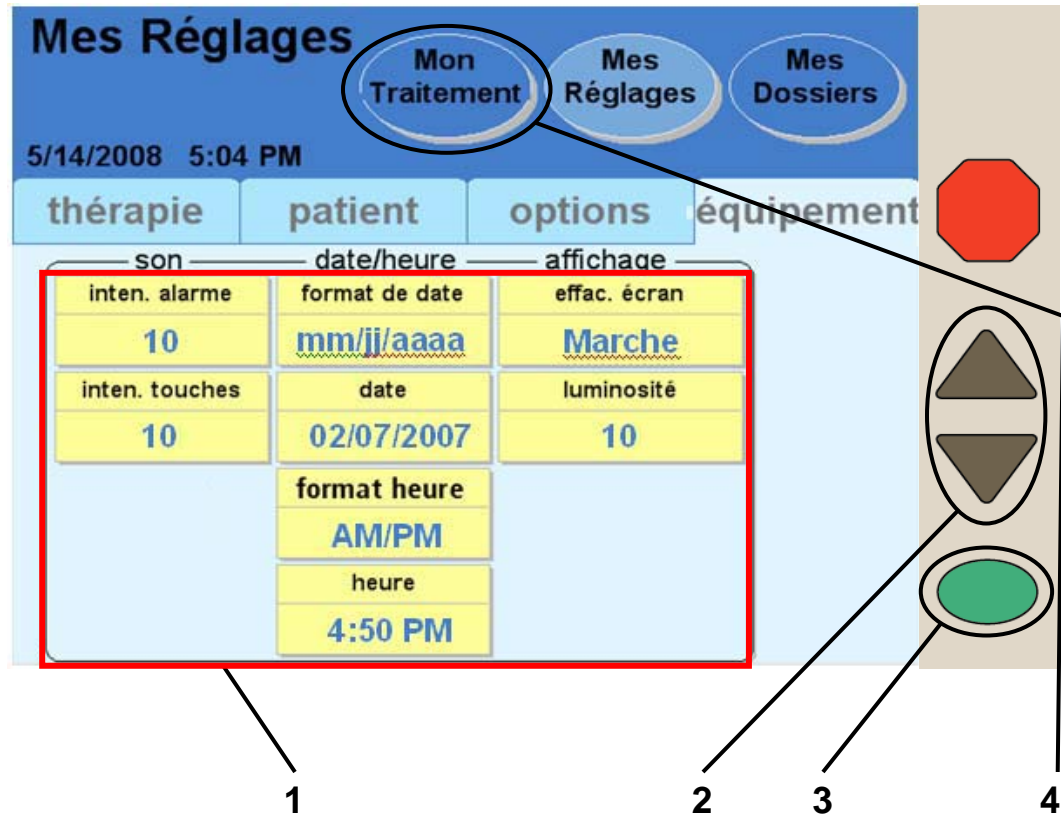
3 Appuyez sur

Appuyez sur **OK** pour confirmer les réglages et les enregistrer.

4 Appuyez sur

Appuyez sur le bouton **équipement** pour aller à l'« Onglet Équipement ».

Onglet Équipement



1 Choisissez les valeurs

Appuyez sur le bouton jaune pour entrer la valeur correspondante :

- **Intensité alarme** — Intensité de l'alarme sonore (1 = basse, 20 = haute)
- **Intensité touches** — Intensité du son quand vous appuyez sur la touche (0 = aucune, 20 = haute)
- **Format de date** — Vous permet de placer le jour avant le mois ou après
- **Date** — Réglage de la date du jour (allez à la page 75 pour un exemple)
- **Format heure** — Vous permet de choisir entre le format 12 heures (AM/PM) et le format 24 heures
- **Heure** — Réglage de l'heure
- **Effac. écran** — Si l'option est réglée sur OUI (ou Marche), l'écran tactile s'éteint après 10 minutes d'inactivité. Si l'option est réglée sur NON (ou Arrêt), l'écran reste constamment allumé.
- **Luminosité** — Degré de luminosité de l'écran (1 = sombre, 10 = brillant)

2 Entrez les valeurs

Quand vous appuyez sur un bouton jaune, il tourne à l'orange. Utilisez les touches **fléchées Haut/Bas** (▼/▲) pour entrer la valeur voulue. Recommencez pour toutes les valeurs prescrites.

3 Appuyez sur **OK**

Appuyez sur **OK** pour confirmer les réglages et les enregistrer.

4 Appuyez sur **Mon Traitement**

À ce point, vous devriez avoir entré toute votre prescription. Quand vous êtes prêt à commencer le traitement, appuyez sur le bouton écran **Mon Traitement**.



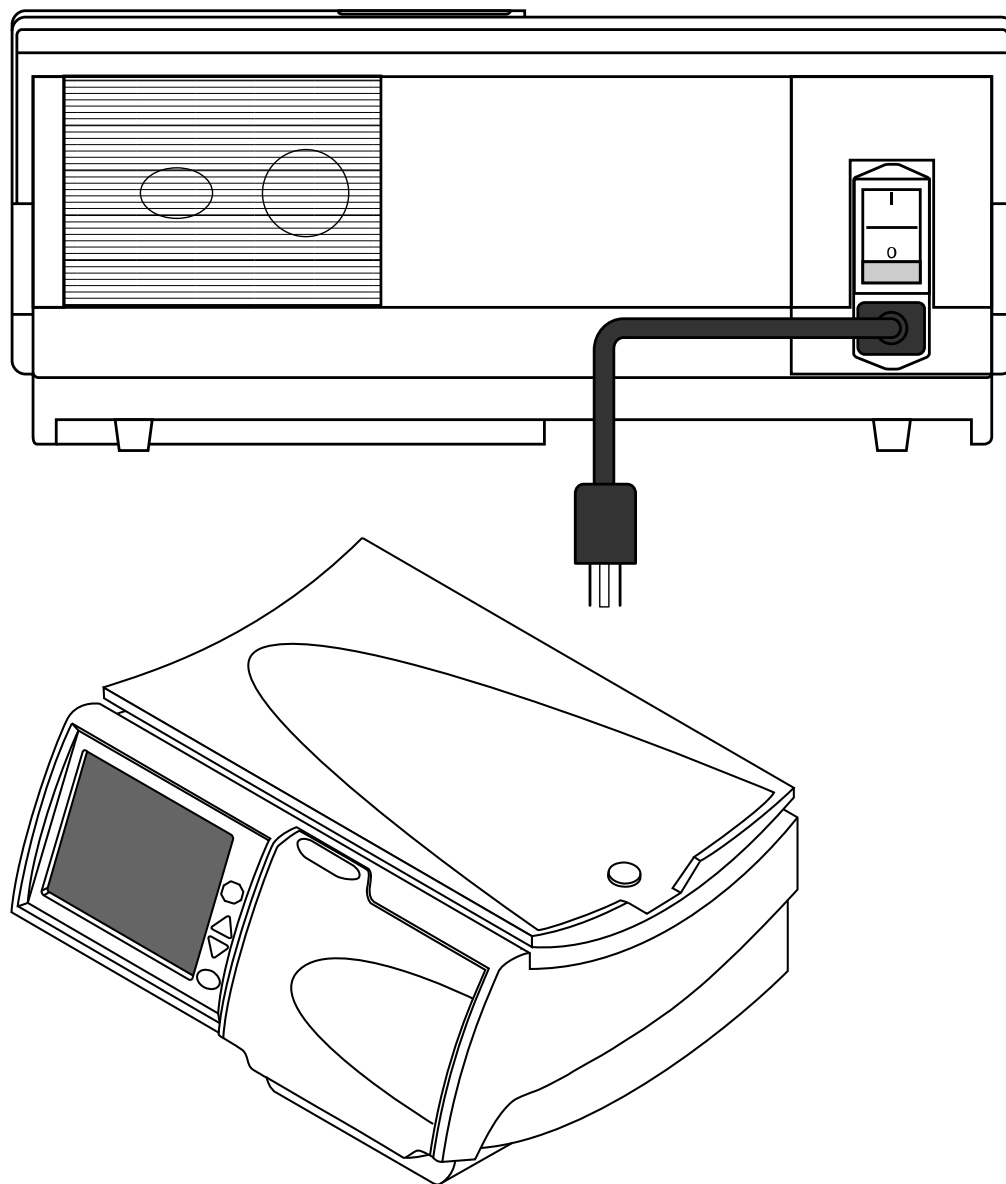
Avertissement : Ne commencez pas le traitement si les réglages sont incorrects. Des réglages de traitement inexacts peuvent causer des complications graves.

Si vous n'êtes pas prêt à commencer le traitement, vous pouvez rester sur cet écran. L'écran s'éteindra après dix minutes si l'option effac. écran est réglée sur OUI. Appuyez sur un point quelconque de l'écran pour le rallumer.

Page laissée intentionnellement vide

Mon Traitement

Vérifications avant le traitement




Préparation

Avant de commencer votre traitements, vérifiez les aspects suivants de votre cycleur :

- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est branché dans une prise électrique à trois broches avec mise à la masse et que le commutateur d'alimentation, à l'arrière de l'appareil, est la position de **marche** (|).

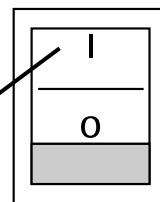POWER



- Vérifiez le plateau réchaud pour vous assurer que rien ne fait obstacle et qu'il ne touche pas le haut du boîtier du cycleur (comme cela est décrit à la page 41).
- Vérifiez que l'appareil a été nettoyé récemment et qu'il est prêt pour commencer un traitement (allez à la page 202 pour plus de renseignements).



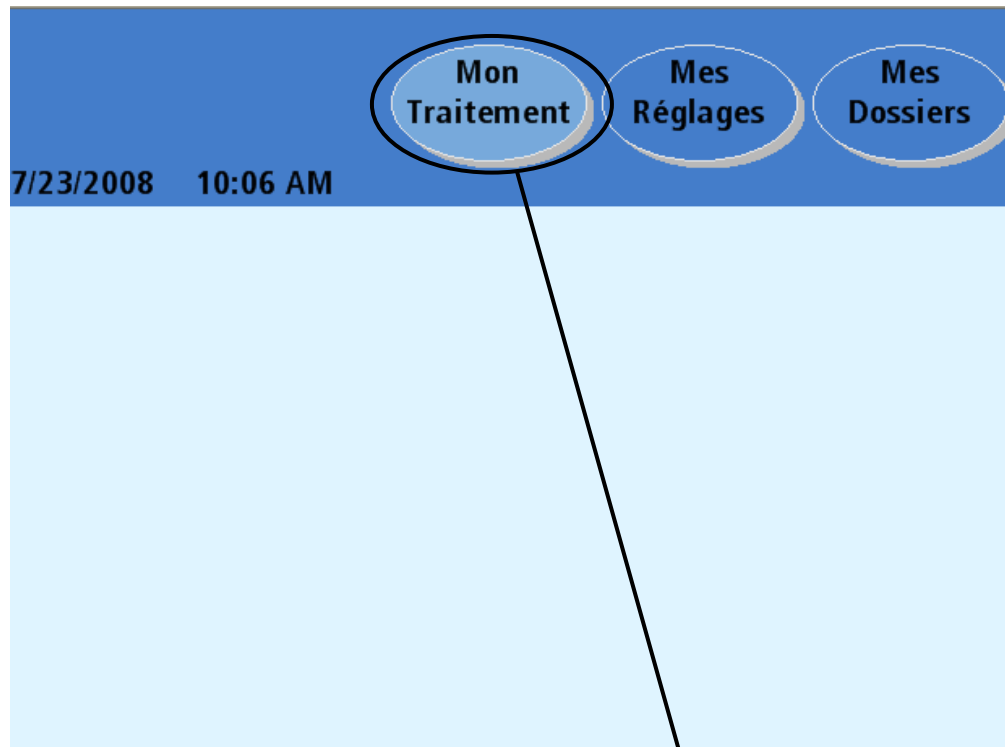
Avertissement : Si certaines des conditions ci-dessus ne sont pas remplies, procédez aux corrections nécessaires avant de continuer la préparation de l'appareil, sinon, il pourrait en résulter des complications graves.



Remarque : Si vous utilisez une unité IQdrive, assurez-vous qu'elle est correctement insérée dans le port USB, à l'arrière de l'appareil (allez à la page 162).

Remarque : Le cycleur Liberty exécute automatiquement un autotest au démarrage et vous avertit en cas de problème. Aucun test manuel n'est requis après l'installation.

Début de votre traitement



1

1 Appuyez sur **Mon Traitement**

Vous pouvez atteindre les écrans « Mon Traitement » à partir de tous les autres écrans. Appuyez sur le bouton écran **Mon Traitement** pour commencer les étapes de l'installation du traitement.

Si votre cycleur est en marche et l'écran éteint, appuyez sur n'importe point de l'écran tactile pour le rallumer.



Avertissement : Ne commencez pas le traitement tant que toutes les valeurs prescrites n'ont pas été entrées.

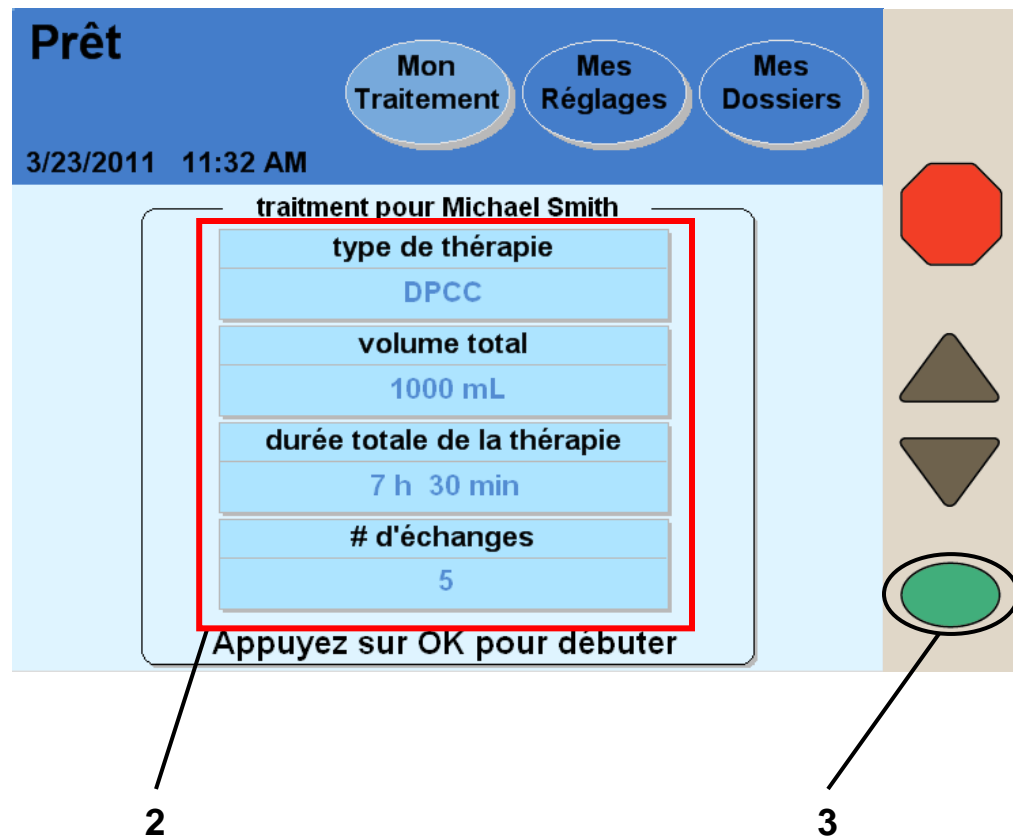
Avertissement : Vérifiez le bon fonctionnement de l'appareil avant de commencer le traitement.



Remarque : Le présent document n'est qu'un guide descriptif des écrans du cycleur Liberty. Suivez l'ordre exact des écrans de votre appareil et utilisez les illustrations comme références seulement.

Remarque : Si les réglages de thérapie de l'unité IQdrive ont changé depuis le dernier traitement, vous devez les vérifier avant de reprendre le traitement. Allez à «Utilisation de l'unité IQdrive », page 162. N'enlevez pas l'unité IQdrive durant le traitement.

Début de votre traitement (suite)



Remarque : Les valeurs montrées ne sont que des exemples. Vous devez utiliser les valeurs prescrites par votre médecin.

2 Vérifiez les valeurs du traitement

Les paramètres de traitement affichés ici doivent correspondre à ceux de votre prescription (page 2). S'il vous reste à entrer les valeurs correctes, allez à la page 46.

3 Appuyez sur **OK**

Si toutes les valeurs du traitement sont affichées correctement, appuyez sur la touche **OK** pour continuer. Il faudra au cycleur un moment pour intégrer les valeurs et passer à l'écran suivant.



Avertissement : Votre médecin doit vous prescrire le traitement au complet. L'utilisation de valeurs incorrectes peut se traduire par des complications graves. N'utilisez pas les valeurs données en exemple dans les illustrations des écrans de l'appareil.


Préparation

Installation

Mon Traitement Mes Réglages Mes Dossiers

7/23/2008 10:06 AM

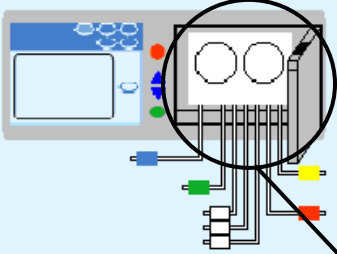
étape 1



Regroupez fournitures
portez un masque
et vous lavez les mains

Insérez
la cassette

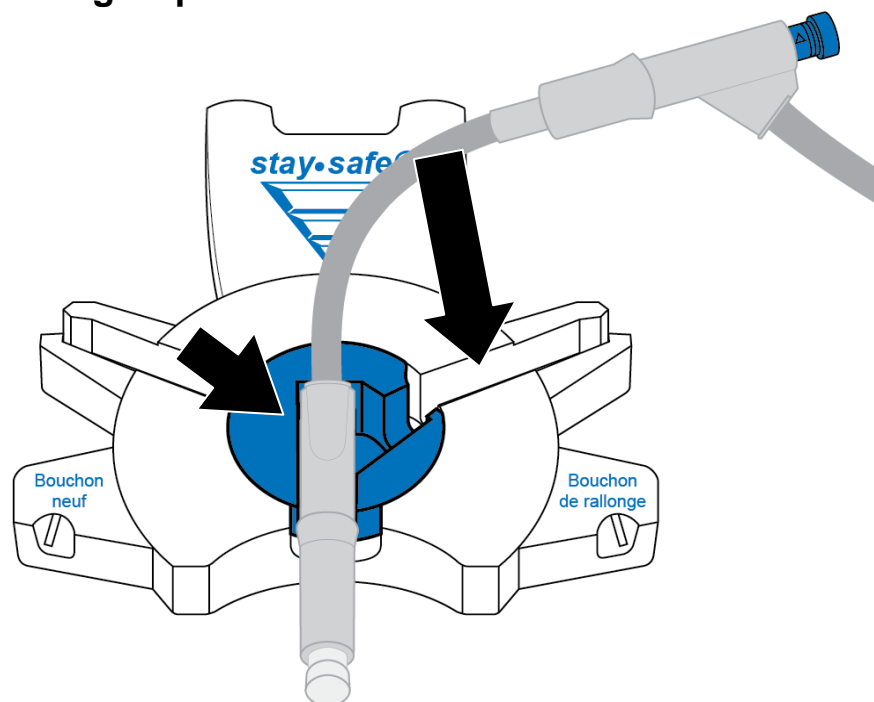4 Regroupez les fournitures 5



4 Regroupez les fournitures, portez un masque et lavez-vous les mains

Vous devez vous préparer avant de commencer le traitement :

- **Fournitures** — Fournitures typiques :
 - ✓ Sacs de solution
 - ✓ Casette et rallonge
 - ✓ Bouchons *stay•safe*
 - ✓ Tubulure ou sacs de drainage
 - ✓ Désinfectant pour les mains
- **Masque** — Mettez votre masque, tout le monde dans la salle doit aussi en porter un
- **Lavez-vous les mains** — Lavez-vous les mains selon les instructions du personnel de soins



Avertissement : Vous devez employer la technique aseptique prescrite par votre infirmière de dialyse pour prévenir l'infection.

5 Insérez la cassette



Avertissement : Assurez-vous que le module de pompe est propre et dégagé avant d'insérer la cassette. Tenez vos doigts à distance des pièces mobiles.

Avertissement : À chaque traitement, vous devez utiliser une cassette et une tubulure de drainage neuves stériles. Assurez-vous que la cassette et les tubulures ne sont ni pliées ni endommagées. Une tubulure ou une cassette endommagée peut favoriser une fuite, une contamination et une infection.



Mise en garde : La cassette est sous pression. Attendez, avant d'ouvrir la porte de la cassette, que l'appareil vous en donne l'instruction. N'appuyez pas sur le capteur de porte quand vous chargez la cassette; allez à la page 32.

Pour insérer la cassette :

- Appuyez fermement sur le verrou de porte de cassette afin de l'ouvrir.
- Tenez la cassette avec les dômes en plastiques vers l'extérieur. Insérez la cassette contre les tiges guides à la partie supérieure du module pompe. Ensuite, bloquez la cassette en place en utilisant le blocage au bas du module pompe. Allez à « Le module de pompe » page 32, pour une illustration de la plaque pompe. Les tubulures doivent pendre à l'avant et ne présenter ni pincement ni pliure.
- Fermez la porte sur la cassette, en écoutant attentivement le déclic qui indique le verrouillage. Le cycleur met la porte de cassette sous pression, puis affiche l'écran de réglage suivant.

Ensuite, insérez le connecteur *stay•safe* dans le support d'organisateur *stay•safe*, sous le panneau de commande. Insérez la tubulure dans le conduit de tubulure du côté droit.

Branchement des tubulures de solution

Installation



Mon
Traitement

Mes
Réglages

Mes
Dossiers

7/23/2008 10:12 AM

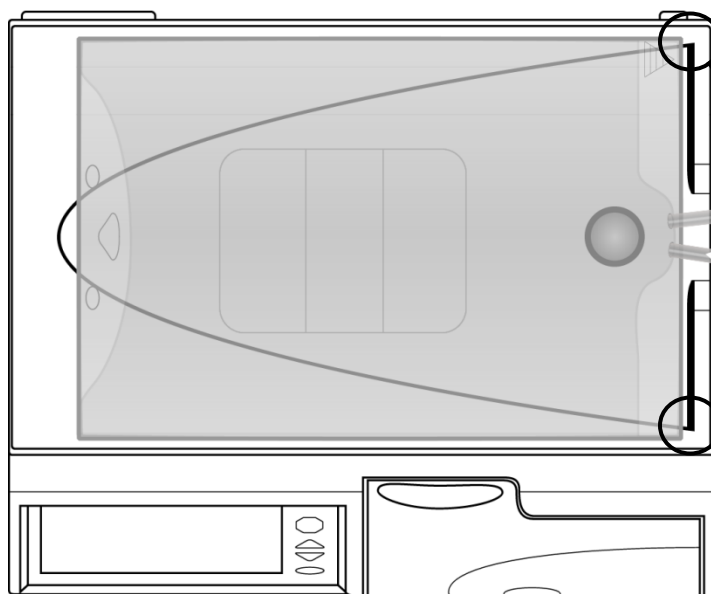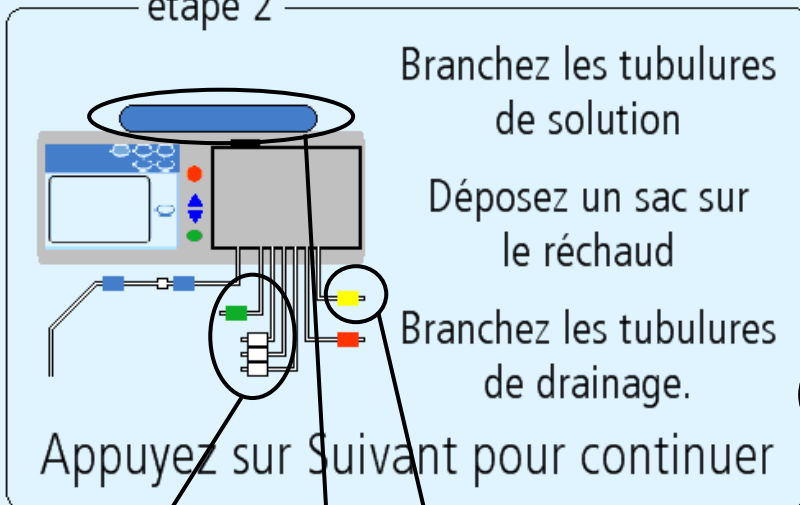étape 2



Placement du sac sur le réchaud

Alignez le sac de solution avec les coins. Ne laissez pas le sac dépasser du bord

6 Branchez les tubulures de solution

Disposez les sacs de solution sur une surface plane, les ports de connexion vers vous. Branchez les tubulures à pince blanche aux sacs. Branchez la tubulure à pince verte au dernier sac du traitement, s'il est prescrit.



Mise en garde : Si vous utilisez le chariot Liberty, veillez à l'équilibrer correctement en suspendant les sacs de solution des deux côtés. Une mauvaise répartition des sacs peut faire basculer le chariot et endommager l'appareil.

7 Déposez un sac sur le réchaud

Déposez un sac de 2000 mL au moins sur le réchaud. Branchez-le à la tubulure à pince rouge du réchaud.



Avertissement : Vous devez brancher les sacs de solution correctement, de la manière prescrite.

Avertissement : N'utilisez pas de source de chaleur extérieure non autorisée par Fresenius Medical Care pour réchauffer les sacs de solution. Contactez le personnel de soins pour plus de renseignements.

Avertissement : Assurez-vous qu'aucune des tubulures de solution n'est pliée.

Avertissement : Le sac du réchaud ne doit pas dépasser du plateau réchaud et toucher le boîtier.



Remarque : Le volume du sac sur le réchaud doit être au moins égal à celui de la première perfusion plus 1000 mL.

8 Branchez la tubulure de drainage

Branchez la tubulure à pince jaune de la cassette à une tubulure de drainage ou à un ensemble de sacs de drainage. Ne fermez pas la pince jaune.



Remarque : Si vous branchez directement à une tubulure de drainage, au lieu d'un ensemble de sac de drainage, laissez un espace libre à l'extrémité de la tubulure de drainage pour assurer un bon drainage. Elle ne doit pas plonger dans l'eau d'une baignoire ou d'une cuvette de toilettes.

9 Appuyez sur **Suivant**

Toutes les tubulures prescrites devraient maintenant être branchées. Appuyez sur le bouton **Suivant** pour continuer. Le cycleur pèse le sac du réchaud.



Avertissement : N'appuyez pas sur le sac durant la pesée.

Brisez les cônes et clampez les tubulures non utilisées

Installation

Mon Traitement Mes Réglages Mes Dossiers

7/25/2008 9:31 AM

étape 3

Brisez cônes
et clampez tubulures
non utilisées.

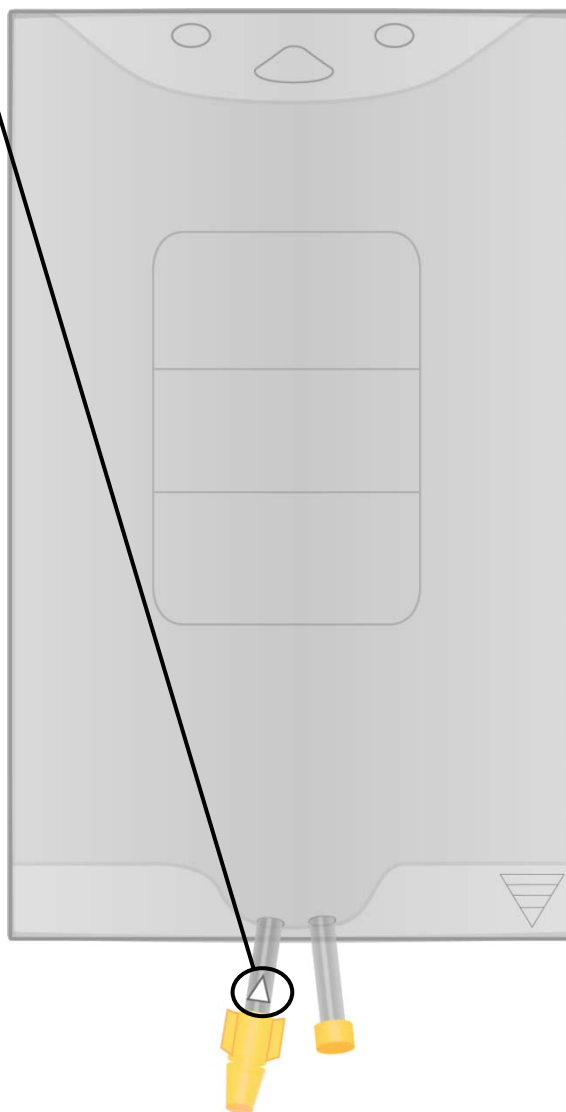
Appuyez sur Suivant pour continuer

Suivant

10 Brisez les cônes 11 12

10 Brisez les cônes

Brisez les cônes obturant les tubes de sortie des sacs en pliant les tubes dans un sens, puis dans l'autre. Veillez à ce que les cônes soient complètement brisés. Une fois les cônes brisés, repoussez-les dans le sac de solution, si possible. Vous pouvez voir les cônes transparents remonter à la surface du liquide. Ce n'est pas un problème, car les cônes ne peuvent pas s'engager dans les tubulures et pénétrer dans votre corps



11 Clampez les tubulures non utilisées

Clampez toutes les tubulures qui ne sont pas reliées à un sac.

12 Appuyez sur **Suivant**

Appuyez sur le bouton Suivant pour continuer. Votre cycleur détermine alors quelles sont les tubulures connectées.

Vérification des sacs

Installation

7/25/2008 3:40 PM

Mon Traitement Mes Réglages Mes Dossiers

étape 4

Vérifiez les connexions des sacs. Appuyez sur Retour pour répéter le test de détection du sac.

Dernier sac	Sac 3	Sac 2	Sac 1	Sac sur réchaud
-------------	-------	-------	-------	-----------------

Appuyez sur Suivant pour continuer

Retour

Suivant

13

14

13 Vérifiez les connexions des sacs

Durant le test de détection des sacs, l'appareil détecte automatiquement quelles sont les tubulures connectées à des sacs de solution. Après le test, votre cycleur vous montre quelles sont les tubulures connectées et celles qui ne le sont pas.



**Tubulure
non connectée**



**Tubulure
connectée**

Assurez-vous que votre cycleur a détecté correctement les connexions avec les sacs. Si le test donne un résultat erroné, examinez les connexions et les pinces et appuyez sur le bouton **Retour** pour refaire le test.



Remarque : À ce point, tous les sacs de solution doivent être connectés. Après la vérification des connexions avec les sacs, vous ne pourrez connecter aucun autre sac pour votre traitement.

14 Appuyez sur **Suivant**

Lorsque toutes les connexions avec les sacs ont été détectées correctement, appuyez sur le bouton **Suivant**. L'appareil commence à irriguer les tubulures.

Irrigation des tubulures

Irrigation

3/28/2011 1:59 PM

Mon
Traitement


Mes
Réglages

Mes
Dossiers

Temps restant
1 min 30 s

Temps fixé
2 min 0 s

Veillez patienter



Irrigation des tubulures de l'appareil

L'appareil commence à rincer les tubulures. Une minuterie à l'écran indique le temps d'irrigation restant.

L'appareil passe à l'écran suivant quand l'irrigation est terminée.



Remarque : Pour arrêter l'irrigation, appuyez sur la touche **STOP**. La pompe s'arrête et l'écran « Irrigation arrêtée » est affiché. L'irrigation reprend quand vous appuyez sur la touche **OK**.


Amorçage

Amorçage

7/25/2008 4:17 PM

Mon Traitement Mes Réglages Mes Dossiers

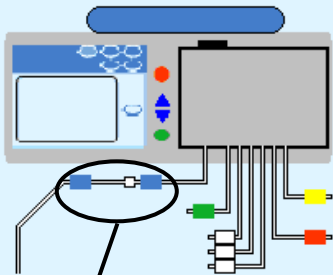étape 5



Assurez-vous que la pince bleue est ouverte

Appuyez sur Suivant pour continuer

Suivant ▶

15

16

Detailed description: This is a software interface for a medical device. The top bar is blue and contains the title 'Amorçage' and the date/time '7/25/2008 4:17 PM'. To the right are three buttons: 'Mon Traitement', 'Mes Réglages', and 'Mes Dossiers'. The main content area is light blue and shows 'étape 5' of a setup process. It features a diagram of the device with a blue clip on a cable highlighted by a callout circle labeled '15'. Text instructions state 'Assurez-vous que la pince bleue est ouverte' and 'Appuyez sur Suivant pour continuer'. A 'Suivant' button with a right-pointing arrow is highlighted by a callout circle labeled '16'.

15 Assurez-vous que la pince bleue de la tubulure du patient est ouverte

Assurez-vous que la pince bleue de la tubulure du patient est ouverte pour préparer la tubulure à l'amorçage.

16 Appuyez sur **Suivant**

Appuyez sur le bouton **Suivant** pour commencer l'amorçage.



Remarque : Durant la phase d'amorçage, la tubulure du patient à pince bleue doit être plus basse que le sac du réchaud.

Exécution de l'amorçage

Amorçage


4/2/2008 5:44 PM

Mon Traitement Mes Réglages Mes Dossiers

Temps restant
0 min 15 s

Temps fixé
2 min 0 s

Veillez patienter

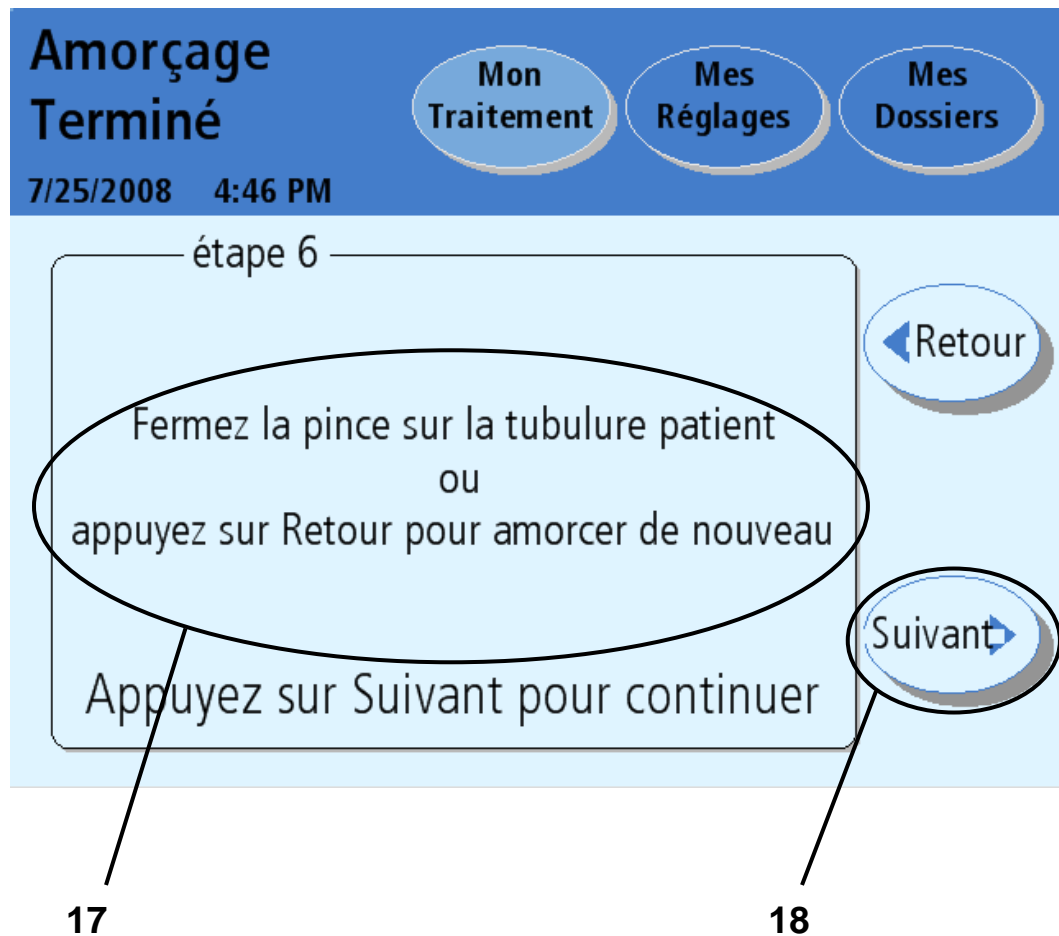


Amorçage des tubulures

L'appareil procède maintenant à l'amorçage des tubulures.
Une minuterie à l'écran indique le temps d'amorçage restant.

L'appareil passe à l'écran suivant quand l'amorçage est terminé.

Amorçage terminé



17 Pincez la tubulure du patient ou appuyez sur Retour pour réamorcer

Si vous voyez de l'air à l'intérieur des tubulures et si vous avez besoin de les réamorcer, appuyez sur le bouton **Retour**.

L'appareil réamorcer les tubulures.



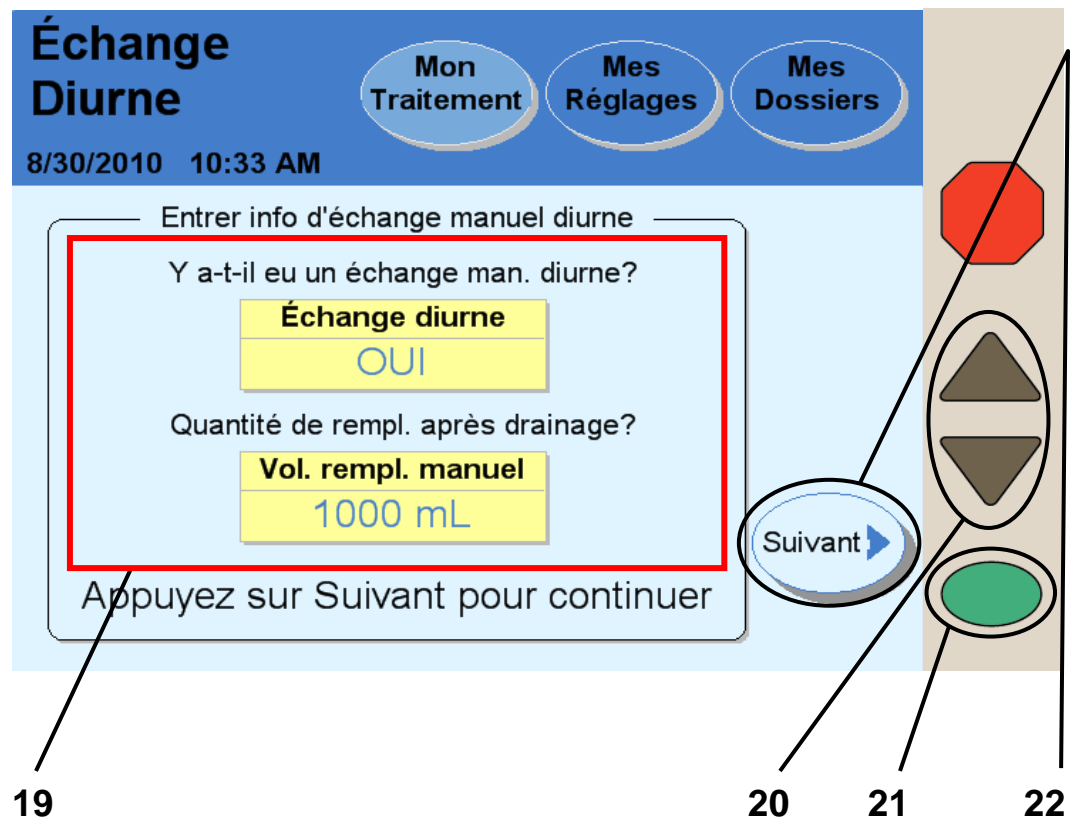
Remarque : Si vous utilisez un ensemble de tubulures P/N 050-87216 avec tubulure du patient de 20 pieds de long, vous devez appuyer une deuxième fois sur le bouton **Retour** pour vous assurer que la tubulure est complètement amorcée.

Lorsque les tubulures sont amorcées et ne contiennent pas d'air, fermez la pince bleue de la tubulure du patient.

18 Appuyez sur **Suivant**

Assurez-vous que la tubulure à pince bleue du patient est pincée, puis appuyez sur le bouton **Suivant** pour passer à l'écran suivant. Là, vous entrez le volume d'échange manuel diurne, le cas échéant. Un échange manuel consiste à connecter votre cathéter à un sac de solution et à procéder à une perfusion sans utiliser le cycleur Liberty.

Entrée d'un échange diurne



Remarque : Les valeurs montrées ne sont que des exemples. Vous devez utiliser les valeurs prescrites par votre médecin.

19 Choisissez les données d'échange manuel diurne

Si vous n'avez pas effectué de perfusion en échange manuel depuis le dernier arrêt du cycleur, vous pouvez laisser ce bouton sur NON. Passez à l'étape 22 ci-dessous.

Si vous avez effectué une perfusion en échange manuel depuis le dernier arrêt du cycleur, vous devez régler le bouton

Échange diurne sur OUI.



Avertissement : Vous devez indiquer si oui ou non vous avez effectué des échanges manuels depuis le dernier arrêt de votre cycleur. Si vous avez effectué un échange manuel, vous devez également entrer le volume de perfusion. Si vous ne programmez pas maintenant cette information dans votre cycleur Liberty, votre cycleur ignorera que vous avez une quantité supplémentaire de liquide dans l'abdomen. **NE** sautez PAS Drain 0. Votre cycleur Liberty passera à Perf 1 à la fin du drainage.

Pour régler le bouton **Échange diurne** sur OUI, appuyez sur le bouton, qui tourne à l'orange. Utilisez les touches **fléchées Haut/Bas** (▼/▲) pour le faire passer de NON à OUI.

Appuyez sur la touche **OK** pour enregistrer le changement.

20 Entrez le volume s'il y a eu un échange manuel

Après avoir réglé le bouton **Échange diurne** sur OUI, le bouton **Vol. remp. man.** passe de gris à jaune. Vous pouvez maintenant corriger le texte du bouton. Appuyez sur le bouton **Vol. remp. man.**, qui tourne à l'orange. Utilisez les touches **fléchées Haut/Bas** (▼/▲) pour faire défiler les valeurs jusqu'au volume de perfusion restant dans votre abdomen depuis la dernière perfusion en échange manuel.

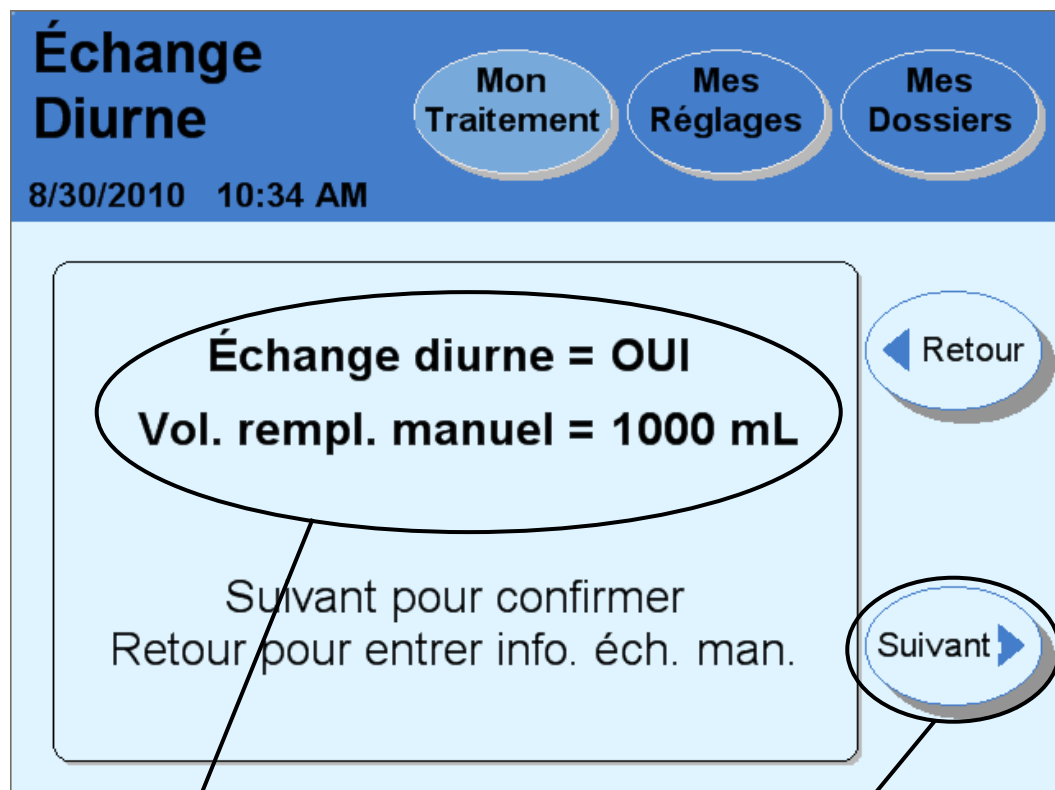
21 Appuyez sur **OK**

Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer et enregistrer les réglages.

22 Appuyez sur **Suivant**

Appuyez sur le bouton **Suivant** pour passer à l'écran suivant

Confirmation de l'échange diurne



23

24

23 Vérifiez deux fois vos réglages

Votre cycleur affiche les réglages d'échange diurne que vous avez entrés à l'écran précédent.

Si cet écran ne correspond pas à ce que vous avez entré, appuyez sur le bouton **Retour**. Vous devez entrer de nouveau les réglages corrects (allez à la page précédente).

24 Appuyez sur **Suivant**

Si vos réglages d'échange diurne sont listés correctement, appuyez sur le bouton **Suivant** pour passer à l'écran suivant. Vous y trouverez des instructions sur la manière de vous brancher à votre appareil.


Votre branchement

Prêt pour Traitement

7/25/2008 4:49 PM

Mon Traitement Mes Réglages Mes Dossiers

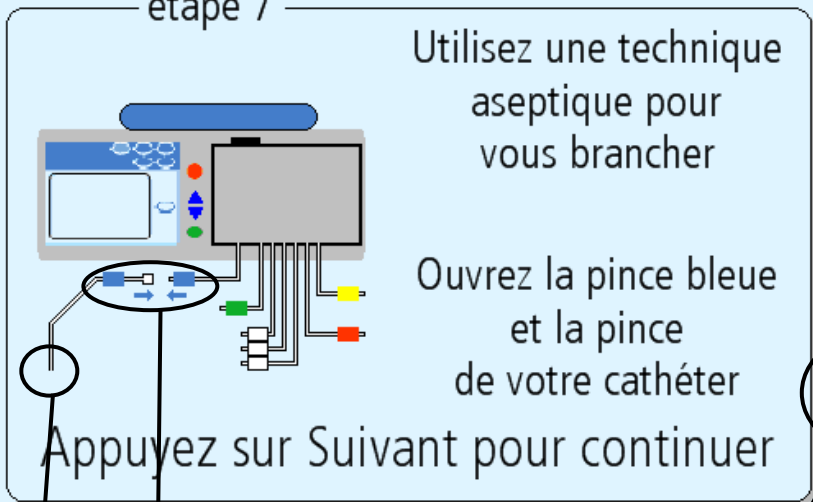étape 7




Utilisez une technique aseptique pour vous brancher

Ouvrez la pince bleue et la pince de votre cathéter

Appuyez sur Suivant pour continuer

Suivant

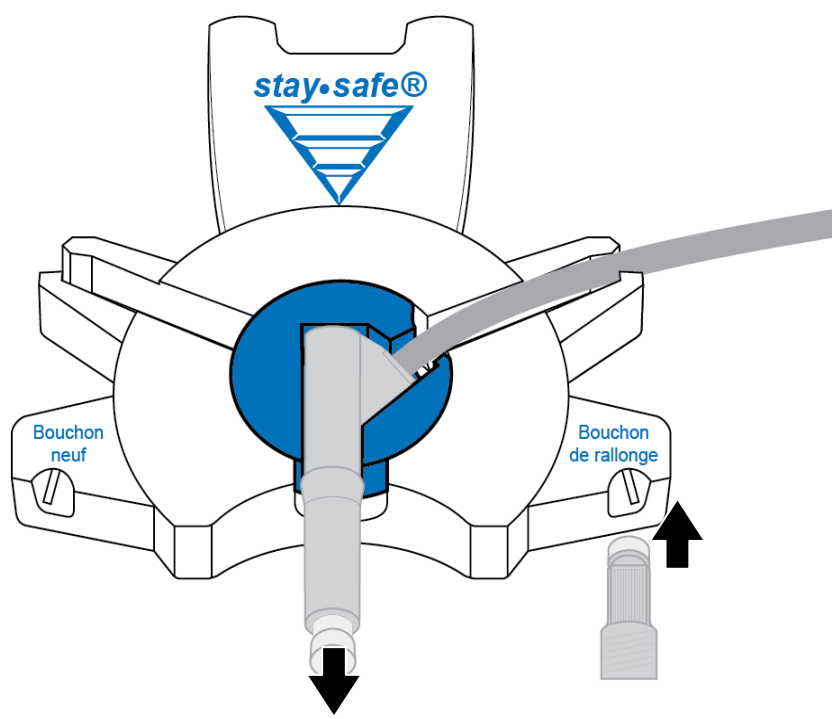25 26 27



25 Utilisez une technique aseptique pour vous brancher



Avertissement : Vous devez utiliser une technique aseptique pour éviter l'infection. Portez votre masque jusqu'à ce que vous ayez fini de vous brancher.

Avertissement : Utilisez un connecteur neuf stérile chaque fois que vous vous branchez.

Pour vous brancher à votre cycleur:

- Lavez-vous les mains ou utilisez un désinfectant selon les instructions de votre infirmière de dialyse.
- Insérez le bouchon de rallonge de cathéter dans le support du système *stay•safe*
- Enlever le bouchon *stay•safe* transparent du connecteur *stay•safe*
- Branchez la tubulure de rallonge de cathéter au connecteur *stay•safe* de la tubulure du patient à pince bleue

26 Ouvrez la pince bleue et la pince de votre cathéter

27 Appuyez sur **Suivant**

Appuyer sur le bouton **Suivant** pour commencer les échanges prescrits.



Avertissement : Si vous devez arrêter votre cycleur après une perfusion, il est CRUCIAL, quand vous relancez le cycleur, que vous NE sautiez PAS Drain 0, car cela pourrait se traduire par une surcharge de liquide.

Avertissement : Si vous procédez à un ou plusieurs échanges manuels diurnes non programmés dans le cycleur Liberty, votre cycleur ignorera que vous avez du liquide supplémentaire dans votre abdomen. Ne sautez PAS Drain 0. Votre cycleur Liberty passe à Perf 1 quand le drainage est terminé.



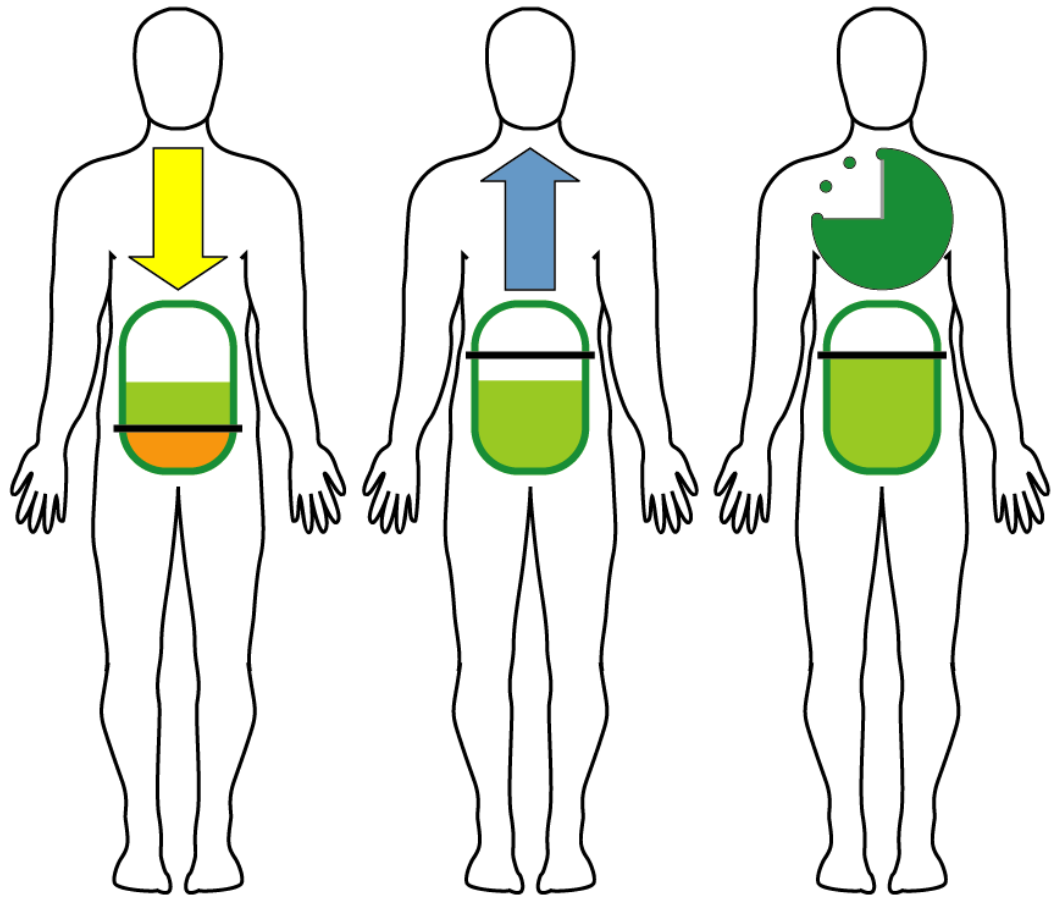
Remarque : Le traitement commence réellement en ce point, avec le début de Drain 0.

Pour des détails sur le saut d'un échange, allez à la page 158

Page laissée intentionnellement vide

Échanges

Échanges



Drainage

Perfusion

Contact/Pause

DPI – Dialyse péritonéale intermittente

La DPI est une *thérapie intermittente*, c'est à dire interrompue. Avec la DPI, le cycleur procède aux échanges durant la nuit. Votre appareil draine la cavité péritonéale le matin, de manière qu'il n'y ait pas de dialysat dans la cavité durant la journée.

DP fluctuante – Dialyse péritonéale TIDAL

Dépendant du programme, la DP fluctuante peut être *intermittente* ou *continue*. Avec cette technique, le cycleur procède aux échanges durant la nuit, mais ne draine pas toujours complètement la cavité péritonéale à chaque échange. Une partie seulement du volume de dialysat est drainé ou perfusé lors de chaque échange. Selon la prescription, vous pouvez terminer le traitement sur une perfusion ou sur un drainage.

DPCC – Dialyse péritonéale cyclique continue

La DPCC est une *thérapie continue*. C'est la thérapie prescrite le plus souvent. Avec la DPCC, le dialysat est présent en permanence dans la cavité péritonéale. Il y a trois échanges ou plus de dialysat au cours de la nuit et un long échange durant la journée. Chaque matin, le cycleur procède à une perfusion pour la journée. Quand vous vous rebranchez à l'appareil le soir, vous devez d'abord drainer le dialysat resté au contact de la cavité péritonéale depuis la fin du dernier traitement.

DP+ – Dialyse péritonéale plus

La DP Plus est une *thérapie continue* comme la DPCC, mais comprend des drainages et des périodes de contact de type pause durant la journée, pour permettre une élimination accrue des déchets.

Ordre des écrans du cycleur

Le nombre des drainages, perfusions et contacts (ou pauses) dépend du traitement prescrit. Les exemples d'écrans suivants expliquent les différentes caractéristiques. Suivez l'organisation des écrans de votre cycleur, qui suivra automatiquement les étapes de votre prescription.

Échange : Drain 0

Drain. 1 de 2

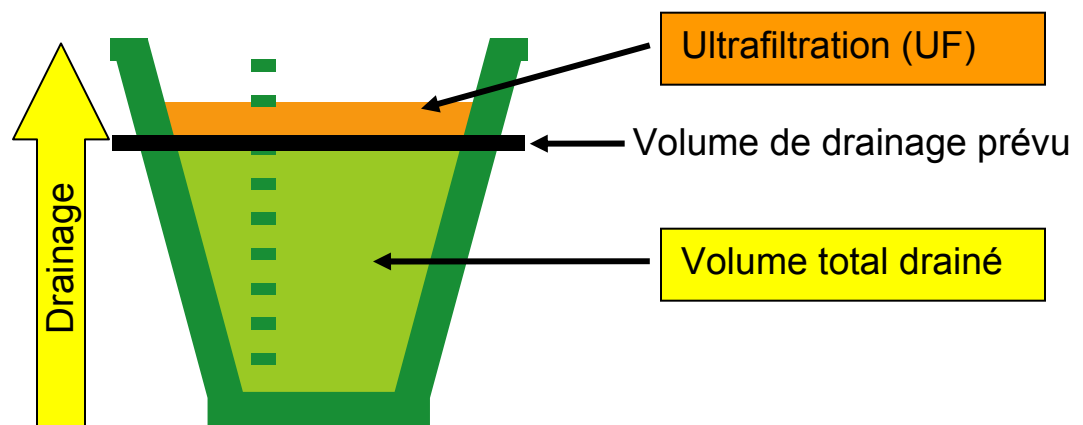

Mon Traitement Mes Réglages Mes Dossiers

3/25/2011 2:44 PM

Ultrafiltration (UF)
510 mL

Vol. de drainage prévu
1000 mL

Volume total drainé
1510 mL



Remarque : Les valeurs montrées ne sont que des exemples. Vous devez utiliser les valeurs prescrites par votre médecin.

Drain 0

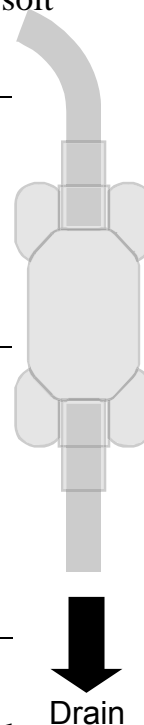
« Drain 0 » est le drainage qui commence le traitement. Drain 0 n'est pas compris dans l'ultrafiltration (UF) totale du traitement, à moins que l'option « Compter UF jour » soit réglée sur OUI (page 80).



Avvertissement : Ne sautez pas Drain 0 à moins que vous n'ayez discuté de la situation avec l'infirmière de dialyse ou avec votre médecin. Pour tout renseignement concernant le saut d'un échange, allez à page 158.



Remarque : Utilisez la fenêtre transparente de la tubulure de drainage pour examiner le dialysat envoyé par le cycleur vers le drain. Inversez-le au besoin pour permettre au liquide de s'y accumuler. Si le dialysat n'est pas clair, prélevez un échantillon et contactez l'infirmière de dialyse.



Écrans de drainage

À l'écran « Drainage », le graphique permet de suivre le drainage, dont la progression est illustrée par la montée du liquide dans le contenant de l'illustration précédente. Le drainage se poursuit jusqu'à ce que le niveau atteigne la ligne noire. Cette ligne correspond au volume de drainage prévu, basé sur la prescription.

Si le cycleur draine plus de liquide que la quantité perfusée, on dit qu'il y a eu « ultrafiltration ». Sur le graphique, le niveau de liquide dépasse la ligne noire. L'ultrafiltration apparaît comme une zone orange au-dessus de la ligne noire.



Remarque : Le drainage peut être plus rapide à la position assise ou debout qu'à la position allongée, parce que la pression sur l'abdomen est plus grande.

Remarque : Pour arrêter le drainage, appuyez sur la touche **STOP**. La pompe s'arrête et l'écran « Drainage arrêté » s'affiche. Le drainage reprend quand vous appuyez sur **OK**.

Lorsque le drainage est terminé, le cycleur commence une perfusion avec du dialysat frais ou termine le traitement. Si vous terminez les échanges par un drainage et s'il s'agit du dernier drainage du traitement, allez à « Fin du traitement », page 128. En ce qui concerne les perfusions, allez à la page suivante pour les explications.

Échange : Perf 1

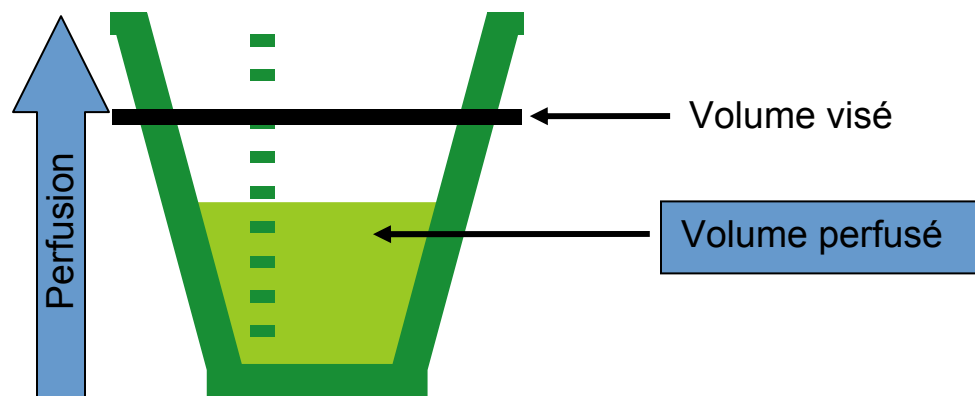

Perf. 1 de 2

Mon Traitement Mes Réglages Mes Dossiers

3/28/2011 2:26 PM

Volume visé
1500 mL

Volume perfusé
1000 mL



Remarque : Les valeurs montrées ne sont que des exemples.
Vous devez utiliser les valeurs prescrites par votre médecin.

Perf 1

Perf 1 est la première perfusion de dialysat du traitement.
Votre cycleur passe toujours à Perf 1 après Drain 0.

Écrans de perfusion

À l'écran « Perfusion », le graphique permet de suivre la progression de la perfusion, illustrée ci-dessus par la montée du liquide dans le contenant. La ligne noire indique le volume de perfusion visé.

La perfusion se poursuit jusqu'à ce que le niveau atteigne la ligne noire. Cette ligne correspond au volume de perfusion visé, qui est basé sur la prescription du médecin.



Avvertissement : Si vous ressentez une montée de pression douloureuse durant la perfusion, arrêtez le cycleur immédiatement en appuyant sur la touche **STOP** et appelez l'infirmière de dialyse ou votre médecin. Une surcharge peut causer des lésions graves, voire mortelles. Pour plus de renseignements sur la surcharge de liquide, allez à la page 158



Remarque : La perfusion peut être plus rapide à la position allongée qu'assise ou debout, parce que la pression sur l'abdomen est moins forte.

Remarque : Pour arrêter la perfusion, appuyez sur la touche **STOP**. La pompe s'arrête et l'écran « Perfusion arrêté » s'affiche. La perfusion reprend quand vous appuyez sur **OK**.

Remarque : Le cycleur retarde la perfusion tant que la température de la solution du sac sur le plateau réchaud est inférieure à 33° C (91.4° F). Lorsque la température atteint 25° C (77° F), le cycleur affiche le message « Appuyez sur OK pour commencer la perfusion... ». Si vous appuyez sur OK, la perfusion avec la solution froide commence. Si cette température de solution est inconfortable pour vous, n'appuyez pas sur **OK** et attendez que la solution ait atteint la température voulue.

Une fois la perfusion terminée, le cycleur passe à la phase de contact (page 126) ou de pause (page 122), dépendant du type de thérapie.

Si vous avez programmé une dernière perfusion et qu'il s'agit de la dernière perfusion du traitement, allez à « Fin du traitement », page 128.

Échange : Pause

Pause 1 de 2

Mon Traitement Mes Réglages Mes Dossiers

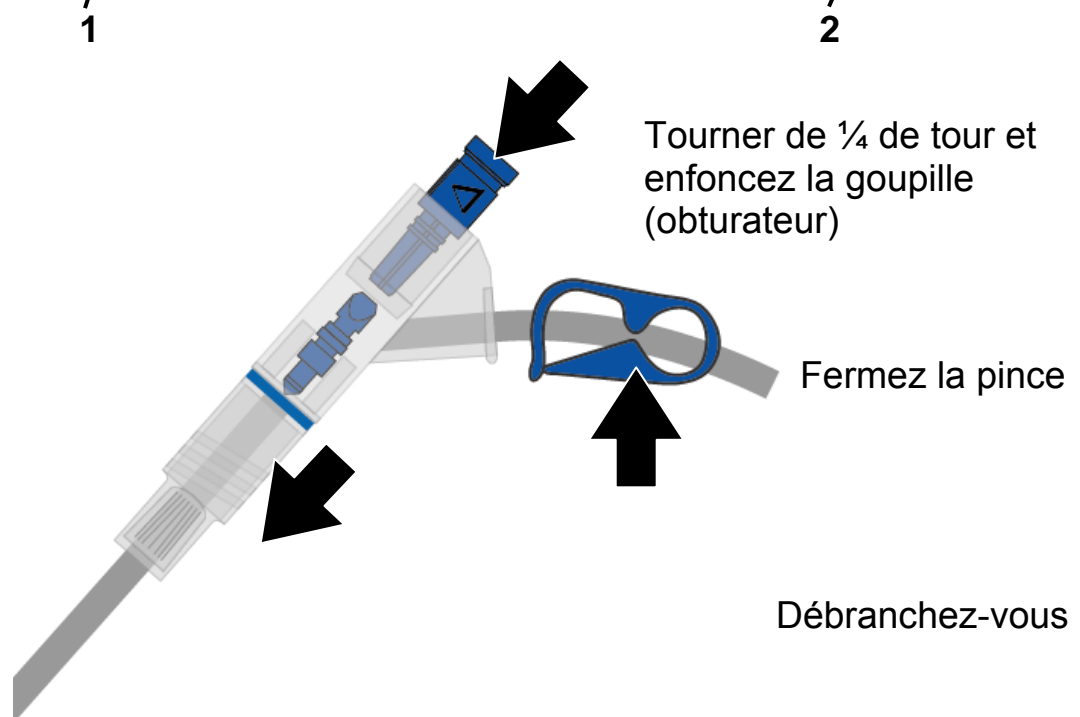
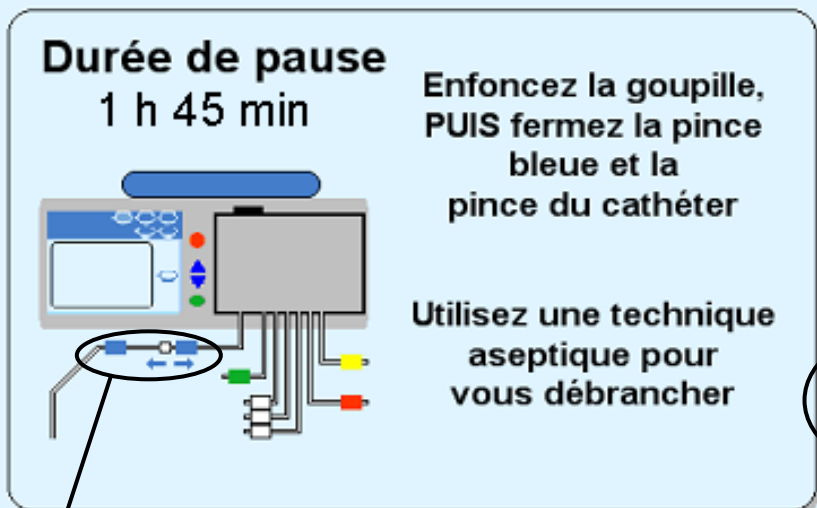
5/12/2008 11:50 AM

Durée de pause
1 h 45 min

Enfoncez la goupille, PUIS fermez la pince bleue et la pince du cathéter

Utilisez une technique aseptique pour vous débrancher

Suivant ▶



1 Pause : Débranchez-vous du cycleur

Une « pause » est un type particulier de « contact ». Durant une pause, la solution remplit toujours la cavité péritonéale, mais vous pouvez vous débrancher du cycleur. La pause a aussi ceci de différent des autres types de contact qu'elle n'est pas minutée et qu'elle peut donc durer aussi longtemps que vous le désirez. Le nombre des pauses durant le traitement dépend de la prescription. Allez à « Mes Paramètres de traitement », page 2.

Quand le cycleur est à l'écran « Pause », vous pouvez vous débrancher de l'appareil.



Avertissement : Vous devez utiliser pour cela la technique aseptique prescrite par l'infirmière de dialyse pour prévenir l'infection.

Avertissement : Utilisez un connecteur et un bouchon *stay•safe* neufs stériles chaque fois que vous vous débranchez de votre cycleur. Avant de vous débrancher, n'oubliez pas d'insérer un bouchon neuf stérile dans le support de bouchon neuf du système *stay•safe*.

Pour vous débrancher du cycleur :

- Enfoncez la goupille — faites-la tourner de ¼ de tour et poussez-la pour être sûr qu'une goupille neuve est insérée dans la tubulure
- Fermez la pince bleue de la tubulure du patient
- Fermez la pince de rallonge de cathéter
- Débranchez avec précaution la tubulure du patient de la rallonge et bouchez-la avec un bouchon *stay•safe* stérile neuf
- Vérifiez que le cathéter/rallonge est solidement maintenu en place

Le cycleur affiche la durée de la pause dans le champ « Durée de pause ».

2 Appuyez sur **Suivant**

Vous êtes maintenant indépendant du cycleur. Appuyez sur le bouton **Suivant** quand vous êtes prêt à vous rebrancher au cycleur.



Remarque : Le bouton **Suivant** n'est accessible que lorsque le cycleur a fini de remplir le sac du réchaud.

Échange : Redémarrage après une pause

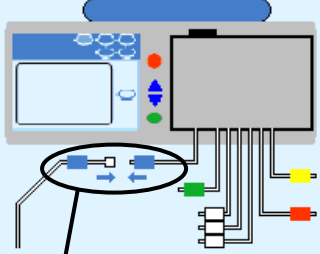
Pause 2 de 2
Redémarrage

7/28/2008 5:00 PM

Mon
Traitement

Mes
Réglages

Mes
Dossiers



Utilisez une technique aseptique pour vous brancher

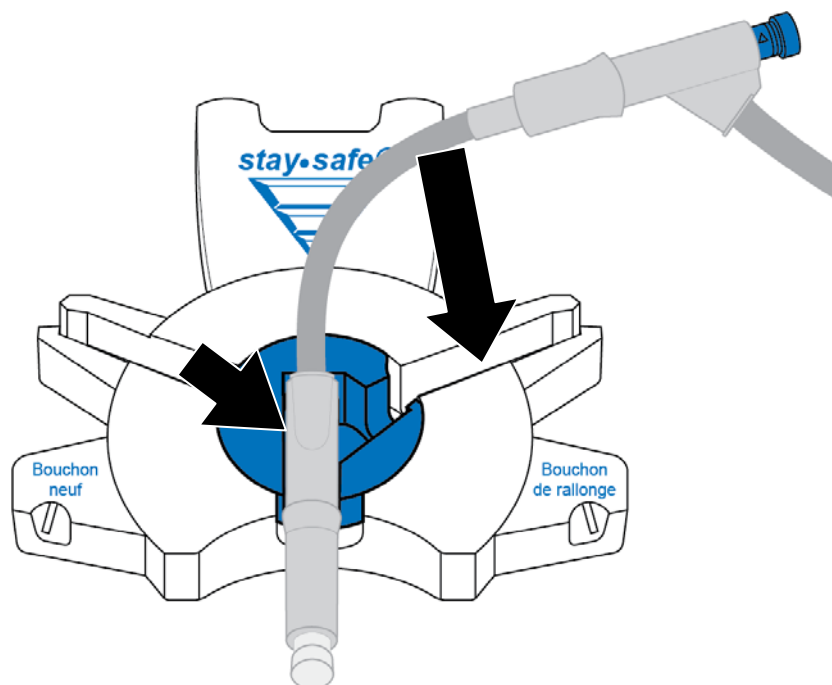
Ouvrez la pince bleue et la pince de votre cathéter

Appuyez sur Suivant pour continuer

Suivant

3

4



3 Rebranchez-vous au cycleur

Rebranchez-vous au cycleur quand vous êtes prêt à reprendre le traitement. N'oubliez pas d'enlever le connecteur *stay•safe* usagé de son support avant de commencer.



Avvertissement : Vous devez utiliser une technique aseptique selon les instructions de l'infirmière de dialyse pour prévenir l'infection. Mettez un masque et lavez-vous les mains avant de vous rebrancher.

Pour vous rebrancher à votre cycleur:

- Mettez un masque
- Lavez-vous les mains
- Insérez le connecteur *stay•safe* suivant de la tubulure du patient dans le support d'organiseur *stay•safe*, sous le panneau de commande
- Insérez la tubulure dans le conduit de tubulure du côté droit
- Enlevez le bouchon *stay•safe* transparent du connecteur *stay•safe*
- Branchez la tubulure de rallonge de cathéter au connecteur *stay•safe* de la tubulure du patient à pince bleue
- Ouvrez la pince bleue de la tubulure du patient
- Ouvrez la pince de rallonge de cathéter

4 Appuyez sur **Suivant**

Quand vous appuyez sur le bouton **Suivant**, le cycleur lance le processus de drainage. Allez à la page 118 pour plus de renseignements sur le drainage.

Échange : Contact

Contact 1 de 2

3/28/2011 2:47 PM


Mon
Traitement

Mes
Réglages

Mes
Dossiers

Temps restant
1 h 30 min

Temps fixé
2 h 0 min



Remarque : Les valeurs montrées ne sont que des exemples.
Vous devez utiliser les valeurs prescrites par votre médecin.

Écrans Contact

Durant une période de contact, vous restez branché à l'appareil pendant que le liquide séjourne dans la cavité péritonéale. Les périodes de contact ont lieu le plus souvent la nuit, pendant que vous dormez.

L'écran «Contact» affiche une minuterie indiquant le temps de contact restant. Durant la période de contact, le cycleur pompe la solution de dialysat dans le sac du réchaud pour la réchauffer en prévision de la perfusion suivante.



Avertissement : Durant le réchauffement de la solution, le plateau réchaud peut atteindre 50° C (122° F) et peut vous brûler si vous le touchez.



Remarque : Pour interrompre le minutage du contact dans la cavité péritonéale, appuyez sur la touche **STOP**. La minuterie de contact s'arrête et l'écran « Contact arrêté » s'affiche. Le minutage du contact reprend quand vous appuyez sur **OK**.

Remarque : Le cycleur ne peut pas sauter un échange pendant que le sac du réchaud se remplit.

Lorsque la période de contact se termine, le cycleur procède au drainage de la cavité péritonéale. Allez à la page 118 pour plus de renseignements sur le processus de drainage.

Page laissée intentionnellement vide

Fin du traitement


Fin de votre traitement

Traitement Terminé

5/12/2008 11:59 AM

Mon Traitement Mes Réglages Mes Dossiers

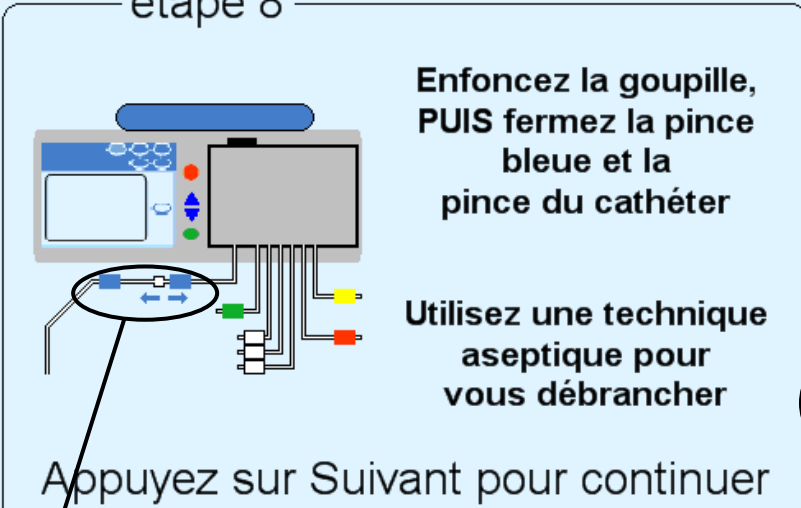étape 8



Enfoncez la goupille, PUIS fermez la pince bleue et la pince du cathéter

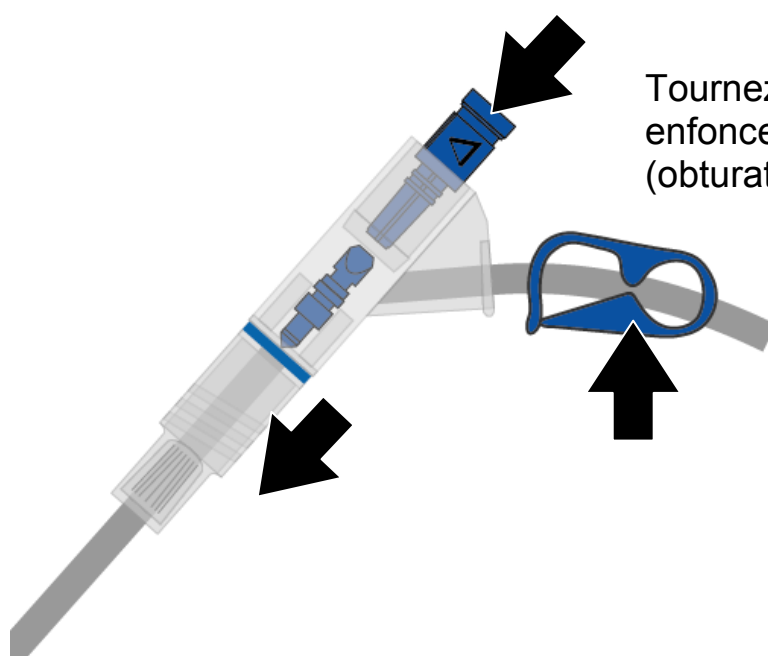
Utilisez une technique aseptique pour vous débrancher

Appuyez sur Suivant pour continuer

Suivant

1

2



Tournez de $\frac{1}{4}$ de tour et enfoncez la goupille (obturateur)

Fermez la pince

Débranchez-vous

1 Débranchez-vous du cycleur

Après le dernier drainage ou la dernière perfusion du traitement, celui-ci est terminé pour la journée. Vous pouvez vous débrancher du cycleur lorsque l'écran ci-dessus s'affiche.



Avertissement : Vous devez utiliser pour cela la technique aseptique prescrite par l'infirmière de dialyse pour prévenir l'infection.

Avertissement : Utilisez un connecteur et un bouchon *stay•safe* neufs stériles chaque fois que vous vous débranchez du cycleur. Avant de vous débrancher, n'oubliez pas d'insérer un bouchon neuf stérile dans le support de bouchon neuf du système *stay•safe*.

Pour vous débrancher du cycleur:

- Enfoncez la goupille — faites-la tourner de ¼ de tour et poussez-la pour être sûr qu'une goupille neuve est insérée dans la tubulure
- Fermez la pince bleue de la tubulure du patient
- Fermez la pince de rallonge de cathéter
- Débranchez avec précaution la tubulure du patient de la rallonge et bouchez-la avec un bouchon *stay•safe* stérile neuf
- Vérifiez que le cathéter/rallonge est solidement maintenu en place

2 Appuyez sur **Suivant**

Appuyez sur le bouton **Suivant** pour continuer. Si vous avez réglé l'option « données personnelles » sur OUI (allez à « Onglet Options », page 80), votre cycleur passe à l'écran « Données de santé personnelles ». Si l'option « données personnelles » n'est pas réglée, allez à la page 134.

Entrée de vos données de santé personnelles

Données pt

Mon Traitement Mes Réglages Mes Dossiers

8/30/2010 10:44 AM

Vos données de santé personnelles

Entrez ci-dessous vos données de santé

dextrose 1,5 %	type dernier sac	pouls
500 mL	1.5	60
dextrose 2,5 %	glycémie	tension artérielle
500 mL	20 mg/dL	120 / 70
dextrose 4,25 %	poids	température
1000 mL	68.5 kgs	36.2 °C

Appuyez sur Suivant pour continuer

Suivant

3 4 5



Remarque : Les valeurs montrées ne sont que des exemples. Vous devez utiliser les valeurs prescrites par votre médecin.



Remarque : Cet écran apparaît uniquement si vous réglez l'option « Données personnelles » sur OUI. Allez à « Onglet Options », page 80.

Vous devez entrer vos données de santé maintenant —
Vous ne pourrez plus modifier cet écran par la suite.

3 Choisissez les valeurs

Ici, vous devez mettre à jour vos données de santé personnelles. Appuyez sur le bouton jaune pour choisir la valeur correspondante :

- **Dextrose 1,5 %** — Quantité de dextrose 1,5 % utilisée durant le traitement
- **Dextrose 2,5 %** — Quantité de dextrose 2,5 % utilisée durant le traitement
- **Dextrose 4,25 %** — Quantité de dextrose 4,25 % utilisée durant le traitement
- **Type dernier sac** — Type de dextrose du dernier sac utilisé (1,5, 2,5 ou 4,25)
- **Glycémie** — Votre taux de glucose sanguin
- **Poids** — Votre poids après le traitement
- **Pouls** — Votre pouls en battements par minute
- **Tension artérielle** — Mesurez votre tension artérielle de la manière indiquée par l'infirmière de dialyse. Appuyez sur le bouton Tension artérielle pour le choisir, puis utilisez les touches **fléchées Haut/Bas** (▼/▲) pour changer la première valeur (tension systolique). Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer la sélection. Utilisez les touches **fléchées Haut/Bas** (▼/▲) pour fixer le deuxième nombre (tension diastolique) et appuyez de nouveau sur la touche **OK** pour confirmer la sélection.
- **Température** — Mesurez et entrez la température de la manière indiquée par l'infirmière de dialyse



Remarque : Ces valeurs doivent être mesurées correctement pour déterminer l'efficacité du traitement.

4 Entrez les valeurs

Quand vous appuyez sur un bouton jaune, il tourne à l'orange. Utilisez les touches **fléchées Haut/Bas** (▼/▲) pour afficher les valeurs mesurées. Procédez ainsi pour toutes les données.

Quand vous avez fini d'entrer les données, appuyez sur la touche **OK** pour confirmer les valeurs choisies.

5 Appuyez sur **Suivant**

Après avoir appuyé sur la touche **OK**, appuyez sur **Suivant** pour continuer. Si vous le faites sans entrer vos données de santé, aucune donnée ne sera enregistrée pour cette date.

Sommaire du traitement

Traitement Sommaire

3/25/2011 3:04 PM

Mon Traitement Mes Réglages Mes Dossiers

Votre sommaire de traitement

durée totale 7 h 15 min	durée contact perdu 0 h 3 min
UF totale 454 mL	dernier vol. 2000 mL
volume total 7999 mL	

Détails

Suivant ▶

Appuyez sur Suivant pour continuer

6 7



Remarque : Les valeurs montrées ne sont que des exemples. Vous devez utiliser les valeurs prescrites par votre médecin.

6 Examinez le sommaire du traitement

Cet écran affiche un sommaire de votre dernier traitement. Il liste la durée totale, l'UF totale et le volume total. D'autres données plus détaillées sont présentées à l'écran «Détails », auquel vous pouvez accéder par le bouton **Détails**, à droite de l'écran, ou par l'intermédiaire du bouton écran **Mes Dossiers**, à la partie supérieure de l'écran.



Remarque : Le bouton **Détails** peut vous fournir plus de renseignement sur votre dernier traitement. L'écran « Détails » affiche des renseignements sur les alarmes, les échanges, les durées et les volumes. Allez à la page suivante pour plus de renseignements sur cet écran.

Remarque : Le cycleur est conçu pour terminer le traitement au moment fixé. Si la durée de contact est plus longue que prévue (du fait d'une alarme), le bouton **durée contact** affiche le mot « gain de » avant la durée. Si la durée de contact était plus courte que prévu (du fait du saut d'un drainage ou d'une perfusion), le bouton **durée contact** affiche le mot « perdu » avant la durée.

7 Appuyez sur **Suivant**

Appuyez sur le bouton **Suivant** quand vous avez fini de réviser votre traitement. Allez à la page 142 pour continuer.

Sommaire du traitement (suite)

Traitement Sommaire Mon Traitement Mes Réglages Mes Dossiers


4/4/2008 3:39 PM

Vos détails de traitement pour 2/7/2007

# cycles	perfusion		contact durée	drain		UF vol
	vol	durée		vol	durée	
0				1900	20	-100
1	2000	15B	60P	2100	18	100
2	2000	13	120	2100	21B	100
3	2000	15	90	2000	20	0
4	2000	16F	120	2000	20	0
5	2000	14				

tous les volumes en mL
toutes les durées en min

UF net: 100



réviser

retournez en
arrière



Remarque : Les valeurs montrées ne sont que des exemples.
Vous devez utiliser les valeurs prescrites par votre médecin.

Examinez les détails du traitement

Cet écran affiche les cycles du dernier traitement. Les renseignements sont indiqués par numéro de cycle et comprennent :

- Le volume de perfusion
- La durée de perfusion
- La durée de contact
- Le volume drainé
- La durée de drainage
- Le volume d'ultrafiltration



Remarque : Dans le cas d'une interruption de drainage, de perfusion, de contact ou de pause, l'une des lettres suivantes apparaît en regard des durées affichées, pour indiquer une interruption:

F – Panne de courant

B – Saut

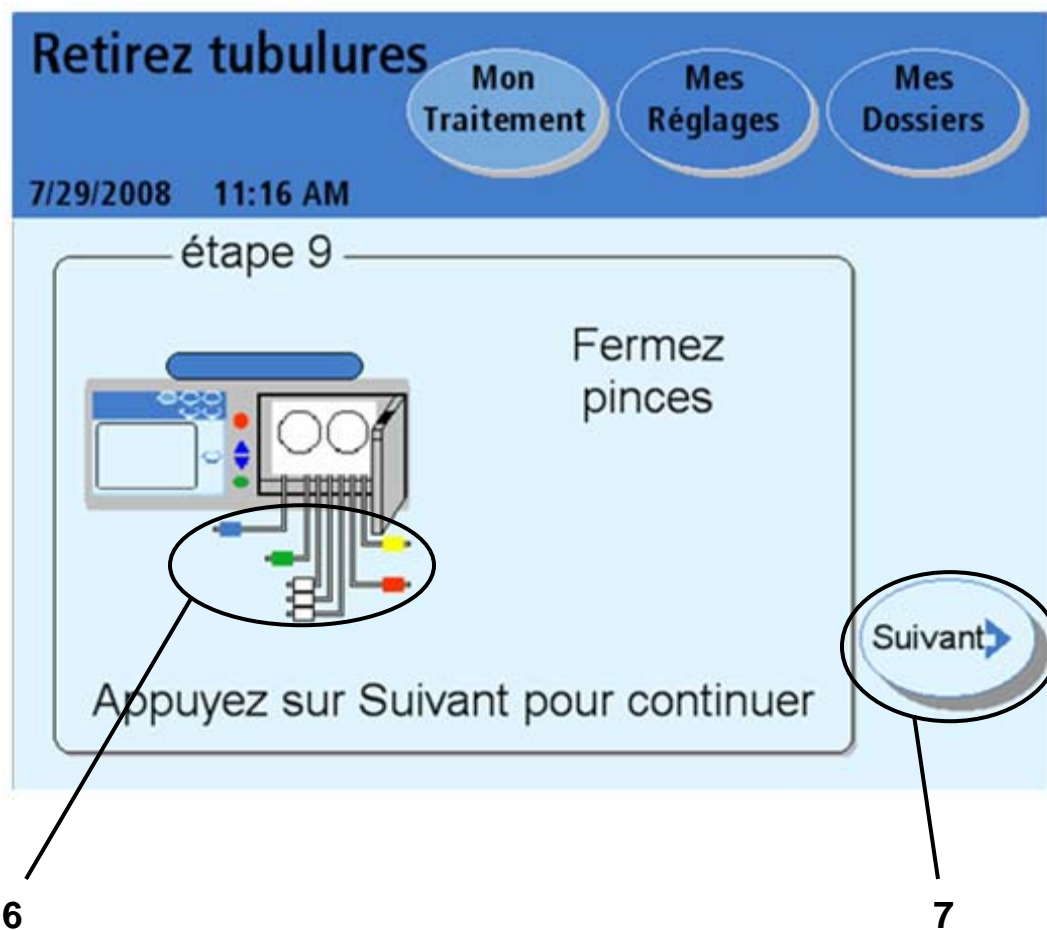
P – Pause

S – Drain AUSSITÔT

Appuyez sur **Suivant**

Appuyez sur le bouton **Suivant** pour retourner à l'écran « Sommaire du traitement ». Pour passer à l'étape suivante (page suivante), appuyez sur le bouton **Suivant** quand vous êtes à l'écran « Sommaire du traitement ».

Retrait des tubulures - Écran 1



6 Fermez les pinces

Fermez toutes les pinces pour empêcher des fuites de liquide en retirant les tubulures jetables.

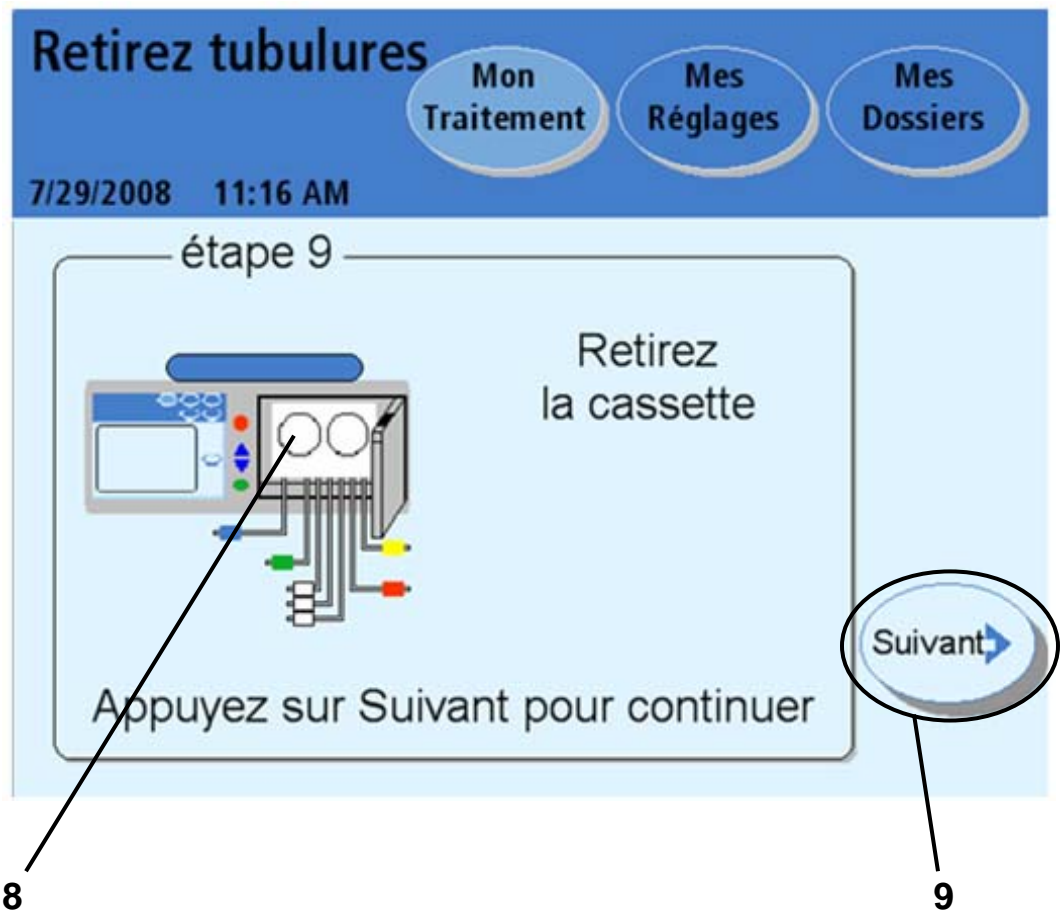


Remarque : Pincez toutes les tubulures, car des fuites accidentelles sont possibles. De telles fuites peuvent endommager les revêtements de sol et d'autres surfaces. Pour contenir les fuites, placez l'appareil sur une surface résistante à leurs effets. Nettoyez immédiatement le liquide répandu.

7 Appuyez sur **Suivant**

Appuyez sur le bouton **Suivant** pour continuer.

Retrait des tubulures - Écran 2



8 Retirez la cassette

Repoussez le verrou du porte de la cassette pour l'ouvrir.



Avertissement : Faites attention aux pièces mobiles qui peuvent pincer et causer une blessure.

Retirez la cassette de l'appareil. Conformez-vous aux instructions concernant les déchets.



Attention : Si votre module de pompe contient de l'humidité, il se peut que la cassette fuie. Conservez la cassette et appelez immédiatement le soutien technique au : 1 877 633-0013

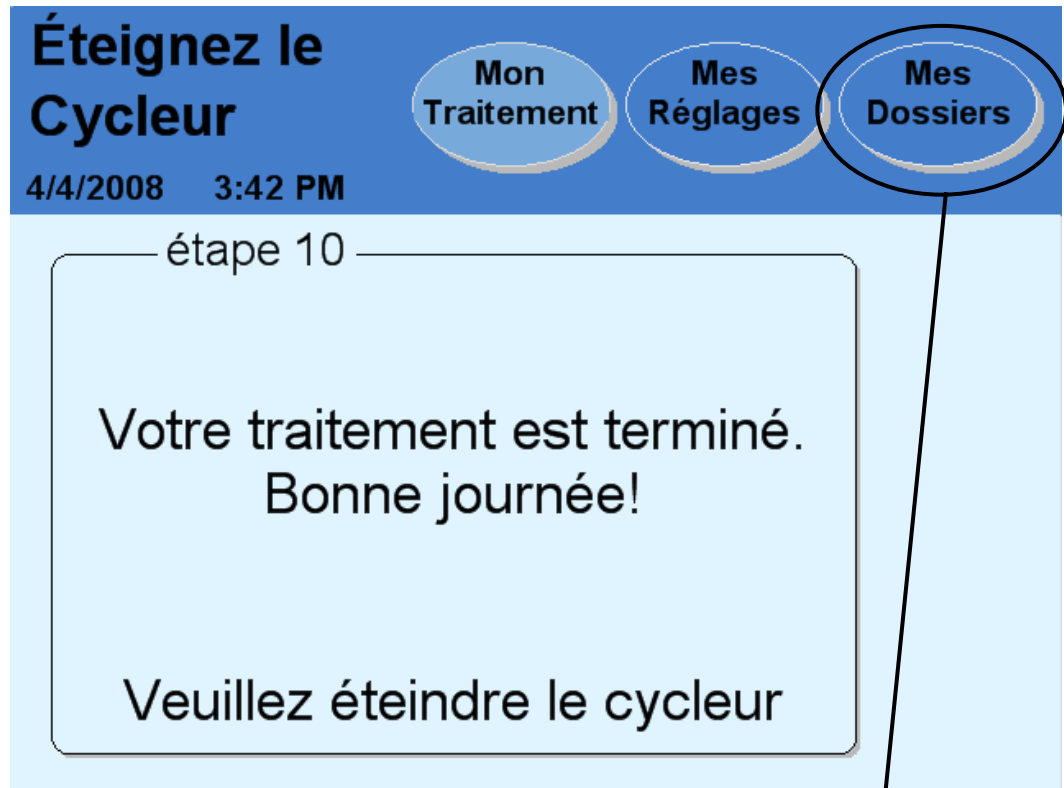
Vous devez maintenant nettoyer l'appareil. Conformez-vous aux instructions du personnel de soins. Allez à « Nettoyage du cycleur », page 201.

Refermez et verrouillez la porte de la cassette.

9 Appuyez sur **Suivant**

Le bouton **Suivant** apparaît après le verrouillage du porte. Appuyez sur ce bouton pour continuer.


Arrêt du cycleur



Examinez vos données de santé et de traitement

Bonne journée!

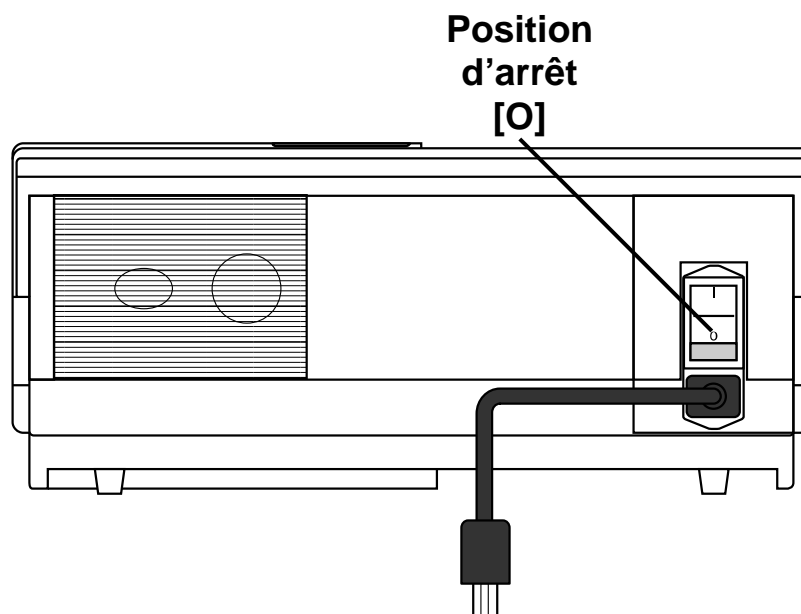Localisez le commutateur de marche/arrêt (I/O) à l'arrière du cycleur et placez-le à la position d'arrêt (O).



Vous devrez remettre le cycleur en marche avant le traitement suivant.

Si vous avez besoin d'enlever l'unité IQdrive pour la remettre à l'infirmière de dialyse, vous pouvez le faire maintenant.



Mise en garde : Manipulez l'unité IQdrive avec précaution. Placez-la dans un sac de plastique et gardez-la à l'abri de la saleté et de l'eau quand vous l'apportez à votre fournisseur de soins de santé ou quand celui-ci vous la remet. Ne laissez pas votre unité IQdrive dans un voiture chaude ou au fond d'un sac, où elle peut être endommagée.

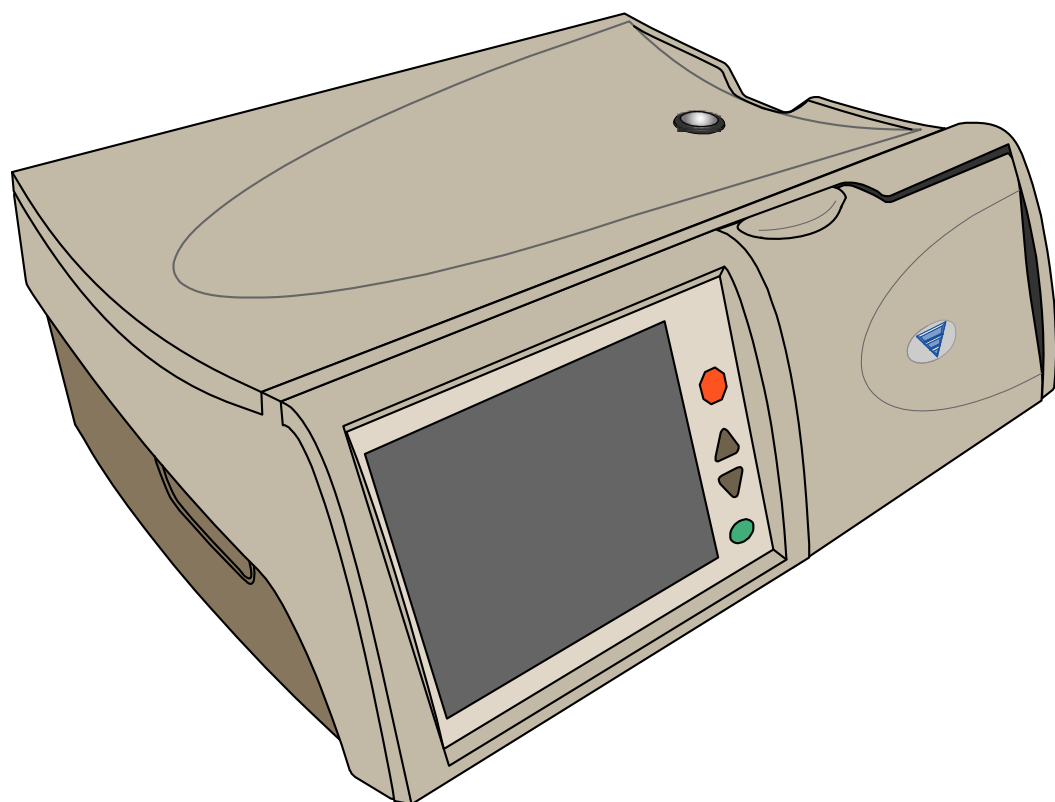
Appuyez sur **Mes Dossiers**

Pour examiner de nouveau les données de traitement, remettez le cycleur en marche et appuyez sur le bouton écran **Mes Dossiers**. Allez à la page 148 pour une explication de l'écran « Mes Dossiers ».

Page laissée intentionnellement vide

Annexe

Annexe




Annexe

L'annexe fournit des instructions utiles sur différentes fonctions que vous n'utiliserez pas nécessairement à chaque traitement :

- Affichage des écrans « Mes Dossiers » — Allez à la page 148
- Utilisation de la touche STOP — Allez à la page 154
- Utilisation de drain AUSSITÔT — Allez à la page 156
- Saut d'un échange — Allez à la page 158
- Utilisation de l'unité IQdrive — Allez à la page 162
- Déplacement du cycleur Liberty — Allez à la page 166

Si vous vous « perdez » en naviguant entre ces écrans, appuyez sur le bouton **Retour**, s'il est affiché, pour retourner à l'écran précédent. Vous pouvez aussi utiliser les boutons écrans de la barre d'état pour afficher d'autres écrans. Allez à la page 30 pour plus de renseignements sur les boutons écrans.

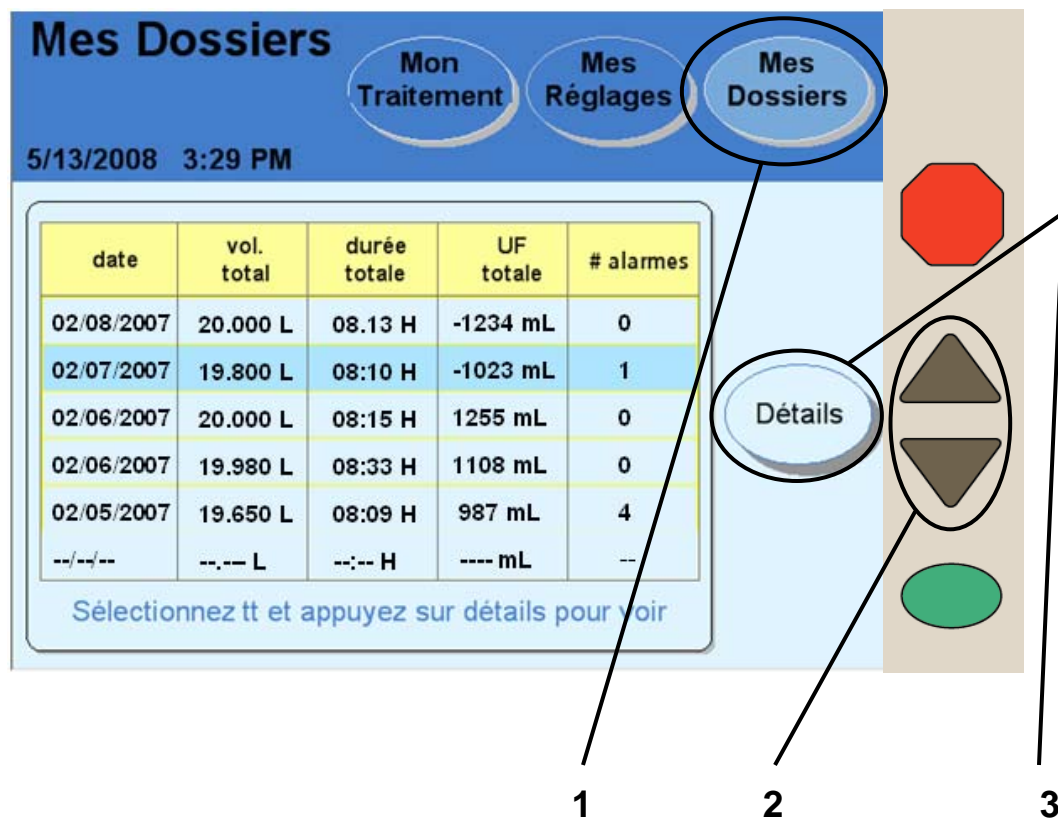Bouton écran Mes Dossiers



i **Remarque** : Les valeurs montrées ne sont que des exemples.
Vous devez utiliser les valeurs prescrites par votre médecin.

1 Appuyez sur **Mes Dossiers**

L'historique de vos traitements se trouve dans un dossier regroupant les traitements antérieurs. Le cycleur enregistre dans ce dossier toutes les données produites au cours de chacun des traitements. Vous ne pouvez pas changer ces données. Elles ont été enregistrées pour vous permettre, à vous et à l'infirmière de dialyse, de les consulter.

Vous pouvez accéder à l'écran « Mes Dossiers » depuis tous les autres écrans. Pour afficher l'historique de vos traitements, appuyez sur le bouton écran **Mes Dossiers**.

2 Choisissez la date du traitement à examiner

Le tableau des traitements affiche vos six derniers traitements dans la partie principale de l'écran. Utilisez les touches **fléchées Haut/Bas (▼/▲)** pour faire défiler les différentes pages du tableau et remonter à des dates plus anciennes au besoin. Appuyez sur la date voulue pour la choisir et mettre le traitement en évidence par une barre bleue.

Le cycleur garde en mémoire les données des traitements des trois derniers mois.

3 Appuyez sur **Détails**

Appuyez sur le bouton **Détails** pour afficher les détails du traitement à la date choisie.

Détails de traitement

Mes Dossiers **Mon Traitement** **Mes Réglages** **Mes Dossiers**

4/5/2008 6:25 PM

Vos détails de traitement pour 2/7/2007

# cycles	perfusion		contact durée	drain		UF vol
	vol	durée		vol	durée	
0				1900	20	-100
1	2000	15B	60P	2100	18	100
2	2000	13	120	2100	21B	100
3	2000	15	90	2000	20	0
4	2000	16F	120	2000	20	0
5	2000	14				

tous les volumes en mL
toutes les durées en min

UF net: 100

[Retour](#) [Suivant](#)

4

5



Remarque : Les valeurs montrées ne sont que des exemples.
Vous devez utiliser les valeurs prescrites par votre médecin.

4 Affichez les détails d'un traitement

Cet écran présente des données du traitement à la date choisie. La date est affichée en haut de la zone principale. Les données sont organisées par numéro de cycle (#) et comprennent :

- Le volume de perfusion
- La durée de perfusion
- La durée de contact
- Le volume drainé
- La durée du drainage
- Le volume d'ultrafiltration



Remarque : En cas d'interruption de drainage, de perfusion, de contact ou de pause, l'une des lettres suivantes apparaît en regard de la durée affichée pour indiquer une interruption:

F – Panne de courant

B – Saut

P – Pause

S – Drain AUSSITÔT

Remarque : Pour retourner en arrière et choisir une nouvelle date, appuyez sur le bouton Retour.

5 Appuyez sur **Suivant**

Appuyez sur le bouton **Suivant** pour visualiser les données de santé personnelles correspondant au traitement choisi.

Données de santé personnelles

Mes Dossiers Mon Traitement Mes Réglages Mes Dossiers

9/9/2010 4:11 PM

Vos données de santé personnelles

dextrose 1,5 % 500 mL	type dernier sac 1.5	pouls 60
dextrose 2,5 % 500 mL	glycémie 20 mg/dL	tension artérielle 120/70
dextrose 4,25 % 1000 mL	poids 68.5 kg	température 36.5°C

Retour

6

7



Remarque : Les valeurs montrées ne sont que des exemples. Vous devez utiliser les valeurs prescrites par votre médecin.

6 Examinez les détails de l'écran

Cet écran affiche les données de santé que vous avez entrées à la fin du traitement (page 132). Si vous n'avez pas entré de données à ce moment-là, le champ affiche « 0 » pour indiquer qu'il n'y a pas de données disponibles. L'écran « Données de santé personnelles » montre :

- Dextrose 1,5 %
- Dextrose 2,5 %
- Dextrose 4,25 %
- Type dernier sac
- Le poids entré après le traitement
- Glycémie
- Pouls
- Tension artérielle
- Température

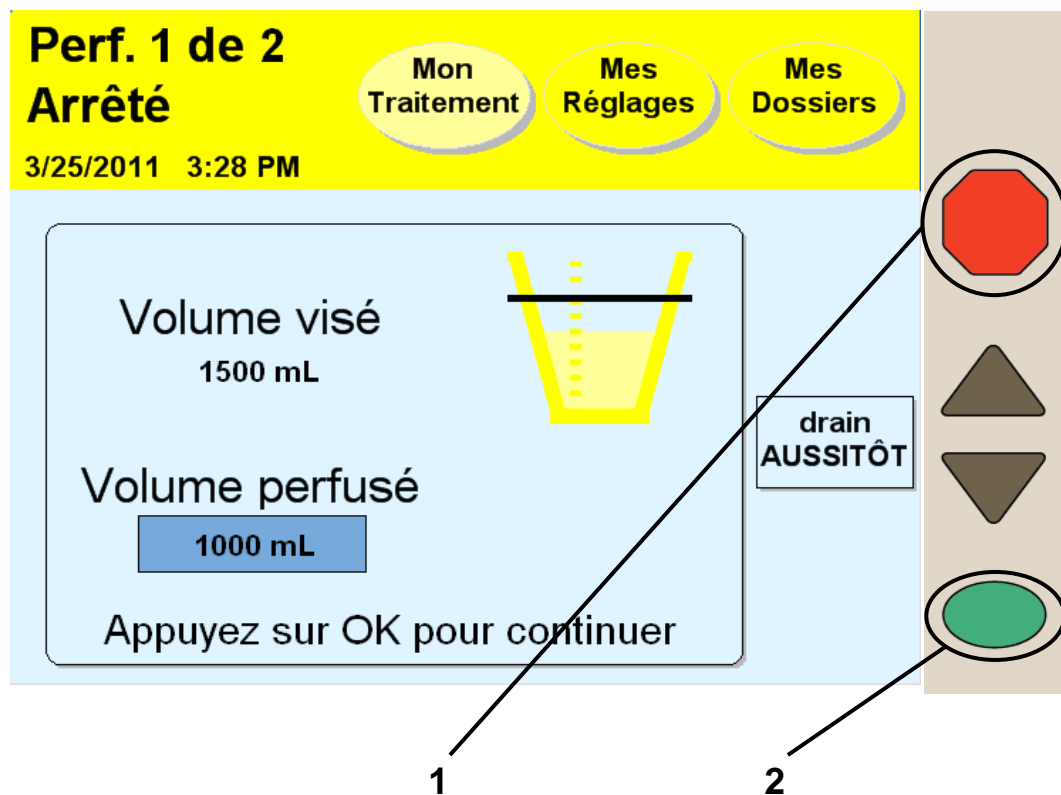
7 Appuyez sur **Retour**

Appuyez sur le bouton **Retour** pour retourner à l'écran « Données de santé personnelles ».



Remarque : Vous pouvez toucher n'importe lequel des boutons écrans de la barre d'état pour sortir des écrans « Données de santé personnelles ».

Utilisation de la touche STOP



1 Appuyez sur la touche **STOP**

S'il est absolument nécessaire d'arrêter l'appareil pendant l'exécution d'une fonction, appuyez sur la touche **STOP**. Vous pouvez arrêter les fonctions suivantes lorsque la barre d'état est verte :

- Irrigation
- Amorçage
- Détection des sacs
- Réchauffement
- Drainage
- Perfusion
- Contact



Remarque : Vous pouvez, durant une perfusion, un contact ou une pause, décider de procéder à un drainage immédiat (AUSSITÔT). N'appuyez pas sur la touche **OK** du cycleur; au lieu de cela, allez à la page suivante du manuel pour les instructions d'exécution d'un drainage AUSSITÔT.

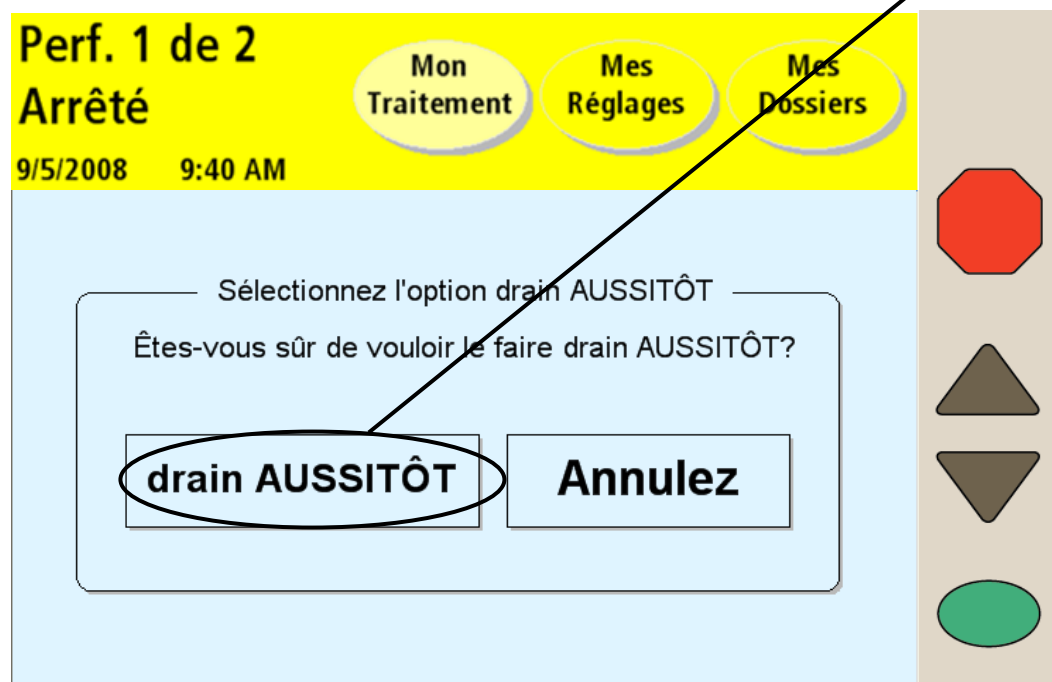
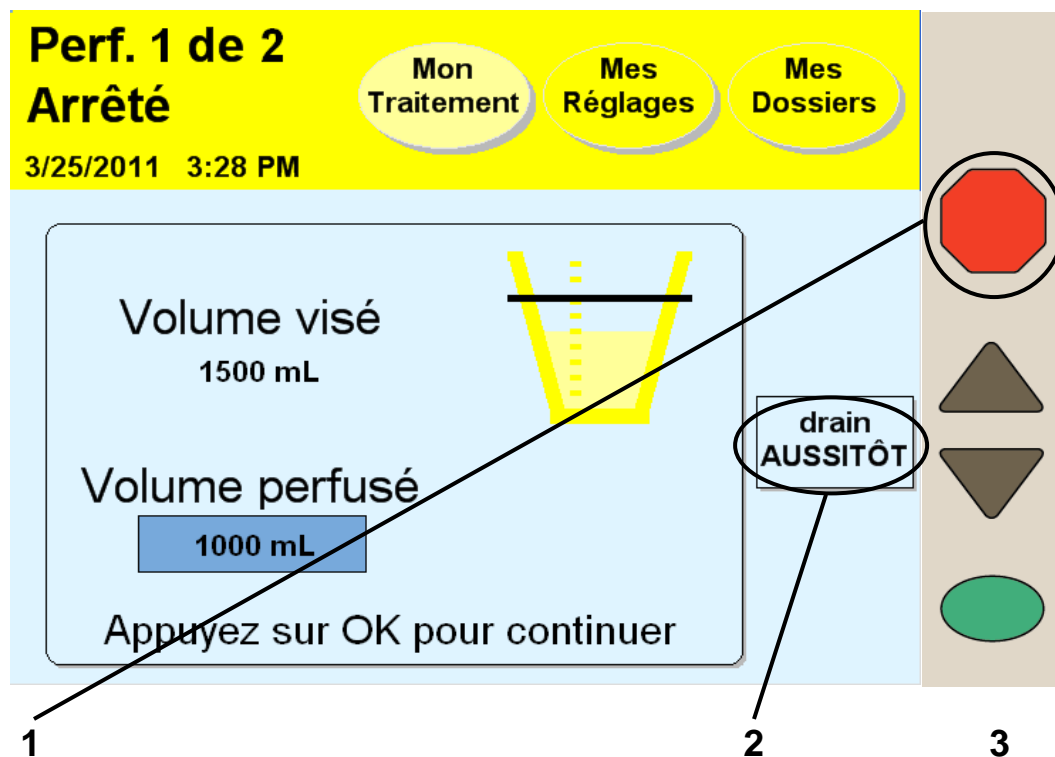
2 Appuyez sur **OK** quand vous êtes prêt à continuer

À l'arrêt du cycleur, les événements suivants se produisent :

- Le moteur de pompe s'arrête
- La barre d'état tourne au jaune
- Le mot « Arrêté » apparaît en haut de l'écran
- Le message « Appuyez sur OK pour continuer » est affiché au bas de l'écran.

Quand vous êtes prêt à continuer, appuyez sur **OK**.

Utilisation de l'option drain AUSSITÔT



1 Appuyez sur **STOP**

Vous pouvez, durant une perfusion, un contact ou une pause, décider de procéder à un drainage immédiat (AUSSITÔT). Ce drainage spontané interrompt la perfusion, le contact ou la pause. Appuyez sur la touche **STOP** pour arrêter d'abord la perfusion, le contact ou la pause.

2 Appuyez sur **drain AUSSITÔT**

Après l'affichage de « Arrêté », l'écran affiche le message « Appuyez sur OK pour continuer ». Appuyez sur le bouton **drain AUSSITÔT**.

3 Appuyez sur **drain AUSSITÔT** à l'écran suivant

Votre cycleur affiche l'écran « Sélectionnez l'option drain AUSSITÔT » Pour continuer avec le drainage AUSSITÔT, appuyez sur le bouton **drain AUSSITÔT**.

Si vous étiez précédemment dans un cycle de perfusion ou de contact, l'option drain AUSSITÔT commence immédiatement le drainage de votre abdomen.

Si vous étiez précédemment dans un cycle de pause, le cycleur vous demandera de vous rebrancher d'abord. Allez à la page 124 pour des renseignements sur la manière de vous rebrancher après une pause. Après le rebranchement, l'option drain AUSSITÔT commence immédiatement à drainer votre abdomen.

Durant une option drain AUSSITÔT, le cycleur affiche un écran de « Drain » avec le mot AUSSITÔT dans le coin supérieur gauche pour montrer qu'il s'agit d'un drainage spontané.



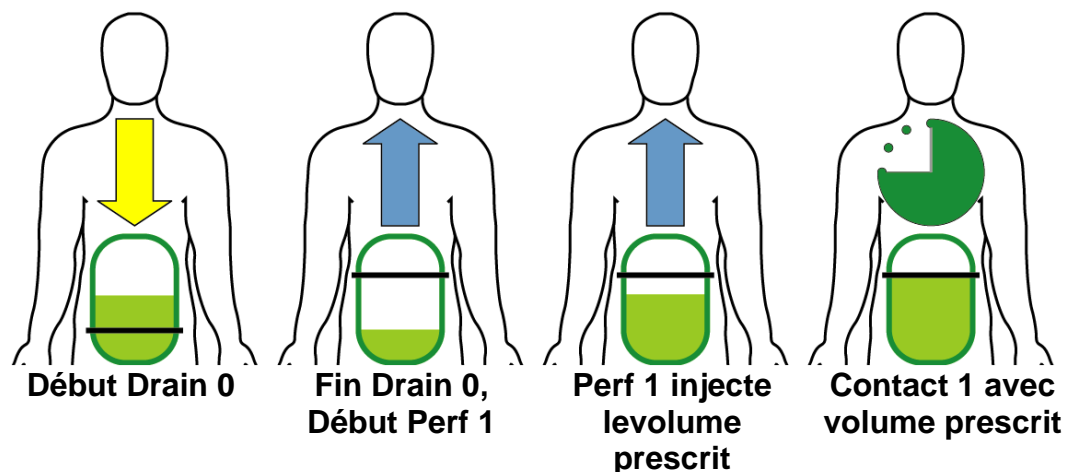
Remarque : Un drainage AUSSITÔT est identique à un drainage normal. Vous pouvez l'arrêter ou le sauter selon les besoins.

À la fin du drainage AUSSITÔT, le cycleur commence une courte période de contact ou une pause (dépendant du cycle que vous avez interrompu), de manière à pouvoir préparer le sac sur le réchaud pour le cycle suivant. Ensuite, le cycleur commence la perfusion programmée suivante, au besoin. Vos données de traitement montrent que vous avez effectué un drainage AUSSITÔT (allez à la page 148 pour plus de renseignements).


Si au lieu de cela vous ne voulez pas effectuer un drainage AUSSITÔT, vous appuyez sur le bouton **Annulez** ou vous attendez 10 secondes. Le cycleur retourne à l'écran « Arrêté » (allez à la page 154).

Saut d'échange

Traitement normal avec Drain 0 prescrit



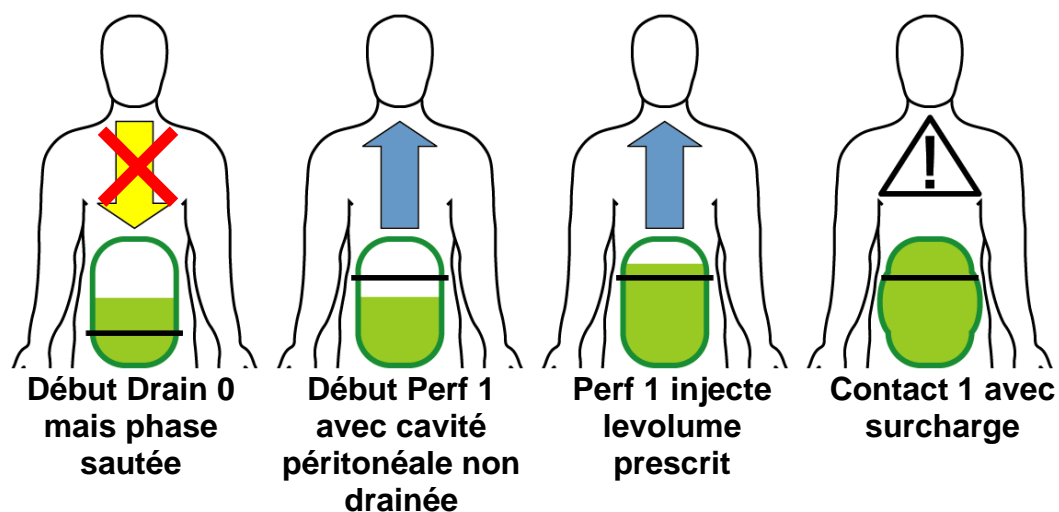Drain 0 sauté avec cavité péritonéale non drainée (Scénario 2)



Saut d'un échange

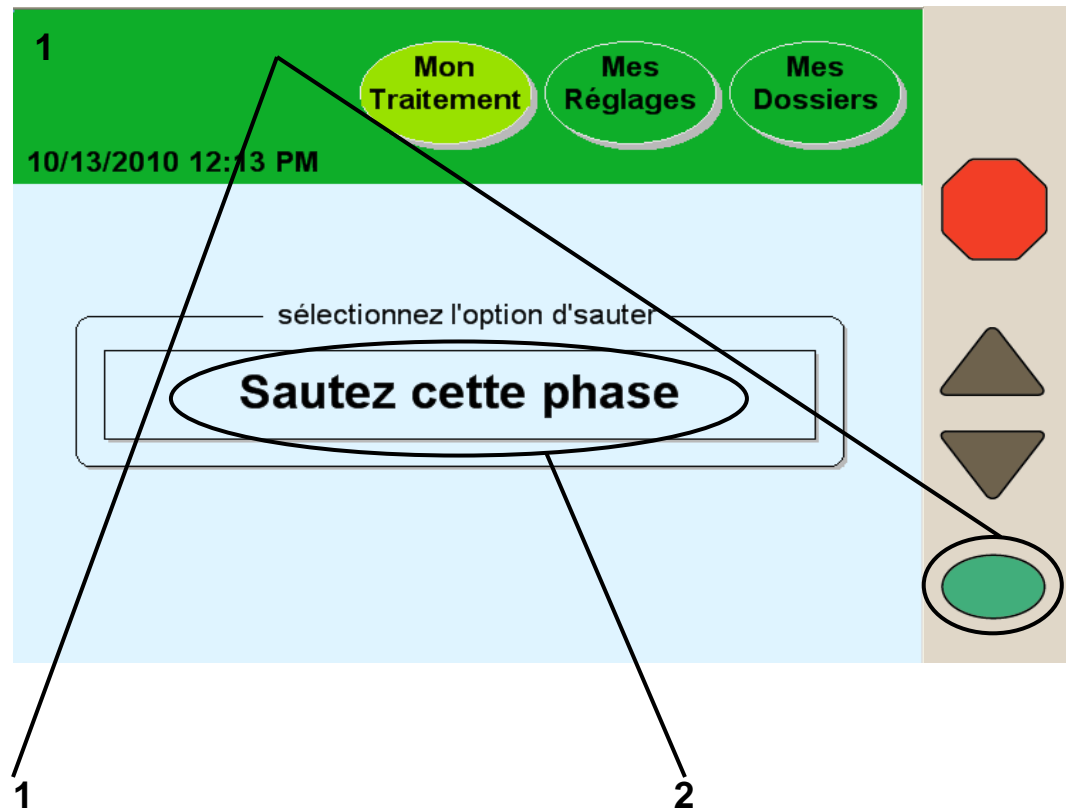
Un saut est la non-exécution d'un échange. Le cycleur ne vous permet pas de sauter une phase Drain après Drain 0 si il y a un danger de surcharge. Toutefois, Drain 0 peut être sauté à tout moment. Avant le saut, vous devez considérer qu'il y a trois scénarios possibles, dépendant de la prescription. Votre infirmière de dialyse et vous devez choisir la situation qui vous décrit le mieux :

1. *Il n'y a pas de dernière perfusion programmée* et il y a donc un « jour sec » ou un très faible reliquat de liquide dans l'abdomen. Le cycleur tentera de drainer 70% de 50 mL (35 mL) de liquide avant de passer à Perf. 1. Vous pouvez sauter Drain 1 en toute sécurité à ce moment-là.
2. *Vous procédez à un ou plusieurs échanges manuels diurnes que vous n'avez pas programmés dans votre cycleur (allez à la page 108).* Dans ce cas, votre cycleur ignore que vous avez du liquide supplémentaire dans l'abdomen et vous ne devez SURTOUT PAS sauter Drain 0. Attendez que le cycleur ait terminé de vous drainer avant de continuer avec Perf. 1.
3. *Vous avez une dernière perfusion programmée.* Durant Drain 0, le cycleur essaiera de drainer au moins 70% du volume de la dernière perfusion. Il se peut que le cycleur ne puisse pas drainer tout le liquide parce que votre corps en aura réabsorbé une partie. Si vous recevez des alarmes, consultez l'infirmière de dialyse pour décider si vous devez ou non sauter cette phase.

Il est important de comprendre les dangers de la surcharge de liquide. Il se produit une surcharge ou un volume intra-péritonéal accru (VIPA) dans la cavité abdominale quand la quantité de liquide y est supérieure au volume de perfusion prescrit : un VIPA peut se traduire par des lésions graves, voire mortelles, du fait des troubles suivants : hernies de la paroi abdominale et/ou du diaphragme, hydrothorax, insuffisance cardiaque, hypertension aiguë, œdème pulmonaire, diminution de la fonction pulmonaire et épanchement péricardique.

Patients et soignants doivent surveiller les signes potentiels de VIPA. Ces signes comprennent : difficulté à respirer; vomissements ou expectorations; sensations de plénitude, de distension ou de surcharge après le traitement; douleur ou gêne abdominale; abdomen dilaté ou tendu; gonflement localisé autour de la région génitale, du nombril ou sillon au cathéter de dialyse ou au site de sortie du cathéter; fuite de liquide au site de sortie du cathéter de dialyse; et augmentation inattendue de la tension artérielle. Contactez votre médecin ou l'infirmière de dialyse si l'un quelconque de ces symptômes apparaît.

Saut d'échange (suite)



Remarque : Si vous atteignez accidentellement cet écran, mais ne voulez pas sauter la phase en cours, attendez quelques secondes pour revenir à l'écran précédent.

1 Appuyez sur **OK** pendant quatre secondes

Vous devez éviter d'annuler (ou de sauter) toute phase de votre traitement, à moins que vous n'ayez discuté avec votre médecin ou l'infirmière de dialyse des situations pouvant le nécessiter.

Si vous avez besoin de sauter une phase de drainage, de perfusion ou de contact, appuyez sur le bouton **OK** pendant quatre secondes, pour afficher le message « Sautez cette phase ».

2 Appuyez sur **Sautez cette phase**

Appuyez sur le bouton **Sautez cette phase** pour sauter la phase en court et passer à l'échange suivant.

Si votre cycleur calcule qu'il y a encore trop de liquide dans votre abdomen, un saut est impossible. Le cycleur affiche alors un message clignotant « Saut d'échange interdit », puis revient à l'écran précédent. Vous devez attendre que le cycleur draine plus de liquide de l'abdomen avant d'essayer un nouveau saut.



Avertissement : Si vous ressentez une douloureuse montée de pression durant la perfusion ou un des signes de la page 158, arrêtez le cycleur immédiatement en appuyant sur la touche **STOP** et appelez l'infirmière de dialyse ou votre médecin. Une perfusion excessive peut causer des lésions graves, voire mortelles.

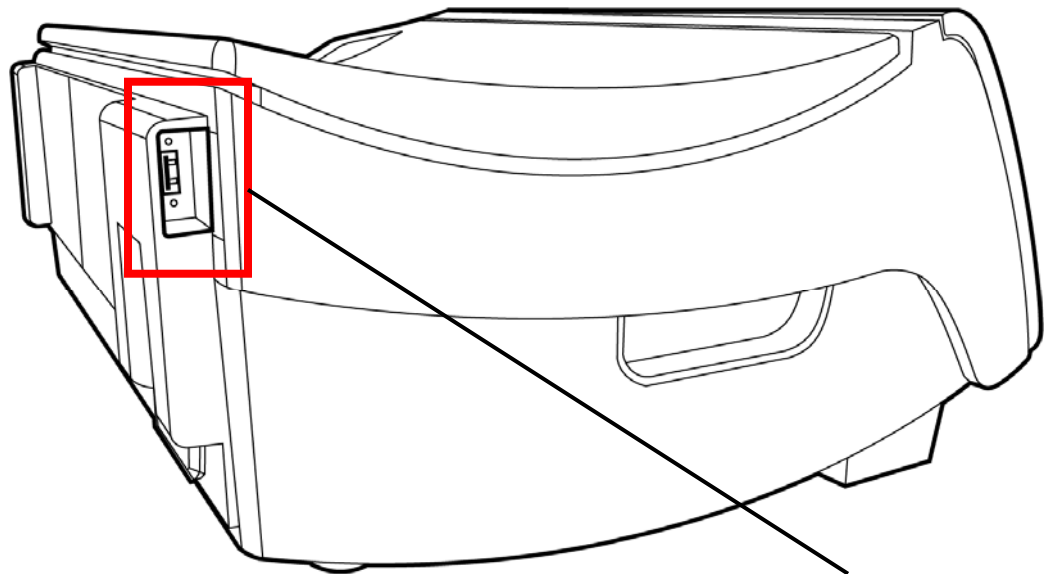
Avertissement : Ne sautez pas Drain 0 si vous avez programmé une dernière perfusion ou si vous arrêtez le cycleur après la perfusion. Ne sautez pas non plus Perf 1 si vous avez programmé une pause. Vous devez vous assurer que vous avez drainé suffisamment de liquide de votre abdomen avant de sauter Drain 0. Sinon, il pourrait se produire une surcharge de liquide. Une telle surcharge peut causer des lésions graves, voire mortelles.

Avertissement : Si vous ne programmez pas un échange manuel diurne dans votre cycleur Liberty, le cycleur ignorera que vous avez du liquide supplémentaire dans votre abdomen. NE sautez PAS Drain 0. Votre cycleur Liberty passe à Perf 1 quand le drainage est terminé.




Remarque : En cas de saut durant une perfusion ou un contact, vous ne recevrez pas la quantité de dialysat prescrit ou vous n'aurez pas autant de temps pour filtrer les déchets. Votre traitement ne sera pas aussi efficace. La lettre « B » sera affichée à côté des détails du traitement à l'écran « Mes Dossiers » pour montrer qu'un saut a eu lieu. Pour plus de renseignements, allez à « Détails de traitement », page 150.

Utilisation de l'unité IQdrive



USB Port

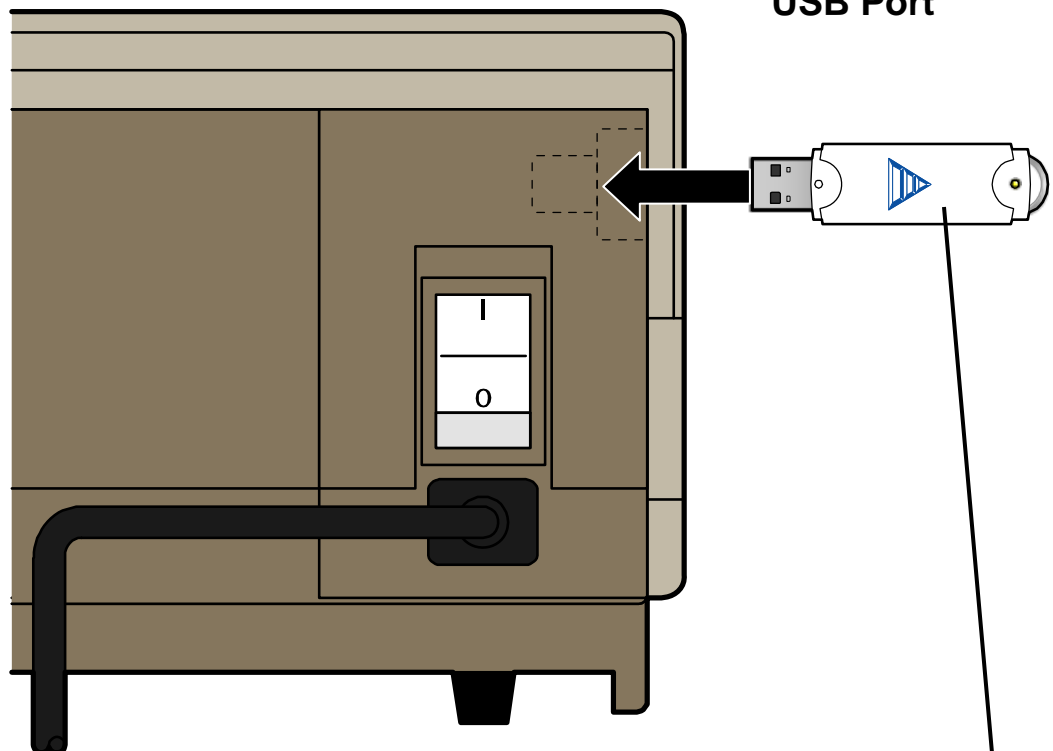

Vue de l'arrière du cycleur

**Unité
IQdrive**

Description de l'unité IQdrive

L'unité IQdrive est une petite mémoire utilisée pour charger les données de prescription et de traitement. L'option « USB activé » doit être réglée sur OUI pour permettre l'accès à l'unité (allez à page 80). Le personnel de soins vous fournira une unité IQdrive (dans laquelle seront programmés les réglages de la thérapie) et vous expliquera comment l'utiliser pour la tenue des dossiers. L'unité IQdrive s'insère dans le port USB à l'arrière de l'appareil.



Mise en garde : Manipuler votre unité IQdrive avec précaution. Protégez-la contre l'humidité et la saleté en la mettant dans un sac en plastique pour l'apporter à votre fournisseur de soins de santé ou le rapporter. Ne laissez pas votre unité IQdrive dans une voiture chaude ou au fond d'un sac à main où elle peut être endommagée.

Mise en garde : Votre unité IQdrive ne doit être utilisée qu'avec votre cycleur Liberty. Ne l'utilisez pas pour enregistrer vos propres données d'une autre source (par exemple, les photos numériques de votre ordinateur). L'enregistrement de données personnelles dans votre unité IQdrive aura pour effet de corrompre les données de traitement et votre cycleur Liberty ne pourra plus enregistrer l'évolution de votre traitement sur l'unité : le personnel de soins devra alors effacer tout ce qui se trouve sur l'unité et la reformater.



Remarque : Si l'option « USB activé » est réglée sur OUI alors qu'il n'y a pas d'unité IQdrive dans le port USB du cycleur à la mise en marche, vous soit continuer sans utiliser l'unité IQdrive (en appuyant sur **OK**) soit insérer immédiatement l'unité IQdrive.

Insertion de l'unité IQdrive

Insérez l'extrémité métallique rectangulaire de l'unité IQdrive dans la fente (port USB), dans le coin gauche arrière du cycleur (image à gauche). Le petit voyant à l'extrémité de l'unité IQdrive est dirigé vers l'arrière de l'appareil. L'unité IQdrive est structurée de manière à ne s'insérer que dans un sens. Si l'unité n'entre pas, retournez-la et essayez encore.



Remarque : Si le cycleur affiche le message, « IQdrive non détectée », sortez l'unité IQdrive, réinsérez-la à fond et essayez de nouveau.

(page suivante)

Téléchargement USB

Téléchargement USB

Mon Traitement Mes Réglages Mes Dossiers

5/9/2008 1:46 PM

Programmez le cycleur avec les nouveaux réglages du IQdrive?

thérapie	volume total	durée sommeil	Acceptez
DP+	8500 mL	3 h 42 min	
# perfusions	vol. perfusion		
5	2000 mL		
# pauses	vol. de pause	durée contact	
2	2000 mL	1 h 4 min	
	dernier vol.		Refusez
	500 mL		Réglages courants

choisissez une option



Remarque : Les valeurs montrées ne sont que des exemples. Vous devez utiliser les valeurs prescrites par votre médecin.

(suite)

Téléchargement USB

Cet écran s'affiche la première fois que vous insérez l'unité IQdrive et que vous lancez le cycleur. Il s'affiche aussi si l'infirmière de dialyse a changé votre prescription sur l'unité IQdrive.

La zone principale de l'écran « Téléchargement USB » affiche les réglages de thérapie à télécharger dans le cycleur. Vous devez les réviser avec soin pour vous assurer qu'ils correspondent à la prescription du médecin.



Avertissement : Votre médecin doit vous prescrire tout le traitement. Si vous utilisez des valeurs incorrectes, vous risquez des complications graves.

Le côté droit de l'écran comporte trois boutons :

- **Acceptez** — Appuyez sur ce bouton pour utiliser les nouveaux réglages de thérapie dans l'unité IQdrive.
- **Refusez** — Appuyez sur ce bouton si les réglages de l'unité IQdrive sont incorrects. Vous utiliserez alors les réglages de thérapie en mémoire dans le cycleur.
- **Réglages courants** — Appuyez sur ce bouton pour afficher les réglages courants. Vous pouvez ensuite appuyer sur le bouton Réglages IQdrive pour retourner à l'écran « Téléchargement USB ».

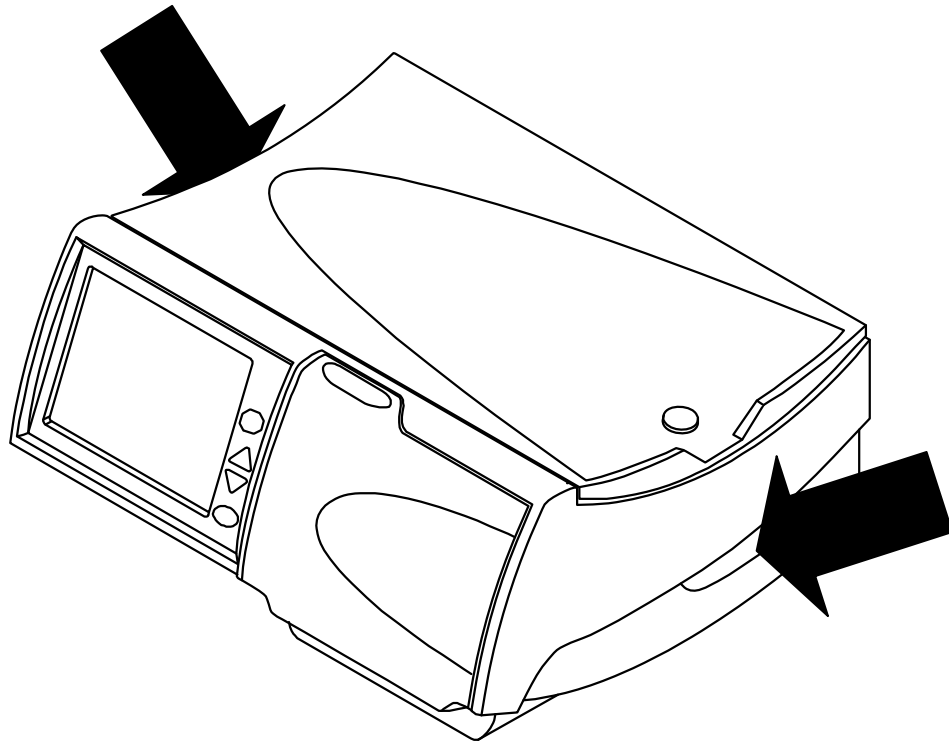
Après avoir choisi **Acceptez** ou **Refusez**, vous passez à l'écran « Prêt » comme d'ordinaire. Allez à la page 46 pour continuer d'entrer les valeurs de votre traitement ou, si ces valeurs sont déjà entrées, allez à la page 86 pour commencer votre traitement.



Remarque : N'enlevez pas l'unité IQdrive tant que le traitement n'est pas terminé. Si vous l'enlevez trop tôt, vous ne pourrez pas y enregistrer vos données. Vous pouvez laisser l'unité IQdrive insérée dans le cycleur jusqu'à ce que le personnel de soins vous demande de la lui rapporter.

Remarque : Si vous décidez de refuser la prescription de l'unité IQdrive, vous devrez la refuser à chaque traitement, jusqu'à ce que vous insériez une unité IQdrive comportant une prescription mise à jour. Contactez l'infirmière de dialyse si vous avez besoin de mettre à jour la prescription de votre unité IQdrive.

Déplacement de votre cycleur Liberty



Déplacement du cycleur Liberty

Votre cycleur Liberty est portable, ce qui vous permet de continuer facilement votre traitement en voyage.

Débranchez le cordon d'alimentation de votre cycleur avant de le déplacer. Saisissez le cycleur par les poignées qui se trouvent de chaque côté pour le soulever.



Avertissement : Utilisez une technique appropriée : soulevez le cycleur en pliant les genoux et en gardant le dos droit.



Mise en garde : Ne soulevez pas l'appareil par le plateau. Vous pourriez endommager la balance.



Mise en garde : Si vous utilisez le chariot Liberty, veillez à l'équilibrer correctement en suspendant les sacs de solution des deux côtés. Une mauvaise répartition des sacs peut faire basculer le chariot et endommager l'appareil. N'oubliez pas de desserrer le frein pour déplacer le chariot et de le resserrer quand le chariot est stationnaire.

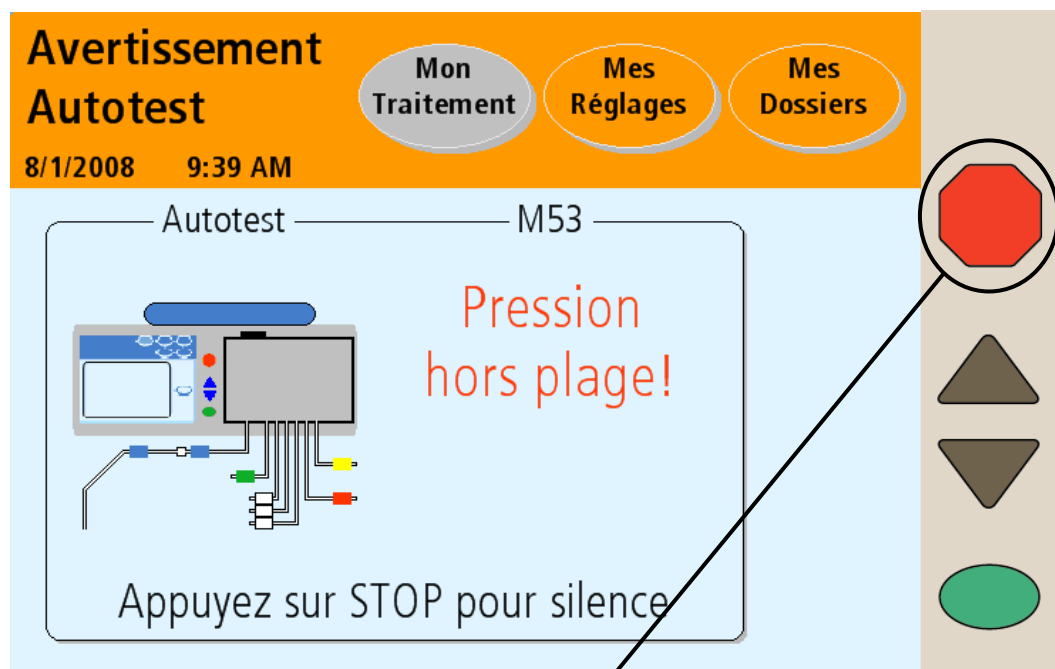


Remarque : Si vous partez en voyage, il est recommandé d'emballer le cycleur dans sa boîte d'expédition et de réutilisez les matériaux d'emballage originaux pour le protéger.

Page laissée intentionnellement vide

Alarmes et dépannage

Avertissements et alarmes



Appuyez sur la touche STOP pour couper le signal sonore

Aperçu des avertissements et des alarmes

Le cycleur Liberty est doté d'un système élaboré de fonctions de sécurité. Des capteurs électroniques et un logiciel de diagnostic surveillent en permanence le fonctionnement de l'appareil. La détection d'un problème, réel ou potentiel, est indiquée par un message dans la barre d'état et, dans certains cas, par un signal sonore.



Avertissement : Avertissements et alarmes requièrent une attention immédiate, car les négliger peut se traduire par des complications graves.

Avertissements

Un avertissement s'accompagne d'un changement de couleur de la barre d'état, qui tourne à l'orange, et le déclenchement d'un signal sonore. Appuyez sur la touche **STOP** pour couper le son. Pour certains avertissements, le fait d'appuyer sur la touche **OK** relance le test et peut résoudre la situation à l'origine de l'alarme. Le cas échéant, un bouton **Aide** apparaît dans la zone des boutons (allez à « Avertissement : Bouton Aide », page 174). Vous avez alors la possibilité de corriger le problème en suivant les instructions de l'écran. Une fois le problème corrigé, vous pouvez reprendre le traitement. Il y a dix types d'avertissements différents :

Arrêté Avertissement

Vous avez arrêté une fonction plus de dix minutes. Vous devez appuyer sur la touche **STOP** pour couper le son, puis sur la touche **OK** pour continuer au besoin.

Autotest Avertissement

Un autotest a échoué, mais peut être recommencé.

Balance Avertissement

Les indications de la balance sont erronées ou il y a discordance entre le volume pompé et le changement indiqué par la balance.

Capteur Avertissement

Les indications de capteurs sont erronées.

Capteur du pat. Avertissement

Les indications du capteur du patient sont incorrectes ou hors plage.

(suite)

Avertissements et alarmes (suite)

Alarme Réchaud

8/1/2008 2:09 PM

Mon Traitement Mes Réglages Mes Dossiers

Réchaud

M69

Température de la solution élevée!

Appuyez sur STOP pour silence

Code d'erreur

(suite)

Interrupteur Avertissement

Les indications des interrupteurs de volet ou de cassette sont incorrectes.

Pneumatique Avertissement

Les indications du capteur pneumatique sont incorrectes ou hors plage.

Réchauffeur Avertissement

Les indications de température du réchaud sont trop hautes ou trop basses.

Système Avertissement

Une erreur s'est produite dans le système.

Traitement Avertissement

Il s'est produit une erreur corrigible concernant le traitement.

Alarmes

Une alarme s'accompagne d'un changement de couleur de la barre d'état, qui tourne au rouge vif et le déclenchement d'un signal sonore. Appuyez sur la touche **STOP** pour couper le son. Prenez note du code d'erreur et appelez un technicien qualifié. Voici des exemples d'alarmes :

Pile RAM Alarme

Votre cycleur ne parvient pas à accéder à la pile RAM.

CRC Alarme

Il s'est produit une erreur critique du logiciel.

EEPROM Alarme

Il s'est produit une erreur critique de carte de circuit.

Autotest Alarme

Un autotest a échoué après des tentatives répétées.

Erreur système

Il s'est produit une erreur critique de système.

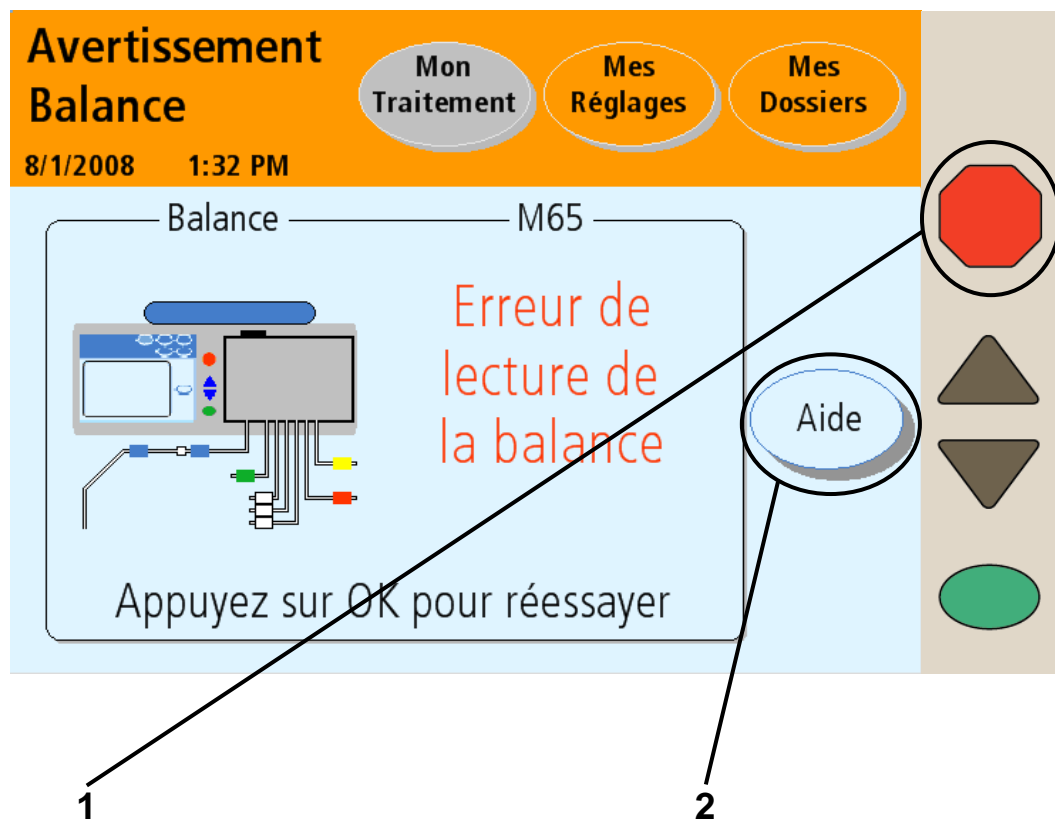
Traitement Alarme

Un avertissement relatif au traitement n'a pu être corrigé.

Surveillance Alarme

Il s'est produit une erreur critique de logiciel.

Avertissement : Bouton Aide



1 Appuyez sur la touche **STOP**

Appuyez sur la touche **STOP** pour couper le signal sonore d'avertissement ou d'alarme. S'il est accessible, un bouton **Aide** apparaît dans la zone des boutons.

2 Appuyez sur le bouton **Aide**

Lors d'un avertissement, l'appareil peut afficher un bouton **Aide** pour vous aider à résoudre le problème. Si vous avez besoin de plus de renseignements, appuyez sur le bouton **Aide**.

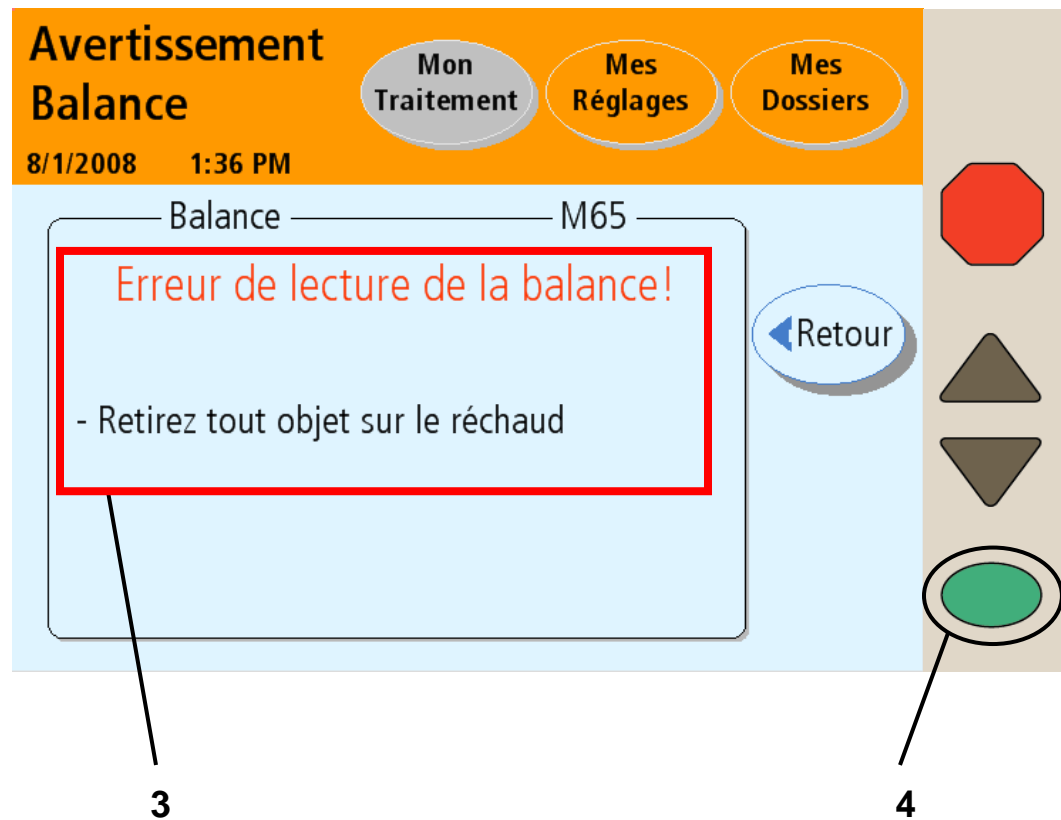
L'affichage d'un message d'avertissement est déclenché par un problème ou un événement qui se produit durant le fonctionnement de l'appareil. Une situation d'avertissement arrête la fonction en cours d'exécution. Les messages s'effacent lorsque le problème est corrigé. Dans certains cas, vous devez les effacer vous-même.



Remarque : Durant une alarme ou un avertissement, les boutons écrans de la barre d'état sont inaccessibles.

Remarque : Pour plus de renseignements sur la correction des alarmes, allez à « Dépannage », page 180.

Avertissement : Écrans d'aide



3 Suivez les instructions

Votre appareil affiche des instructions précises pour chaque avertissement. Conformez-vous aux instructions pour corriger la situation. Si vous ne parvenez pas à faire disparaître l'avertissement en suivant les instructions à l'écran et dans le présent guide de l'utilisateur, mettez l'appareil hors service et appelez le service technique.

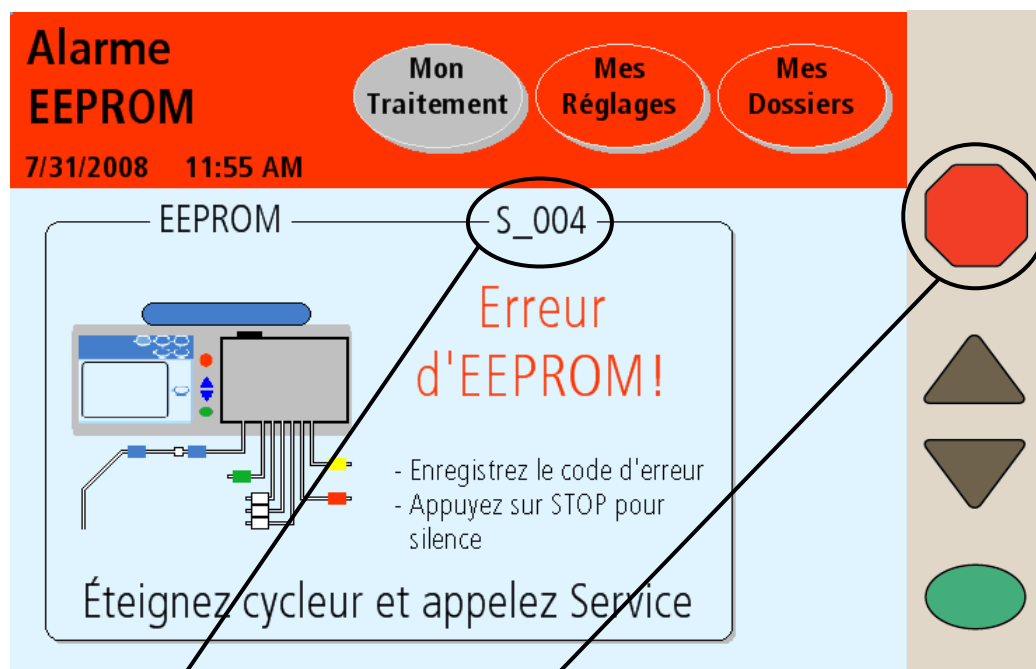


Avertissement : Ne continuez le traitement qu'après avoir corrigé la situation qui a déclenché l'avertissement.

4 Appuyez sur **OK**

Une fois la situation d'avertissement corrigée, appuyez sur **OK** (ou sur **Retour**, puis sur **OK**) pour relancer la fonction. Vous revenez à l'étape précédant le déclenchement de l'avertissement.


Alarme : Barre d'état rouge



Enregistrer le code d'erreur

Appuyez sur STOP pour rétablir le silence

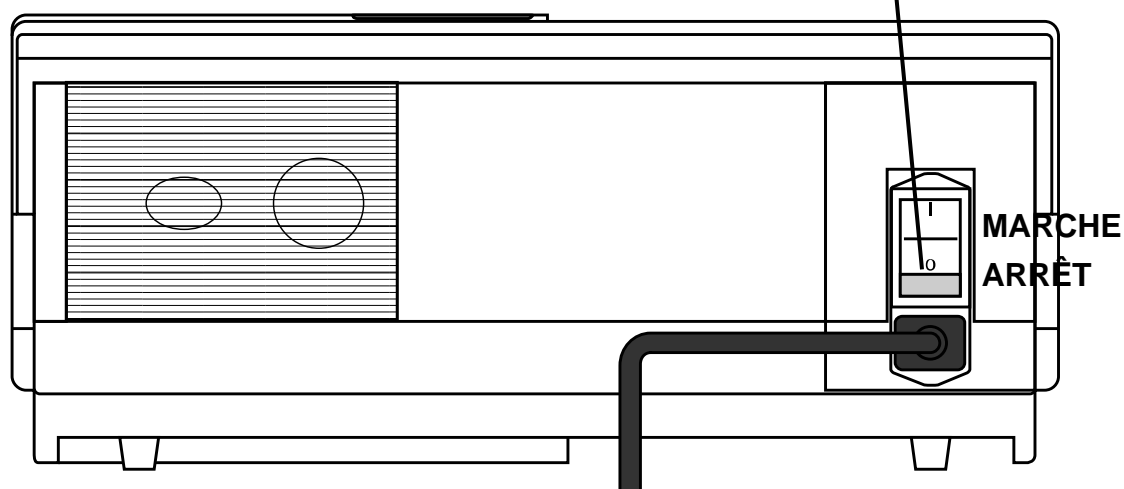Coupez l'alimentation




Alarmes

En cas d'alarme, la barre d'état tourne au rouge vif. Les alarmes ne peuvent être arrêtées. Notez le code d'erreur (situé à droite, immédiatement sous la barre d'état) et arrêtez l'appareil au commutateur d'alimentation, à l'arrière. Appelez le service technique au numéro (800) 227-2572.



Avertissement : Si une alarme se déclenche, ne tentez pas d'utiliser l'appareil pour votre traitement.

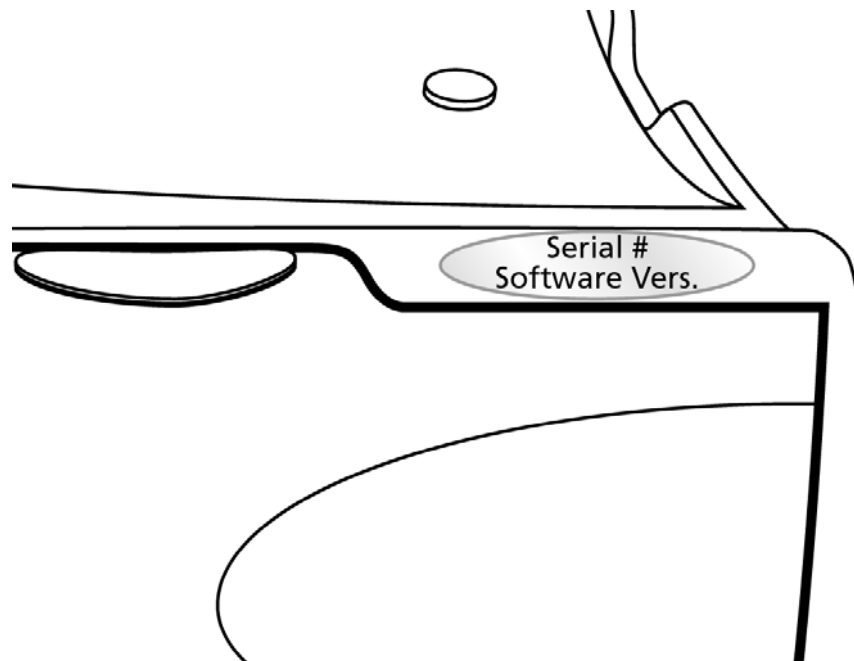On vous demandera aussi le numéro de série (Serial #) de votre cycleur Liberty et la version du logiciel (Software Vers.), qui se trouve sur le haut du cycleur, au-dessus du porte de cassette.



Dépannage

La section du dépannage est un guide destiné à vous aider à diagnostiquer rapidement les alarmes et les messages. Ces messages sont causés par des conditions et des événements qui se produisent dans votre appareil durant le fonctionnement. Ils sont effacés lorsque la situation à l'origine de l'alarme est corrigée. Certaines conditions peuvent être corrigées simplement en suivant les instructions à l'écran et en appuyant sur la touche **OK**. Dans certains cas, vous devez corriger les erreurs vous-même. Vous ne pouvez pas corriger les alarmes pour lesquelles la barre d'état tourne au rouge vif et vous devez contacter le service technique.



Avertissement : Le fait de suivre les instructions n'annule pas nécessairement l'alarme ou l'avertissement. Ne continuez le traitement que si problème à l'origine des messages a été corrigé et les messages effacés.



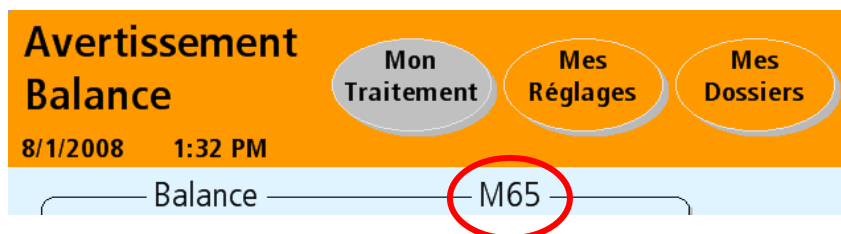
Remarque : Allez à la section « Avertissements généraux », page 16, pour d'autres avertissements.

Remarque : Quand le cycleur affiche le message « Appuyez sur la touche OK pour réessayer », réessayez trois (3) fois au moins avant d'appeler l'infirmière de dialyse ou le soutien technique.

Remarque : Les appareils mis hors service doivent être vérifiés et réparés par un technicien qualifié.

La signification des messages et la manière de résoudre les erreurs sont présentées dans deux tableaux. Le premier tableau (page 181) liste chaque code d'erreur et l'alarme et/ou le message correspondant. Le deuxième tableau (page 186) liste tous les messages en ordre alphabétique.

N'oubliez pas de prendre note du code d'erreur pour pouvoir identifier le message d'alarme. Si vous appelez le service technique, vous devrez lui fournir le code d'erreur. Celui-ci est indiqué sous le bouton **Mon Traitement**:



Messages d'erreur listés par code

Code	Message	Signification	Action requise
M19	Interrupteur Avertissement Interrupteur : Porte ou cassette non détectée!	Le cycleur ne détecte ni la présence d'une cassette ni une porte fermé.	Insérer la cassette et fermer la porte. Appuyez sur OK pour réessayer
M21	Capteur Avertissement : Lectures non valides des capteurs!	Lecture incorrecte d'un capteur.	Appuyez sur OK pour réessayer
M22	Autotest Alarme : Erreur à la pince de sûreté!	Trois échecs du test de pince de sécurité.	Enregistrez le code d'erreur. Insérez un obturateur. Clampez les tubulures. Débranchez-vous du cycleur. Éteignez le cycleur et appelez le Service.
M30	Autotest Avertissement : Fuite de la soupape à ballonnet!	Échec de l'autotest qui peut être dû à une fuite à la soupape à ballonnet durant l'installation.	Appuyez sur OK pour réessayer
M30.1	Alarme Pneumatique: Fuite de la soupape à ballonnet!	Échec de l'autotest qui peut être dû à une fuite à la soupape à ballonnet durant le traitement.	Enregistrez le code d'erreur. Insérez un obturateur. Clampez les tubulures. Débranchez-vous du cycleur. Éteignez le cycleur et appelez le Service.
M31	Traitement Avertissement : Air détecté dans la cassette!	Échec de l'autotest qui peut être dû à la détection d'air dans la cassette	Appuyez sur OK pour réessayer
M37	Autotest Avertissement : Tension du patient non constante!	Échec de l'autotest dû à un changement de la tension du patient.	Appuyez sur OK pour réessayer
M38	Traitement Alarme : Erreur de données de traitement!	Il s'est produit une erreur irréparable.	Enregistrez le code d'erreur. Insérez un obturateur. Clampez les tubulures. Débranchez-vous du cycleur. Éteignez le cycleur et appelez le Service.

Code	Message	Signification	Action requise
M39	Capteur du pat. Avertissement : Capteurs du patient contre les capteurs de vide!	Erreur de capteur du patient.	Appuyez sur OK pour réessayer
M41	Capteur du pat. Avertissement : Capteurs du patient trop élevés!	Erreur de capteur du patient.	Appuyez sur OK pour réessayer
M42	Capteur du pat. Avertissement : vide du patient trop poussée!	Erreur de capteur du patient.	Appuyez sur OK pour réessayer
M44	Traitement Alarme : Erreur de voie d'écoulement!	Il s'est produit une erreur irréparable.	Enregistrez le code d'erreur. Insérez un obturateur. Clampez les tubulures. Débranchez-vous du cycleur. Éteignez le cycleur et appelez le Service.
M53	Autotest Avertissement : Pression hors plage!	Échec de l'autotest dû à des pressions hors plage.	Appuyez sur OK pour réessayer
M54	Pneumatique Avertissement : Lecture de pression basse!	Lecture de pression pneumatique trop basse.	Appuyez sur OK pour réessayer
M55	Pneumatique Avertissement : Lecture de pression élevée!	Lecture de pression pneumatique trop élevée.	Appuyez sur OK pour réessayer
M56	Pneumatique Avertissement : Lecture de vide peu poussé!	Lecture de vide trop basse.	Appuyez sur OK pour réessayer
M57	Pneumatique Avertissement : Lecture de vide poussé!	Lecture de vide trop haute.	Appuyez sur OK pour réessayer
M58	Autotest Avertissement : Vide hors plage!	Échec de l'autotest dû à des pressions de vide hors plage.	Appuyez sur OK pour réessayer
M59	Autotest Avertissement : Fuite de pression!	Détection d'une fuite de pression; cycleur incapable de compenser.	Appuyez sur la OK pour essayer de nouveau.

Code	Message	Signification	Action requise
M60	Autotest Avertissement : Fuite de vide!	Échec de l'autotest qui peut être dû à une fuite de vide.	Appuyez sur OK pour réessayer
M61	Autotest Avertissement : Pression basse!	Échec de l'autotest dû à des pressions basses.	Appuyez sur OK pour réessayer
M62	Autotest Avertissement : Vide peu poussé!	Échec de l'autotest dû à un vide trop peu poussé.	Appuyez sur OK pour réessayer
M63	Autotest Avertissement : Retirez le sac réchaud du plateau chauffant	Détection par l'autotest de la présence inattendue d'un sac réchaud sur le plateau chauffant.	Appuyez sur OK pour réessayer
M65	Balance Avertissement : Erreur de lecture du balance	Changement inattendu de la balance durant le traitement.	Retirez tout autre matériau sur le chauffant. Appuyez sur OK pour réessayer
M66	Autotest Avertissement : Lecture de thermistance hors page!	Échec de l'autotest dû à des thermistors hors gamme.	Assurez-vous qu'il n'y a rien sur le plateau chauffant. Laissez le cycleur refroidir. Éloignez le cycleur de toute source de chaleur. Appuyez sur OK pour réessayer
M67	Autotest Alarme : Température de la solution hors page!	Échec du test de température de solution.	Enregistrez le code d'erreur. Insérez un obturateur. Clampez les tubulures. Débranchez-vous du cycleur. Éteignez le cycleur et appelez le Service.
M68	Réchauffeur Avertissement: Température du réchauffeur trop élevée!	Échec du test de température de solution dû à une température trop élevée.	Retirez tout objet du réchaud. Éloignez le cycleur de toute source de chaleur. Appuyez sur OK pour réessayer
M69	Réchauffeur Alarme: Température de la solution élevée!	Trois échecs du test de température de solution dus à une température trop élevée.	Enregistrez le code d'erreur. Insérez un obturateur Clampez les tubulures. Débranchez-vous du cycleur Éteignez le cycleur et appelez le Service

Code	Message	Signification	Action requise
M70	Réchauffeur Avertissement: Température de la solution basse!	Échec du test de température de solution dû à une température trop basse.	Les sacs froids prolongent le temps de chauffage; n'oubliez pas de ranger vos sacs à température ambiante. Vérifiez si le plateau chauffant est chaud au toucher. Recherchez des sources. de refroidissement extérieures. Assurez-vous qu'il n'y a pas de fenêtre ouverte, de courant d'air, de ventilateur ou de climatiseur en marche. Appuyez sur OK pour réessayer.
M71.1	Pneumatique Alarme : Fuite de pression!	Échec de l'autotest qui peut être dû à une fuite de pression.	Enregistrez le code d'erreur. Insérez un obturateur. Clampez les tubulures. Débranchez-vous du cycleur. Éteignez le cycleur et appelez le Service.
M71.2	Pneumatique Alarme : Fuite de pression!	Échec de l'autotest qui peut être dû à une fuite à la soupape à ballonnet.	Enregistrez le code d'erreur. Insérez un obturateur. Clampez les tubulures. Débranchez-vous du cycleur. Éteignez le cycleur et appelez le Service.
M71.3	Pneumatique Alarme : Fuite de pression!	Échec de l'autotest qui peut être dû à une fuite de vide.	Enregistrez le code d'erreur. Insérez un obturateur. Clampez les tubulures. Débranchez-vous du cycleur. Éteignez le cycleur et appelez le Service.
M74	Traitement Alarme : Erreur de démarrage du traitement!	Il s'est produit une erreur irréparable.	Enregistrez le code d'erreur. Insérez un obturateur. Clampez les tubulures. Débranchez-vous du cycleur. Éteignez le cycleur et appelez le Service.
M75	Traitement Avertissement : Erreur de volume!	Il n'y a pas de pompage, bien que les pompes soient en action.	Appuyez sur OK pour réessayer.

Code	Message	Signification	Action requise
M76	Traitement Alarme : Erreur dans la durée de pause!	Il s'est produit une erreur irréparable.	Enregistrez le code d'erreur. Insérez un obturateur. Clampez les tubulures. Débranchez-vous du cycleur. Éteignez le cycleur et appelez le Service.
M77	Traitement Avertissement : Erreur de l'encodeur!	Erreur de traitement.	Appuyez sur OK pour réessayer.
MWD	Surveillance Alarme : Erreur de l'horloge de surveillance!	Il s'est produit une erreur irréparable.	Enregistrez le code d'erreur. Insérez un obturateur Clampez les tubulures. Débranchez-vous du cycleur. Éteignez le cycleur et appelez le Service.
S_002	CRC Alarme : Erreur CRC!	CRC corrompu.	Enregistrez le code d'erreur. Insérez un obturateur. Clampez les tubulures. Débranchez-vous du cycleur. Éteignez le cycleur et appelez le Service.
S_003	Pile RAM Alarme : Erreur pile RAM!	Pile RAM corrompue.	Enregistrez le code d'erreur. Insérez un obturateur. Clampez les tubulures. Débranchez-vous du cycleur. Éteignez le cycleur et appelez le Service.
S_004	EEPROM Alarme : Erreur d'EEPROM!	Cycleur incapable de lire correctement la carte de mémoire EEPROM au démarrage.	Enregistrez le code d'erreur. Insérez un obturateur. Clampez les tubulures. Débranchez-vous du cycleur. Éteignez le cycleur et appelez le Service.
S_005	Erreur système	Il s'est produit une erreur irréparable.	Enregistrez le code d'erreur. Insérez un obturateur. Clampez les tubulures. Débranchez-vous du cycleur. Éteignez le cycleur et appelez le Service.
S_006	Système Avertissement : Avertissement Sur le système	Il s'est produit une erreur inattendue.	Appuyez sur OK pour réessayer.

Messages d'erreur en ordre alphabétique

Message	Signification	Action requise
Alarme Pneumatique: Fuite de la soupape à ballonnet!	Échec de l'autotest qui peut être dû à une fuite à la soupape à ballonnet durant le traitement.	Enregistrez le code d'erreur. Insérez un obturateur. Clampez les tubulures. Débranchez-vous du cycleur. Éteignez le cycleur et appelez le Service.
Appuyez sur OK pour débuter le perf...	La solution est froide (25°C/77°F). L'utilisateur doit décider s'il préfère attendre qu'elle atteigne la température fixée.	Pour commencer à remplir avec une solution froide, appuyez sur OK ; sinon, attendez jusqu'à ce que la température de la solution atteigne la valeur fixée pour continuer. Lorsque la température atteint la valeur fixée, la perfusion commence automatiquement.
Attendez que la solution réchauffe...	La phase de drainage est terminée, mais la température du sac de solution sur le réchaud est toujours inférieure à 25° C. Le cycleur ne permettra pas de lancer la perfusion tant que la température n'aura pas atteint 33° C.	Laissez la température augmenter dans le sac sur le réchaud. Si le message est souvent affiché, vérifiez les sources de froid extérieures. Assurez-vous qu'il n'y a pas de fenêtre ouverte et qu'il n'y a pas de courant d'air, de ventilateur ni de climatiseur qui soufflent en direction du cycleur.
Attendez que la solution refroidisse...	La phase de drainage est terminée, mais la température du sac de solution sur le réchaud est supérieure à 38° C. Le cycleur ne permettra pas de lancer la perfusion tant que la température ne sera pas inférieure à 38° C.	Laissez la température baisser dans le sac sur le réchaud. Si le message est souvent affiché, vérifiez les sources de chaleur extérieures et assurez-vous que la température ambiante est inférieure à 38° C (100° F).

Message	Signification	Action requise
Autotest Alarme : Erreur à la pince de sûreté!	Trois échecs du test de pince de sécurité.	Enregistrez le code d'erreur. Insérez un obturateur. Clampez les tubulures. Débranchez-vous du cycleur. Éteignez le cycleur et appelez le Service.
Autotest Alarme : Température de la solution hors plage!	Échec du test de température de solution.	Enregistrez le code d'erreur. Insérez un obturateur. Clampez les tubulures. Débranchez-vous du cycleur. Éteignez le cycleur et appelez le Service.
Autotest Avertissement : Fuite de la soupape à ballonnet!	Échec de l'autotest qui peut être dû à une fuite à la soupape à ballonnet durant l'installation.	Appuyez sur OK pour réessayer
Autotest Avertissement : Fuite de pression!	Détection d'une fuite de pression; cycleur incapable de compenser.	Appuyez sur la OK pour essayer de nouveau.
Autotest Avertissement : Fuite de vide!	Échec de l'autotest qui peut être dû à une fuite de vide.	Appuyez sur OK pour réessayer
Autotest Avertissement : Lecture de thermistance hors plage!	Échec de l'autotest dû à des thermistors hors gamme.	Assurez-vous qu'il n'y a rien sur le plateau chauffant. Laissez le cycleur refroidir. Éloignez le cycleur de toute source de chaleur. Appuyez sur OK pour réessayer
Autotest Avertissement : Pression basse!	Échec de l'autotest dû à des pressions basses.	Appuyez sur OK pour réessayer
Autotest Avertissement : Pression hors plage!	Échec de l'autotest dû à des pressions hors plage.	Appuyez sur OK pour réessayer
Autotest Avertissement : Retirez le sac réchaud du plateau chauffant	Détection par l'autotest de la présence inattendue d'un sac réchaud sur le plateau chauffant.	Appuyez sur OK pour réessayer

Message	Signification	Action requise
Autotest Avertissement : Tension du patient non constante!	Échec de l'autotest dû à un changement de la tension du patient.	Appuyez sur OK pour réessayer
Autotest Avertissement : Vide hors plage!	Échec de l'autotest dû à des pressions de vide hors plage.	Appuyez sur OK pour réessayer
Autotest Avertissement : Vide peu poussé!	Échec de l'autotest dû à un vide trop peu poussé.	Appuyez sur OK pour réessayer
Balance Avertissement : Erreur de lecture du balance	Changement inattendu de la balance durant le traitement.	Retirez tout autre matériau sur le chauffant. Appuyez sur OK pour réessayer
Capteur Avertissement : Lectures non valides des capteurs!	Lecture incorrecte d'un capteur.	Appuyez sur OK pour réessayer
Capteur du pat. Avertissement : Capteurs du patient contre les capteurs de vide!	Erreur de capteur du patient.	Appuyez sur OK pour réessayer
Capteur du pat. Avertissement : Capteurs du patient trop élevés!	Erreur de capteur du patient.	Appuyez sur OK pour réessayer
Capteur du pat. Avertissement : vide du patient trop poussée!	Erreur de capteur du patient.	Appuyez sur OK pour réessayer
CRC Alarme : Erreur CRC!	CRC corrompu.	Enregistrez le code d'erreur. Insérez un obturateur. Clampez les tubulures. Débranchez-vous du cycleur. Éteignez le cycleur et appelez le Service.

Message	Signification	Action requise
Difficulté de drainage. Vérifiez les tubulures patient et de drainage.	Le cycleur s'assure à mi-cycle de drainage que vous avez perdu 35% au moins du volume attendu de drainage. Sinon, le cycleur émet une tonalité pour vous avertir du taux de drainage bas. Si à la fin du drainage vous n'avez toujours pas drainé 70% au moins de votre volume de perfusion antérieur, le cycleur vous alertera de nouveau de la présence d'une complication de drainage.	Vérifiez que la tubulure de drainage (pince jaune) n'est pas pliée, tordue ou pincée. Assurez-vous que la tubulure de patient bleue n'est pas pliée et que la pince est ouverte. Recherchez la présence de fibrine ou de caillots dans la tubulure de drainage. S'il y en a, demandez des instructions à l'infirmière de dialyse. Changez de position pour déplacer le liquide dans votre abdomen. Assurez-vous que la tubulure de drainage est correctement placée dans un récepteur de drain de toilette, évier ou de baignoire. Vérifiez la position des sacs de drainage et assurez-vous qu'ils sont à plat et ne sont pas empilés. Êtes-vous constipé? Dans ce cas, contactez l'infirmière de dialyse pour des instructions sur ce qu'il convient de faire. Assurez-vous que votre rallonge/cathéter est immobilisée correctement.
Difficulté de perfusion. Vérifiez la tubulure du réchauffeur, la tubulures patient et de drainage	Votre cycleur a de la difficulté à pomper du dialysat dans la cavité.	Vérifiez que la tubulure du sac du réchaud (pince rouge) est correctement branchée, que les pinces sont ouvertes et que la tubulure n'est pas pliée. Assurez-vous que le sac du réchaud est correctement placé sur le plateau (allez à la page 94). Vérifiez que la tubulure de patient bleue est correctement branchée, que les pinces sont ouvertes et que la tubulure n'est pas pliée. Assurez-vous que la tubulure de drain (pince jaune) est correctement branchée, que les pinces sont ouvertes et que la tubulure n'est pas pliée. Appuyez sur OK pour réessayer.
EEPROM Alarme : Erreur d'EEPROM!	Cycleur incapable de lire correctement la carte de mémoire EEPROM au démarrage.	Enregistrez le code d'erreur. Insérez un obturateur. Clampez les tubulures. Débranchez-vous du cycleur. Éteignez le cycleur et appelez le Service.


Message	Signification	Action requise
Erreur du port du IQdrive	Le cycleur ne peut pas accéder à l'unité IQdrive.	Éteignez le cycleur, attendez 10 secondes et rétablissez le courant. Si le message est toujours là, appelez le Service.
Erreur système	Il s'est produit une erreur irréparable.	Enregistrez le code d'erreur. Insérez un obturateur. Clampez les tubulures. Débranchez-vous du cycleur. Éteignez le cycleur et appelez le Service.
Interrupteur Avertissement Interrupteur : Porte ou cassette non détectée!	Le cycleur ne détecte ni la présence d'une cassette ni une porte fermée.	Insérer la cassette et fermer la porte. Appuyez sur OK pour réessayer
IQdrive non détecté	L'unité IQdrive n'est pas en place ou est mal insérée.	Sortez l'unité IQdrive et réinsérez-la pour essayer de nouveau. Ou encore appuyez sur OK pour ignorer le message et continuer sans utiliser l'unité IQdrive.
La tubulure de drainage est bloquée. Vérifiez la tubulure de drainage.	Votre cycleur a du mal à pomper le dialysat usagé dans le drain.	Assurez-vous que la tubulure de drainage (pince jaune) est correctement branchée, que les pinces sont ouvertes et que la tubulure n'est pas pliée. Appuyez sur OK pour réessayer.
La tubulure patient est bloquée. Vérifiez la tubulure patient	Le cycleur a du mal à injecter le dialysat dans votre corps.	Assurez-vous que la tubulure à pince bleue du patient est correctement branchée, que la pince est ouverte et que la tubulure n'est pas pliée. Appuyez sur OK pour réessayer.
Les tubulures des sacs de solution sont bloquées. Vérifiez les tubulures des sacs de solution.	Le cycleur a du mal à extraire la solution des sacs de solution.	Assurez-vous que les tubulures de solution (pinces blanche et verte) sont correctement branchées, que les pinces sont ouvertes et que les tubulures ne sont pas pliées. Vérifiez que les cônes sont tous brisés. Assurez-vous que les sacs ne sont pas vides. Appuyez sur OK pour réessayer.
N'insérez pas la cassette. Fermez la porte de la cassette.	La cassette est insérée dans le cycleur alors que le traitement n'a pas commencé. Ou la porte de la cassette est ouvert alors qu'il devrait être fermé.	Si la cassette est insérée dans le cycleur, sortez-la et fermez la porte de cassette. Assurez-vous que la porte est bien fermée. Appuyez sur OK pour réessayer.

Message	Signification	Action requise
Pile RAM Alarme : Erreur pile RAM!	Pile RAM corrompue.	Enregistrez le code d'erreur. Insérez un obturateur. Clampez les tubulures. Débranchez-vous du cycleur. Éteignez le cycleur et appelez le Service.
Pneumatique Alarme : Fuite de pression!	Échec de l'autotest qui peut être dû à une fuite de pression.	Enregistrez le code d'erreur. Insérez un obturateur. Clampez les tubulures. Débranchez-vous du cycleur. Éteignez le cycleur et appelez le Service.
Pneumatique Alarme : Fuite de pression!	Échec de l'autotest qui peut être dû à une fuite à la soupape à ballonnet.	Enregistrez le code d'erreur. Insérez un obturateur. Clampez les tubulures. Débranchez-vous du cycleur. Éteignez le cycleur et appelez le Service.
Pneumatique Alarme : Fuite de pression!	Échec de l'autotest qui peut être dû à une fuite de vide.	Enregistrez le code d'erreur. Insérez un obturateur. Clampez les tubulures. Débranchez-vous du cycleur. Éteignez le cycleur et appelez le Service.
Pneumatique Avertissement : Lecture de pression basse!	Lecture de pression pneumatique trop basse.	Appuyez sur OK pour réessayer
Pneumatique Avertissement : Lecture de pression élevée!	Lecture de pression pneumatique trop élevée.	Appuyez sur OK pour réessayer
Pneumatique Avertissement : Lecture de vide peu poussé!	Lecture de vide trop basse.	Appuyez sur OK pour réessayer
Pneumatique Avertissement : Lecture de vide poussé!	Lecture de vide trop haute.	Appuyez sur OK pour réessayer

Message	Signification	Action requise
Réchauffeur Alarme: Température de la solution élevée!	Trois échecs du test de température de solution dus à une température trop élevée.	Enregistrez le code d'erreur. Insérez un obturateur Clampez les tubulures. Débranchez-vous du cycleur Éteignez le cycleur et appelez le Service
Réchauffeur Avertissement: Température de la solution basse!	Échec du test de température de solution dû à une température trop basse.	Les sacs froids prolongent le temps de chauffage; n'oubliez pas de ranger vos sacs à température ambiante. Vérifiez si le plateau chauffant est chaud au toucher. Recherchez des sources. de refroidissement extérieures. Assurez- vous qu'il n'y a pas de fenêtre ouverte, de courant d'air, de ventilateur ou de climatiseur en marche. Appuyez sur OK pour réessayer.
Réchauffeur Avertissement: Température du réchauffeur trop élevée!	Échec du test de température de solution dû à une température trop élevée.	Retirez tout objet du réchaud. Éloignez le cycleur de toute source de chaleur. Appuyez sur OK pour réessayer
Sauter cette phase est pas permis en ce moment	L'utilisateur a tenté de sauter l'échange en cours	Aucune n'est requise. Vous ne pouvez pas sauter un échange pendant que le sac du réchaud se remplit. Si le cycleur détecte une situation potentielle de surcharge (150% = perfusion suivante + quantité non drainée des perfusions précédentes), le saut est interdit et l'appareil continue de tenter de drainer le liquide jusqu'à ce que le passage à la perfusion suivant soit sans danger.
Surveillance Alarme : Erreur de l'horloge de surveillance!	Il s'est produit une erreur irréparable.	Enregistrez le code d'erreur. Insérez un obturateur Clampez les tubulures. Débranchez-vous du cycleur. Éteignez le cycleur et appelez le Service.
Système Avertissement : Avertissement Sur le système	Il s'est produit une erreur inattendue.	Appuyez sur OK pour réessayer.

Message	Signification	Action requise
Traitement Alarme : Erreur dans la durée de pause!	Il s'est produit une erreur irréparable.	Enregistrez le code d'erreur. Insérez un obturateur. Clampez les tubulures. Débranchez-vous du cycleur. Éteignez le cycleur et appelez le Service.
Traitement Alarme : Erreur de démarrage du traitement!	Il s'est produit une erreur irréparable.	Enregistrez le code d'erreur. Insérez un obturateur. Clampez les tubulures. Débranchez-vous du cycleur. Éteignez le cycleur et appelez le Service.
Traitement Alarme : Erreur de données de traitement!	Il s'est produit une erreur irréparable.	Enregistrez le code d'erreur. Insérez un obturateur. Clampez les tubulures. Débranchez-vous du cycleur. Éteignez le cycleur et appelez le Service.
Traitement Alarme : Erreur de voie d'écoulement!	Il s'est produit une erreur irréparable.	Enregistrez le code d'erreur. Insérez un obturateur. Clampez les tubulures. Débranchez-vous du cycleur. Éteignez le cycleur et appelez le Service.
Traitement Avertissement : Air détecté dans la cassette!	Échec de l'autotest qui peut être dû à la détection d'air dans la cassette	Appuyez sur OK pour réessayer
Traitement Avertissement : Erreur de l'encodeur!	Erreur de traitement.	Appuyez sur OK pour réessayer.
Traitement Avertissement : Erreur de volume!	Il n'y a pas de pompage, bien que les pompes soient en action.	Appuyez sur OK pour réessayer.
Vérifiez que le sac est bien sac réchaud et que la tubulure n'est pas clampée.	Le cycleur du mal à extraire le dialysat du sac du réchaud.	Assurez-vous que la tubulure de sac du réchaud (pince rouge) est correctement branchée, que les pinces sont ouvertes et que la tubulure n'est pas pliée. Vérifiez que le sac du réchaud est correctement placé sur le plateau (allez à la page 94) et que le cône a été brisé. Appuyez sur OK pour réessayer.

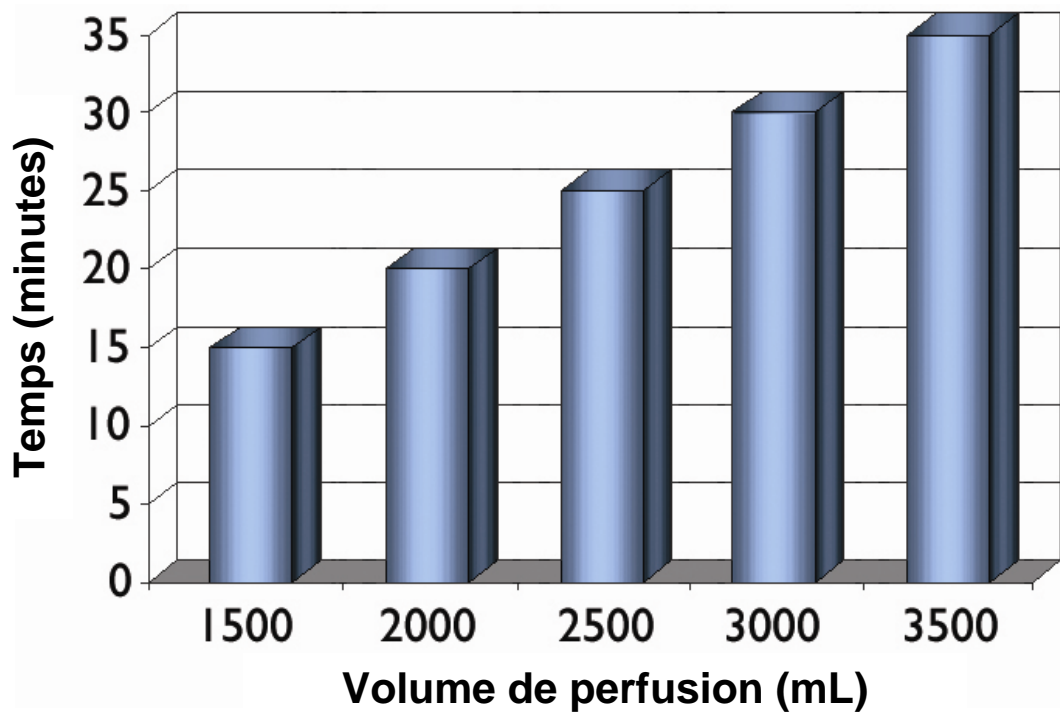Différentes personnes, drainent différemment





Différentes personnes drainent différemment

Votre corps et votre cathéter de dialyse peuvent répondre à votre cycleur de manière différente des autres. Si vous avez déjà suivi un traitement de dialyse en mode DPCA ou avec un autre type de cycleur, le temps requis pour le drainage peut avoir changé. Votre cycleur Liberty est conçu pour drainer à un taux de 100 mL par minute pour la plupart des cycles de drainage. C'est-à-dire que si vous programmez votre cycleur pour drainer votre cavité péritonéale en un temps plus court, le taux de drainage devra être plus grand et vous pourriez les alarmes de drainage pourraient vous poser des problèmes.

Pour vous aider à éliminer les alarmes de drainage, votre infirmière de dialyse et vous devrez programmer la durée de drainage pour qu'elle corresponde à la quantité de liquide perfusé. L'illustration à gauche montre la durée du drainage en minutes en fonction du volume de perfusion utilisé.

Ainsi, selon ce graph, par exemple, si vous avez perfusé 2000 mL de liquide, il vous faudra 20 minutes pour les drainer.

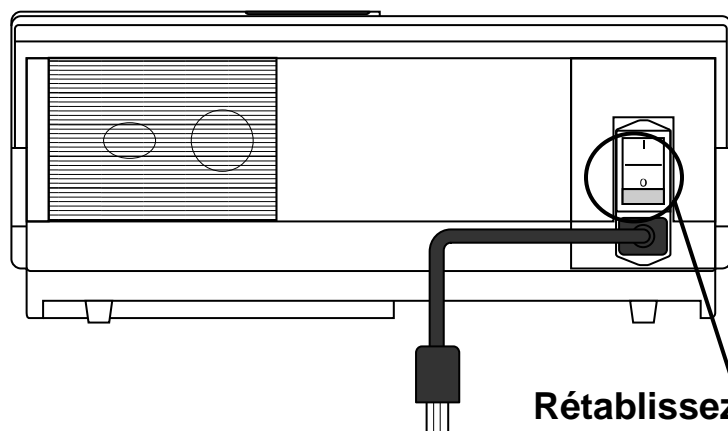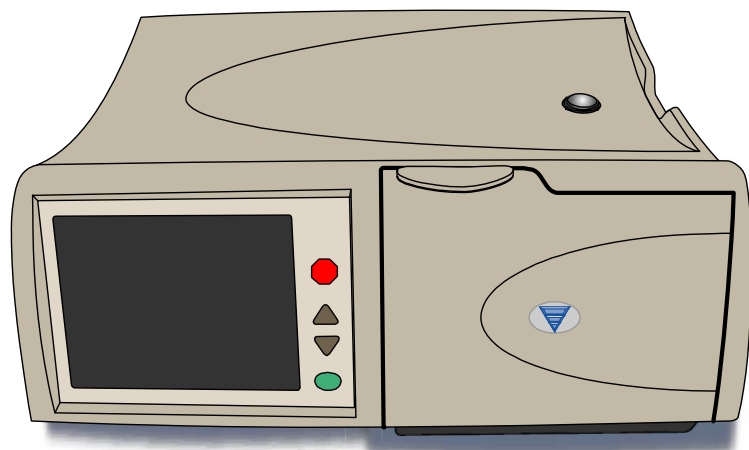Panne de courant



Rétablissez l'alimentation

Panne de courant

Lors d'une panne de courant (ou si le commutateur d'alimentation est mis sur la position d'arrêt), toutes les valves se ferment, la pompe s'arrête et l'écran tactile s'éteint.



Remarque : Si la panne de courant se produit durant un drainage, une perfusion, un contact ou une pause, le cycleur garde en mémoire l'endroit où vous en êtes dans le traitement.

Vous pourrez reprendre le même traitement si le courant revient dans les huit heures. Dépendant de la durée de la panne, vous pouvez vous débrancher de votre cycleur.

Pour vous débrancher du cycleur :

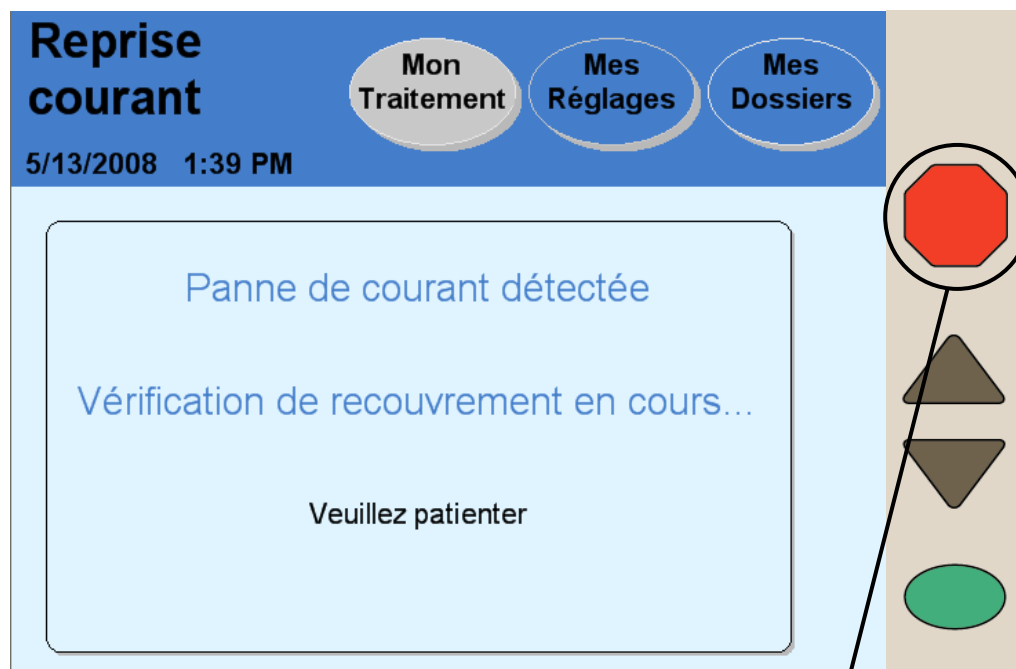
- Enfoncez la goupille — faites-la tourner de ¼ de tour et poussez-la pour être sûr qu'une goupille neuve est insérée dans la tubulure
- Fermez la pince bleue de la tubulure du patient
- Fermez la pince de rallonge de cathéter
- Débranchez avec précaution la tubulure du patient de la rallonge et bouchez-la avec un bouchon *stay•safe* stérile neuf

Rétablissement du courant

Lorsque le courant est rétabli au cycleur, mettez le commutateur d'alimentation à la position de marche (s'il ne l'est pas déjà). L'appareil passe par une série d'autotests avant de vous permettre de choisir de continuer votre traitement si vous le désirez.

(suite)

Panne de courant (suite)



Appuyez sur le bouton **STOP** pour couper le signal sonore

(suite)

Appuyez sur **STOP**

Appuyez sur la touche d'arrêt pour couper le signal sonore d'avertissement. Le cycleur procède à une vérification du système de sécurité. Si le recouvrement après la panne de courant est réussi, votre appareil émet de nouveau le signal sonore. Appuyez sur la touche **STOP** pour arrêter de nouveau le son. Vous pouvez alors choisir le bouton **Reprise du traitement** pour continuer le drainage, la perfusion, le contact ou la pause à l'endroit où vous les avez laissés.

Conformez-vous aux instructions relatives aux pannes de courant de votre infirmière de dialyse, pour vous rebrancher à votre appareil si vous vous en êtes débranché. Si vous en recevez l'instruction, vous pouvez continuer votre traitement.



Remarque : La lettre « F » apparaît à côté des détails de votre traitement à l'écran « Mes Dossiers » pour montrer qu'une panne de courant s'est produite durant ce traitement. Pour plus de renseignements, allez à « Détails du traitement » page 150.

Échec de recouvrement

Si le test de recouvrement de panne de courant échoue, vous devez choisir le bouton **Annulez le traitement** et commencer un nouveau traitement. Suivez les instructions de l'écran:

- Enfoncez la goupille — faites-la tourner de ¼ de tour en appuyant dessus — veillez à ce qu'une nouvelle goupille soit insérée dans la tubulure.
- Fermez la pince bleue de la tubulure du patient
- Fermez la pince du cathéter
- Utilisez une technique aseptique pour débrancher avec précaution la tubulure du patient de la rallonge et fermez avec un bouchon stérile neuf *stay•safe cap*.
- Vérifiez que le cathéter/rallonge est fermement immobilisé en place.
- Appuyez sur le bouton Suivant pour continuer
- Fermez toutes les pinces
- Quand l'écran vous en donne l'instruction, ouvrez la porte et enlevez la cassette
- Recommencez tout le traitement avec des sacs de dialysat frais et une cassette neuve.

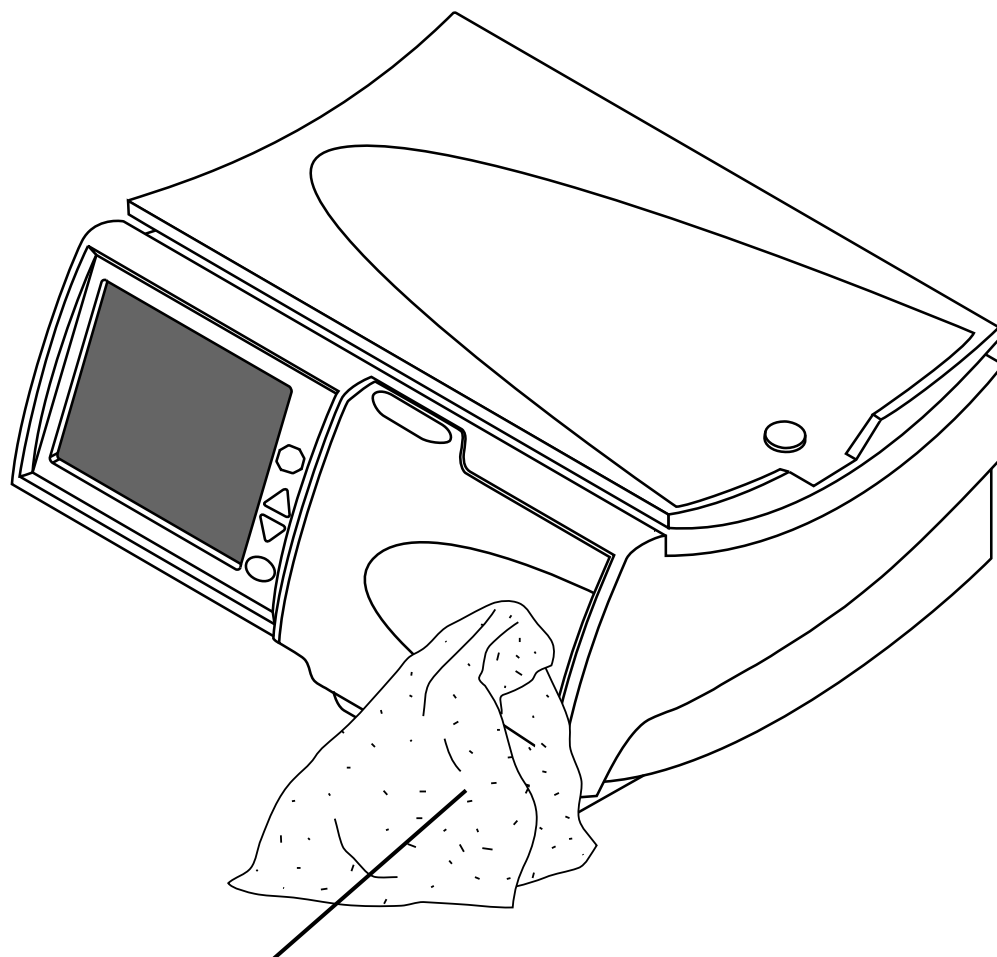


Remarque : Si la panne de courant a duré plus de huit heures, vous ne pouvez pas reprendre le traitement où vous l'avez laissé.

Page laissée intentionnellement vide

Nettoyage, caractéristiques, index et glossaire

Nettoyage de votre cycleur



Linge humide

Nettoyage de votre cycleur

Le cycleur Liberty n'est pas un appareil stérile. Gardez-le propre et sec. Nettoyez ses surfaces extérieures au besoin avec un linge humide et une solution diluée d'eau de Javel (1:100) ou un autre désinfectant d'hôpital convenable.

Utilisez le nettoyant superficiel en petite quantité pour éviter qu'il s'écoule dans l'appareil. Rincez la solution de nettoyage avec un linge imbibé d'eau ordinaire, surtout si vous utilisez un nettoyant corrosif comme l'eau de Javel.

Si vous avez besoin de nettoyer votre support organisateur *stay•safe*, vous pouvez le laver à l'eau savonneuse ou le placer sur le plateau supérieur d'un lave-vaisselle.



Mise en garde : Il faut absolument éviter que du liquide s'écoule dans le cycleur ou sur le module de pompe. Le commutateur du cycleur doit être à la position d'arrêt lors du nettoyage, pour éviter que du liquide pénètre dans le module de pompe. Si du liquide coule dans le cycleur, contactez le soutien technique sans délais. Essuyez immédiatement tout liquide répandu pour éviter que l'humidité endommage l'appareil. Placez l'appareil sur une surface résistante à l'eau et essuyez immédiatement tout liquide répandu.

Mise en garde : N'appuyez pas sur les capteurs de pression blancs du module de pompe, car la pression pourrait les endommager.

Mise en garde : N'utilisez pas de nettoyant moussant ni de désinfectant contenant de l'alcool ou un ammonium quaternaire (par exemple, chlorure de N-alkyl (C12-C18) diméthyle benzyle ammonium). Ces agents chimiques attaquent les plastiques polycarbonates utilisés dans l'appareil. Lisez les étiquettes et suivez les instructions. N'utilisez pas de produit de nettoyage en pulvérisateur.

Vérifiez périodiquement le cycleur Liberty pour déceler :

- les dommages au boîtier
- les pièces desserrées ou manquantes.

Il n'y a aucune autre mesure d'entretien préventif à prendre.

Tout travail sur votre cycleur doit être fait par un technicien du service de FMC. Si le cycleur a besoin d'entretien ou de réparation, appelez le soutien technique au **(877) 633-0013**.

Caractéristiques du Cycleur

Générales

Dimensions	Hauteur : 21,5 cm Largeur : 41,28 cm Longueur : 47,63 cm
Poids	Approximatif : 14,5 kg (32 lb.)

Conditions d'utilisation

Température	15 à 37° C (59 à 98° F)
Humidité relative	30 à 75 % (EN 60601-1-2)
Plage de pression atmosphérique	80 kPa à 106 kPa
Niveau sonore	Ne dépasse pas 40 dBA

Conditions de transport et de remisage

Température	-31 à 54° C (-25 à 130 °F), 6 mois
Humidité relative	Absence de condensation
Plage de pression atmosphérique	50 kPa à 106 kPa

Électricité

Alimentation électrique	Courant alternatif monophasé ou biphasé à prise médiane, 100 à 240 V, 50/60 Hz
Consommation	480 Watts à 100 V 700 Watts à 240 V
Fusibles	Un fusible de 6 A dans le module d'entrée
Connexions externes	Port USB CEI 60601-1:1988, A1:1991, A2:1995 Clause 6.8.2a, 6.8.2c (Accessoires, connexions SIP/SOP) Les appareils accessoires branchés aux interfaces analogiques et numériques doivent être certifiés conformes aux normes CEI correspondantes (c.-à-d., CEI 60950 pour l'équipement de traitement de données et CEI 60601-1 pour les appareils médicaux). En outre, toutes les configurations doivent se conformer à la norme de système CEI 60601-1-1. Les personnes qui branchent des appareils supplémentaires à la partie entrée signal ou à la partie sortie signal configurent un système médical et sont donc responsables de la conformité du système aux exigences de la norme de système CEI 60601-1-1. En cas de doute, consulter le service de soutien technique ou le représentant local.

Compatibilité électromagnétique Voir la déclaration de CEM, page 207

Sécurité électrique (UL 60601-1)

Protection contre les chocs électriques Type : Appareil de classe I
Degré : Partie appliquée de type BF

Classe IP IPX0. Conforme aux exigences de la norme CEI 60601-2-39 (Clause 44.3) concernant le degré de protection contre la pénétration de l'eau.

Mode de fonctionnement Fonctionnement continu

Appareil ne convenant pas à l'utilisation en présence d'anesthésique inflammable mélangé à de l'air, de l'oxygène ou de l'oxyde nitreux.

Interface d'utilisation

Langue Les écrans d'utilisation peuvent être en français (Canada), en espagnol (Mexique) ou en anglais (É-U)

Écran tactile L'affichage à DEL réagit à la pression des doigts

Touches Haut ▲, Bas ▼, STOP, OK

Réglages du matériel

Intensité d'alarme 1 à 20 (50 à 90 dB)

Son des touches 0 à 20

Délais d'extinction de l'écran 10 minutes

Luminosité de l'écran 1 à 10

Fluide

Formats des sacs 2000, 3000, 5000 mL

Plage de volume de perfusion initial 500 à 4000 mL

Température Fixée à 37° C \pm 1° C (98,6° F \pm 1,8° F)
Température minimum de sac de 15° C pour commencer un traitement

Volume total maximum 25 000 mL

Durée de drainage 1 à 59 minutes

Volume de perfusion 500 à 4000 mL

Volume en pause 0 à 4000 mL

Volume de dernière perfusion 0 à 4000 mL

Pressions produites -250 mbar à 650 mbar (pressions produites aidant à pomper la solution de dialysat dans la cavité péritonéal du patient ou à l'en extraire)

Thérapie

Durée totale de thérapie	10 minutes à 47 heures 59 minutes
Nombre de perfusions	1 à 99 (échanges)
Durée de contact	Variable, de 0 minutes à 9 heures 59 minutes
Pauses	Variables, de 0 à nombre de perfusions moins 1

Sécurités

Protection contre l'entrée d'air	Contrôlée par le logiciel : le cycleur mesure le volume d'air dans trois cycles consécutifs provenant de la source. Tout volume d'air supérieur aux limites fixées (voir ci-dessous) est envoyé vers le drain et un avertissement M31 (Air détecté dans la cassette) est affiché.
----------------------------------	---

Limites de sensibilité du détecteur d'air

Perfusion : volume d'air provenant du sac du réchaud
≥ 3 mL

Drainage : volume d'air provenant du sac du patient
≥ 3 mL

Contact : si le volume provenant du sac
d'approvisionnement ≥ 6 mL

Protection contre la surcharge par le dialysat	Contrôlée par le logiciel : Le saut de drainage est désactivé lorsque le volume de perfusion atteint 150 % (taux de 1,5) du volume prescrit (150 % = prochain volume de perfusion + volume de la perfusion précédente non encore drainé)
--	--

Protection contre la température excessive	Assurée par deux thermostats s'ouvrant à 104° F ± 4° F et à 120° F ± 4° F
--	---

Options

Ajout UF diurne	Unités
Option dernier sac	Données personnelles
Langue	USB activé

Accessoires

IQdrive (P/N 365039-13)	Chariot Liberty (P/N 180080)
-------------------------	------------------------------



EQUIPEMENT MEDICAL
EN CE QUI CONCERNE CHOC ÉLECTRIQUE, RISQUES D'INCENDIE ET MÉCANIQUES
UNIQUEMENT
SELON 60601-1et 60601-2-39
CAN / CSA – C22.2 n ° 601
CAN / CSA – C22.2 n ° 601.2.39
No de contrôle 36CT

Déclaration de CEM du fabricant

Le cycleur Liberty est certifié conforme aux exigences de la norme ANSI/AAMI/IEC 60601-1-2 dans les limites de l'utilisation prévue à domicile et dans les établissements de santé, y compris les hôpitaux.

Les tests d'émissions de l'appareil reposent sur les limites des émissions RF CISPR 11 Groupe 1, Classe B, spécifiées pour les appareils destinés à l'utilisation à domicile. Toutefois, l'utilisation du cycleur Liberty dans un milieu résidentiel peut se traduire par des interférences avec certains types de récepteurs de radiodiffusion comme les postes de télévision et de radio. De telles interférences, si elles se produisent, n'auront pas d'effet permanent sur ces récepteurs et il suffit, pour les réduire ou les éliminer de repositionner les récepteurs ou le cycleur Liberty.


Pour assurer la sécurité d'utilisation du cycleur Liberty ainsi que des autres appareils médicaux utilisés en même temps à domicile, on a procédé à une analyse technique détaillée. Cette analyse montre que les émissions du cycleur Liberty sont d'un niveau notablement inférieur aux conditions d'immunité de la norme ANSI/AAMI/IEC 60601-1-2 et qu'elles ne risquent donc pas d'affecter le fonctionnement en toute sécurité des autres appareils médicaux utilisés à proximité.

Directives et déclaration du fabricant – émissions électromagnétiques		
Le cycleur Liberty est destiné à l'utilisation dans l'environnement électromagnétique décrit ci-dessous. Le client ou l'utilisateur du cycleur Liberty doivent veiller à ce qu'il soit utilisé dans un tel environnement		
Test d'émissions	Conformité	Directives d'environnement électromagnétique
Émissions HF CISPR 11	Groupe 1	Le cycleur Liberty utilise une énergie HF uniquement pour ses fonctions internes. Ses émissions HF sont donc très faibles et sont peu susceptibles de causer une interférence avec les appareils électroniques voisins.
Émissions HF CISPR 11	Classe B	Le cycleur Liberty convient à l'utilisation dans tous les établissements, y compris domestiques, et ceux qui sont reliés directement au réseau public d'alimentation basse tension qui alimente les édifices à fins domestiques.
Émissions d'harmoniques IEC 61000-3-2	Ne s'applique pas	
Fluctuations de tension/papillotements IEC 61000-3-3	Ne s'applique pas	

Directives et déclaration du fabricant – immunité électromagnétique			
Le cycleur Liberty est destiné à l'utilisation dans l'environnement électromagnétique décrit ci-dessous. Le client ou l'utilisateur du cycleur Liberty doivent veiller à ce qu'il soit utilisé dans un tel environnement.			
Test d'immunité	Niveau de test IEC 60601	Niveau de conformité	Directives d'environnement électromagnétique
Décharges électrostatiques (DES) IEC 61000-4-2	±6 kV au contact ±8 kV dans l'air	±6 kV au contact ±8 kV dans l'air	Peut être utilisé dans un endroit sec (humidité relative minimum de 30 %)
Transitoires électriques rapides/en salves IEC 61000-4-4	±2 kV pour les lignes d'alimentation électrique ±1 kV pour lignes d'entrée/sortie	±2 kV pour les lignes d'alimentation électrique ±1 kV pour les lignes d'entrée/sortie	La qualité d'alimentation secteur devrait être celle d'un réseau basse tension type alimentant des hôpitaux ou des édifices utilisés à des fins commerciales ou domestiques.
Ondes de choc IEC 61000-4-5	±1 kV (ligne à ligne) ±2 kV (ligne à terre)	±1 kV (ligne à ligne) ±2 kV (ligne à terre)	La qualité d'alimentation secteur devrait être celle d'un réseau basse tension type alimentant des hôpitaux ou des édifices utilisés à des fins commerciales ou domestiques.
Creux de tension, coupures brèves et variations de tension, réseaux d'alimentation basse tension IEC 61000-4-11	< 5 % U_T (creux > 95 % d' U_T) pendant 0,5 cycles 40 % U_T (creux de 60 % d' U_T) pendant 5 cycles 70 % U_T (creux de 30 % d' U_T) pendant 25 cycles < 5 % U_T (creux > 95 % d' U_T) pendant 5 secondes	<5 % U_T (creux > 95 % d' U_T) pendant 0,5 cycles 40 % U_T (creux de 60 % d' U_T) pendant 5 cycles 70 % U_T (creux de 30 % d' U_T) Pendant 25 cycles <5 % U_T >creux de 95 % d' U_T) pendant 5 secondes	La qualité d'alimentation secteur devrait être celle d'un réseau basse tension type alimentant des hôpitaux ou des édifices utilisés à des fins commerciales ou domestiques. Si l'utilisateur d'un cycleur Liberty requiert le fonctionnement continu durant des coupures de secteur, on recommande d'alimenter le cycleur Liberty avec une alimentation ininterrompue.
Champs magnétiques à la fréquence du réseau (50/60 Hz) IEC 61000-4-8	3 A/m	3 A/m	Les champs magnétiques à la fréquence du réseau devraient être à des niveaux caractéristiques d'un réseau basse tension type alimentant des hôpitaux ou des édifices utilisés à des fins commerciales ou domestiques.
NOTE U_T est la tension c. a. du secteur, avant l'application du niveau de test.			

Directives et déclaration du fabricant – immunité électromagnétique

Le cycleur Liberty est destiné à l'utilisation dans l'environnement électromagnétique décrit ci-dessous. Le client ou l'utilisateur du cycleur Liberty doivent veiller à ce qu'il soit utilisé dans un tel environnement.

<p>Perturbations conduites, induites par RF IEC 61000-4-6</p>	<p>3 V efficaces 150 kHz à 80 MHz</p>	<p>3 V efficaces 150 kHz à 80 MHz</p>	<p>Aucun matériel de communication RF mobile ou portatif ne devrait être utilisé à distance de toute partie du cycleur Liberty, câbles compris, inférieure à la distance recommandée, calculée à l'aide de l'équation applicable à la fréquence de l'émetteur.</p> <p>Distance de séparation recommandée $d = [3,5 / 3] \sqrt{P}$</p> <p>$d = [3,5 / 3] \sqrt{P}$, de 80 MHz à 800 MHz</p> <p>$d = [7 / 3] \sqrt{P}$, de 800 MHz à 2,5 GHz</p> <p>Où « P » est la puissance nominale de sortie (maximum) de l'émetteur en watts (W) selon le fabricant et « d », la distance de séparation recommandée en mètres (m).</p> <p>L'intensité des champs émis par les émetteurs RF fixes, déterminée par une étude électromagnétique du site,^a devrait être inférieure au niveau de conformité dans chaque gamme de fréquence.^b</p> <p>Des interférences sont possibles au voisinage des appareils identifiés par le symbole suivant :</p>
<p>Champs électromagnétiques rayonnés en RF IEC 61000-4-3</p>	<p>3 V/m 80 MHz à 2,5 GHz</p>	<p>3 V/m 80 MHz à 2,5 GHz</p>	<p style="text-align: right;"></p>

NOTE 1 À 80 MHz et à 800 MHz, la condition de la gamme de fréquence supérieure s'applique.

NOTE 2 Ces directives ne s'appliquent pas nécessairement à toutes les situations. La propagation électromagnétique est affectée par l'absorption et la réflexion sur des structures, des objets et des personnes.

^a Il est impossible, en théorie, de prévoir avec précision l'intensité des champs électromagnétiques provenant des émetteurs fixes des stations de base pour radiotéléphones (téléphones cellulaires / sans cordon) et les installations de radio mobiles, les postes de radioamateur, les stations de radio MA et MF et de télévision. Pour évaluer l'environnement électromagnétique dû aux émetteurs RF fixes, on doit envisager un relevé électromagnétique du site. Si l'intensité du champ mesurée à l'endroit où l'appareil d'hémodialyse 2008K est utilisé dépasse le niveau de conformité RF applicable, il convient de surveiller l'appareil d'hémodialyse 2008K pour s'assurer que son fonctionnement est normal. En cas de fonctionnement anormal, des mesures supplémentaires peuvent s'avérer nécessaires, comme la réorientation de l'appareil d'hémodialyse 2008K ou son déménagement dans un autre local.

^b Sur la gamme de fréquence 150 kHz à 80 MHz, l'intensité de champ électromagnétique ne devrait pas dépasser 3 V/m.

**Distances de séparation recommandées entre
les appareils de communication RF portatifs et mobiles et le cycleur Liberty**

Le cycleur Liberty est destiné à l'utilisation dans un environnement électromagnétique où les perturbations RF rayonnées sont contrôlées. Le client ou l'utilisateur du cycleur Liberty peut aider à éviter les interférences électromagnétiques en veillant à ce que les appareils de communication RF (émetteurs) portatifs et mobiles ne soient pas utilisés en deçà de la distance minimum recommandée ci-dessous par rapport au cycleur Liberty, calculée en fonction de la puissance de sortie maximum des appareils de communications.

Puissance nominale de sortie (maximum) de l'émetteur (watts)	Distance de séparation en fonction de la fréquence de l'émetteur (mètres)		
	150 kHz à 80 MHz $d = [3,5 / 3] \sqrt{P}$	80 MHz à 800 MHz $d = [3,5 / 3] \sqrt{P}$	800 MHz à 2,5 GHz $d = [7 / 3] \sqrt{P}$
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,37	0,37	0,74
1	1,2	1,2	2,3
10	3,7	3,7	7,4
100	12	12	23

Pour les émetteurs dont la puissance nominale maximum n'est pas listée ci-dessus, on peut estimer la distance de séparation recommandée « d » en mètres (m) en utilisant l'équation qui s'applique à la fréquence de l'émetteur, où « P » est la puissance de sortie maximum de l'émetteur en « watts » (W) fournie par le fabricant de l'émetteur.

NOTE 1 À 80 MHz et à 800 MHz, la condition de distance de la gamme de fréquence supérieure s'applique.

NOTE 2 Ces directives ne s'appliquent pas nécessairement à toutes les situations. La propagation électromagnétique est affectée par l'absorption et la réflexion sur des structures, des objets et des personnes

Politique d'amélioration des produits

Le cycleur Liberty a été conçu et est fabriqué conformément aux présentes spécifications. Fresenius Medical Care a pour politique d'améliorer constamment ses produits, ce qui peut entraîner des changements aux spécifications ou aux appareils fabriqués par la suite. Les améliorations apportées à nos appareils ne nous obligent en aucun cas à apporter des changements ou des améliorations comparables aux appareils fabriqués précédemment. Chaque fois que possible, les améliorations seront offertes à un prix raisonnable. En aucun cas une amélioration ne peut être considérée comme la correction d'un défaut existant dans un appareil produit antérieurement.

Garantie

POLITIQUE DE REMISE À NEUF

La politique de Fresenius USA, Inc. est de remettre les appareils médicaux à neuf de manière qu'ils fonctionnent selon les mêmes spécifications que les appareils neufs. Nous utilisons pour cela des procédures contrôlées et la remise à neuf a lieu dans les mêmes locaux de fabrication, avec le même système de gestion de la qualité, que les appareils médicaux neufs.

APPAREILS DE REMPLACEMENT

Fresenius USA, Inc. vend des appareils médicaux neufs ou remis à neuf. Les appareils remis à neuf fonctionnent selon les mêmes spécifications que les appareils neufs (voir ci-dessus) et les uns comme les autres sont fournis par la compagnie comme appareils de remplacement en garantie.

CYCLEURS PÉRITONÉAUX

Les cycleurs péritonéaux (cycleurs Liberty®, Newton IQ®, Freedom®, 90/2® Peritoneal) en location peuvent être neufs ou remis à neuf. L'historique des appareils médicaux neufs et remis à neuf est tenu par Fresenius USA, Inc. à son usine de fabrication de Walnut Creek, en Californie.

Aucun entretien préventif n'est exigé pour les cycleurs péritonéaux. Entretien et réparation sont exécutés à l'usine uniquement. Les cycleurs requérant un travail de réparation ou d'investigation sont remplacés généralement par un appareil remis à neuf, de sorte que l'investigation et/ou la réparation puisse être effectuée à l'usine. L'utilisateur ne doit pas fournir de dossier d'entretien ou de réparation.

Lorsqu'un cycleur Liberty est vendu, la VENTE de l'appareil ou des pièces décrites ou mentionnées aux présentes repose expressément sur les modalités et les conditions fixées ci-après. Aucune condition supplémentaire ou modifiée citée par l'acheteur à Fresenius Medical Care, Inc. (« la compagnie ») n'est applicable ni exécutoire et ne peut ni modifier, ni changer les conditions fixées aux présentes sans le consentement d'un représentant officiel autorisé de la compagnie à Waltham, au Massachusetts.

GARANTIE LIMITÉE : *La compagnie garantit à l'acheteur que l'équipement livré est exempt de toute défectuosité de matériau et de fabrication pendant les durées précisées ci-dessous, pourvu que l'appareil est utilisé et entretenu conformément aux directives du fabricant.*

A. Le boîtier principal, les composants électroniques, les lampes, etc. sont garantis pendant quatre-vingt dix (90) jours à compter de la date d'installation ou cent quatre-vingt (180) jours à compter de l'expédition, selon la première éventualité.

B. Les consommables ne sont pas garantis.

*La compagnie répare ou remplace, à son gré, par des pièces et/ou des ensembles neufs ou remis à neuf, tout élément couvert par la présente garantie qui se révèle défectueux en matériau ou en fabrication. La réparation ou le remplacement est sans frais pour l'acheteur et l'entreprise se réserve le droit de décider du lieu de la réparation ou du remplacement. La garantie ne couvre pas les appareils qui ont fait l'objet d'un usage erroné, abusif ou négligent, qui ont été trafiqués, modifiés ou endommagés dans un accident, une inondation, un incendie ou tout autre sinistre, qui ont été exposés à un stress électrique ou liquidien anormal, qui ont été installés ou utilisés de manière incorrecte ou qui n'ont pas été entretenus en conformité avec le programme d'entretien périodique décrit dans le guide de l'utilisateur. **L'entretien périodique n'est pas couvert par la garantie.** La garantie peut être annulée si quelqu'un d'autre qu'un représentant autorisé de FRESENIUS MEDICAL CARE modifie, installe ou répare l'appareil.*

Les garanties COUVRANT l'APPAREIL ne sont offertes qu'à l'acheteur initial et ne sont ni cessibles ni transférables. Elles ne couvrent pas les pièces auxiliaires, les consommables ni les

sources lumineuses. La présente garantie REMPLACE toute autre garantie expRESSE, TACITE OU autre CONCERNANT l'APPAREIL et toutes ses pièces et composants. LA COMPAGNIE n'offre aucune garantie de qualité marchande ni d'adAPTATION à une utilisation particulière. La responsabilité de LA COMPAGNIE envers l'acheteur SE limite AU REMPLACEMENT ou à LA RÉPARATION DE L'APPAREIL OU DE ses COMPOSANTS, tel que décrit ci-dessus. aucun autre recours (y compris, sans limitation, les dommages indirects) n'est offert à l'acheteur. La compagnie n'accepte aucune autre obligation ou responsabilité concernant l'appareil ou sa vente, son fonctionnement ou son utilisation et n'assume ni n'autorise qu'on assume en son nom aucune autre obligation ou responsabilité relativement à l'appareil.

CONDITIONS : *Net 30 jours, FAB le point d'expédition, plus les taxes de vente et taxes similaires. Les prix de la compagnie excluent les taxes de vente, d'utilisation, d'accise ou autre. Par conséquent, l'acheteur doit payer les prix spécifiés aux présentes plus toutes les taxes actuelles ou futures de vente, d'utilisation, d'accise ou autres taxes applicables à la vente ou à l'utilisation de l'appareil aux présentes ou doit présenter un certificat d'exemption de taxe acceptable par les autorités fiscales. Le prix d'achat d'un système complet comprend la formation du personnel de l'acheteur. L'installation de pièces de remplacement est assumée par l'acheteur en fonction de la durée du travail, des matériaux nécessaires et des dépenses encourues, à moins qu'ils ne soient couverts par la garantie limitée ou par un contrat d'entretien.*

EXPÉDITION : *La compagnie se basera sur son propre jugement pour déterminer la méthode d'expédition la plus efficace, à moins d'instructions autres de l'acheteur.*

**Pour plus de renseignements sur l'entretien et la réparation,
communiquez avec :**

Fresenius Medical Care

À l'attention sur service technique

75, avenue Lindsay

Dorval, Québec

H9P 2S6

Téléphone :

1 877-633-0013

(514) 633-0013

Le cycleur Liberty est fabriqué par :

Fresenius USA, Inc. (800) 227-2572

2637 Shadelands Drive

Walnut Creek, CA 94598

Glossaire

Abdomen — Région du corps situé sous la poitrine et au-dessus des hanches, appelé aussi « ventre »

Ambulatoire — Capable de se mouvoir ou de se promener

Amorçage — Méthode d'extraction de l'air de la tubulure reliée au cathéter du patient.

Barre d'état — Partie supérieure de l'écran tactile montrant le mode de fonctionnement de l'appareil. Sa couleur indique l'état de l'appareil. La barre d'état informe aussi l'utilisateur de tout événement déclenchant un avertissement ou une alarme.

Bouton — Certains endroits identifiés de l'écran tactile déclenchent une action spécifique quand on les touche.

Bouton écran — L'un des boutons de la barre de d'état de l'écran tactile. Appuyez sur l'un de ces boutons pour afficher l'écran correspondant.

Bouton paramètre — Bouton de l'écran tactile qui affiche la valeur réglable correspondante.

Cavité péritonéale — Cavité du corps comportant l'estomac, le foie, les intestins, la rate et le pancréas. Voir aussi Abdomen.

Cône — Obturateur à l'intérieur d'un tube d'un sac de solution de dialysat. La rupture du cône

ouvre le sac et permet l'écoulement de la solution dans la tubulure qui lui est reliée.

Contact — Stade du traitement de dialyse péritonéale durant lequel le dialysat est au contact de la cavité péritonéale. C'est la période de dialyse.

Dextrose (glucose/glycémie) — Forme de sucre utilisée dans le dialysat pour extraire du liquide.

Dialysat — Solution de dialyse utilisée pour extraire les déchets liquides de l'organisme.

Dialyse péritonéale — Méthode de dialyse utilisant la membrane péritonéale pour extraire les déchets et l'excédent d'eau de la circulation sanguine.

Diurne — Qui a lieu le jour, par opposition à la nuit.

DP — Abréviation de « Dialyse péritonéale ».

DP+ — Abréviation de « Dialyse péritonéale plus », thérapie comportant des pauses avant le traitement nocturne. Voir Pause pour plus de renseignements.

DPA — Abréviation de « Dialyse péritonéale automatisée », l'utilisation d'un appareil pour dialyse péritonéale.

DPCA — Abréviation de « Dialyse péritonéale continue ambulatoire ». La DPCA requiert un échange manuel.

DPCC — Abréviation de « Dialyse péritonéale continue à cycles ». La DPCC est une thérapie continue dont les échanges ont lieu toute la nuit et parfois durant la journée. La DPCC utilise un cycleur.

DPI — Abréviation de « Dialyse péritonéale intermittente ». Les échanges ont lieu habituellement la nuit, la journée se passant à vide.

DPT — Abréviation de « Dialyse péritonéale TIDAL ».

Drainage — Vidange du dialysat présent dans la cavité péritonéale et contenant de l'eau et des déchets de l'organisme.

Durée de drainage — Temps nécessaire pour vidanger la cavité péritonéale du dialysat usagé.

Durée de perfusion — Temps nécessaire pour remplir la cavité péritonéale de dialysat frais.

**Durée totale de sommeil /
Durée totale du traitement** — Total estimatif de tous les temps de drainage, de perfusion et de contact durant le traitement.

Échange — Remplacement du dialysat dans la cavité péritonéale. Un échange ou cycle comprend trois étapes séparées : perfusion, contact et drainage.

Effluent — Le dialysat usagé drainé par le cycleur.

Fenêtre — Chambre transparente dans la tubulure de drainage. La fenêtre permet de vérifier la transparence du dialysat usagé pendant le drainage. Allez à l'illustration de la page 119.

Fibrine — Fibres protéiques blanches observées parfois dans le dialysat drainé.

Irrigation — Procédure d'élimination de l'air et des contaminants potentiels dans les tubulures des sacs et aux connexions.

IRT — Abréviation de « insuffisance rénale terminale ».

Jour sec — Expression indiquant qu'il reste très peu de liquide dans l'abdomen du fait de l'absence d'une dernière perfusion programmée dans le traitement.

Pause — Échange permettant le contact, que le patient soit branché au cycleur ou débranché. Elle diffère des autres types de contact du fait qu'elle n'est pas minutée et qu'on peut la faire durer aussi longtemps qu'on le veut.

Perfusion — Processus d'injection durant lequel la cavité péritonéale est remplie de dialysat frais.

Péritoine — Membrane semi-perméable lisse qui recouvre les organes délimitant la cavité abdominale.

Propre — Surface dont on a enlevé la plupart des germes (il en reste cependant). Un bon lavage des mains rend les mains propres, mais non stériles. Le plan de travail est propre, mais n'est pas stérile

Stérile — Qui est complètement libre de germes. Certains fournitures sont emballées de

manière à rester stériles.
Certaines parties des fournitures doivent demeurer stériles après l'ouverture de l'emballage extérieur.

Surcharge — Appelée aussi volume intrapéritonéal accru (VIPA). Il se produit quand la quantité de liquide dans l'abdomen dépasse le volume de perfusion prescrit. La surcharge peut causer une gêne abdominale, des lésions graves, voire mortelles. Voici quelques-uns des symptômes accompagnant une surcharge de liquide :

- Gêne ou pression dans l'abdomen ou le ventre
- Essoufflement
- Douleur thoracique
- Vomissements ou expectorations
- Gonflement dans la région génitale, au nombril ou sillon au site de sortie du cathéter de dialyse péritonéale
- Écoulement de liquide au site de sortie du cathéter de dialyse péritonéale
- Augmentation inattendue de la tension artérielle

Technique aseptique — Série de mesures destinées à maintenir une zone aussi libre de germes que possible, comprenant en particulier le port d'un masque, le lavage et le séchage complets des mains et la connaissance des fournitures qui sont stériles.

Tension diastolique — Le chiffre inférieur de la lecture de tension. C'est la tension artérielle précédant le battement cardiaque.

Tension systolique — Chiffre supérieur de la lecture de tension. C'est la tension artérielle durant le battement cardiaque.

Touches — Situées sur le panneau de commande, à l'extérieur de l'écran tactile. Elles servent à faire défiler des menus, à confirmer des sélections et à arrêter les fonctions.

UF — Abréviation de « Ultrafiltration ».

Ultrafiltration — Extraction de l'excédent de liquide de la circulation sanguine durant le traitement.

Unités SI — SI est l'abréviation de « Système international », ensemble d'unités de mesure utilisant le système métrique, dont le kilogramme (kg), le degré Celsius (°C) et la millimole par litre (mmol/L). Le cycleur Liberty peut afficher les valeurs en unités SI ou américaines (lb, °F ou mg/dL).

Urée — Déchet protéique dissous

USB — Abréviation de « Universal Serial Bus ». Il s'agit d'un type de connexion utilisée pour le transfert des données. L'unité IQdrive se branche dans le port USB à l'arrière du cycleur Liberty.

Volume de drainage

TIDAL — Quantité de dialysat drainé durant chaque échange en DPT. Drain 0 et le dernier drainage vident complètement la cavité péritonéale.

Volume de la dernière perfusion — Quantité de dialysat restant dans la cavité péritonéale avant le débranchement du patient de l'appareil.

Volume de pause — Quantité de dialysat pompée durant la partie de pause des échanges.

Volume de perfusion — Quantité prescrite de dialysat remplissant la cavité péritonéale durant un échange.

Volume de perfusion TIDAL — Quantité de dialysat remplissant la cavité péritonéale durant un

échange en mode TIDAL. Elle est habituellement inférieure à la quantité en DPCC ou DPI.

Volume DPCC — Quantité de dialysat pompé durant les échanges nocturnes.

Volume du dernier sac — Volume de dialysat pour la dernière perfusion. Ce sac est relié à la tubulure à pince verte.

Volume Intra-Péritonéal Accru (VIPA) — voir Surcharge

Volume total — Quantité totale de dialysat nécessaire pour le traitement.

Index

#	
# pauses	55
# perfusions	53
A	
Aide	<i>Voir Boutons</i>
Alarme, Intensité	83
Alarmes	172, 178
Amorçage	104
Amorçage des tubulures	102
Arrêt du cycleur	142
Avertissements	170, 174
B	
B (traitement sommaire)	137
Balance	39
Barre d'état	
Alarmes	173
Avertissements	171
Description	26
Boutons	
Aide	175, 199
description	29
Détails	29, 135
écrans	29, 30
navigation	29
paramètres	29
Boutons de navigation	
Détails	25
Retour	25
Suivant	25
Boutons écrans	
Mes Dossiers	31, 148
Mes Réglages	31, 47
Mon Traitement	31, 89
Branchement	113, 125
Branchement électrique du cycleur	
Liberty	41
C	
Cassette	
Blocage	33
Description	35
Mise en place	93
Plaque pompe	33
Porte	33
Sortie	138, 140
Tiges-guides	33
Catégories de thérapie	
Thérapies continues	21
Thérapies intermittentes	21
Choix des unités	81
Code d'erreur	179, 180
Complication de drainage	189
Compter l'UF diurne	81
Conduit de tubulure	<i>Voir stay•safe</i>
Cônes d'obturation des sacs	97
Connecteur	<i>Voir stay•safe</i>
Contact	126
Cycleur Liberty	
Caractéristiques	21
Entretien/réparation	214
Exigences	12
D	
Date	
Format	83
Réglage	83
Date de naissance	<i>Voir</i>
Renseignements personnels	
Débranchement du cycleur	
Fin du traitement	130
Pause	122
Dépannage	180
Déplacement du cycleur	166
Dernier volume	51
Détecteur de sac	39
Dextrose	133, 153
Dernier sac	133, 153
Durant le traitement	133
Dialyse péritonéale	
Contre-indications	13
Effets secondaires	13
Indications	13
Dialyse péritonéale cyclique	
continue	117
Dialyse péritonéale intermittente	117
Dialyse péritonéale plus	117
Dialyse péritonéale TIDAL	117
Dômes de pompe	32
Données	
Personnelles, santé	152
Prescription	44
Traitement courant et traitements	
antérieurs	31
DP fluctuante	<i>Voir Dialyse</i>
péritonéale TIDAL	
DP+	<i>Voir Dialyse péritonéale plus</i>
DP+ selon le cycle	60
DP+ selon le traitement	58

DPCC	<i>Voir</i> Dialyse péritonéale cyclique continue
DPCC selon le cycle.....	52
DPCC selon le traitement.....	50
DPI	<i>Voir</i> Dialyse péritonéale intermittente
DPI selon le cycle.....	56
DPI selon le traitement.....	54
DPT .	<i>Voir</i> Dialyse péritonéale TIDAL
Drain 0.....	113, 159
Drain tidal.....	65
Drainage.....	194
Durée de contact.....	53
Durée de drainage.....	53
Durée de perfusion.....	53
Durée sommeil.....	51

E

Échange manuel diurne.....	109
Échanges.....	116
Écran tactile	
Boutons.....	28
Description.....	25
Écran, extinction.....	83
Écran, Luminosité.....	83
Écrans d'aide.....	176
Émissions électromagnétiques..	207, 208, 209
Ensemble de tubulures	
Description.....	35
<i>Voir aussi</i> Casette.....	35
Environnement électromagnétique.....	208, 209
Environnement électronique.....	207
Équipement Onglet.....	82

F

F (traitement sommaire).....	137
Fenêtre transparente.....	119

G

Gain de.....	135
Garantie.....	211
Glucose.....	<i>Voir</i> Glycémie
Glycémie.....	153
Glycémie.....	133, 153

H

Haut/bas.....	<i>Voir</i> Touches
Heure	
Format 12 h/24 h.....	83
Réglage.....	83

I

Immunité électromagnétique.....	207, 208, 209
Installation du cycleur Liberty.....	40
Intensité d'alarme.....	83
IQdrive.....	163
Manipulation.....	143
Unité.....	165

L

Langue.....	81
Liste de vérifications.....	87
Luminosité de l'écran, réglage.....	83

M

Masque.....	93
Mode de programme.....	49
Module de pompe.....	32

N

Nettoyage du cycleur.....	202
Niveau sonore des touches.....	83

O

Obturbateur de tubulure.....	131, 199
Débranchement du cycleur....	123, 197
OK.....	<i>Voir</i> Touches
Onglet Thérapie.....	<i>Voir</i> Onglets
Onglets	
Équipement.....	82
Options.....	80
Patient.....	70
Thérapie.....	48
Options	
Dernier sac.....	81
Données de santé personnelles	81
Extinction de l'écran.....	83
USB activé.....	45, 81, 163
Options Onglet.....	80
Organiseur.....	<i>Voir</i> stay•safe
Organiseur de tubulures.....	35

P

P (traitement sommaire).....	137
Panne de courant.....	196
Panneau de commande.....	24
Panneau de commande	
Description.....	25
Paramètres du traitement.....	2
Patient Onglet.....	70
Pause.....	117
Pause	
Rebranchement au cycleur....	124

Perdu	135
Perf	120
Pesée du sac du réchaud	95
Pince de sécurité	33
Placement du sac sur le réchaud..	95
Plaque pompe.....	33
Plateau réchaud.....	38, 41
Poids	Voir Renseignements personnels
Poids	
Après le traitement.....	133
Politique d'amélioration des produits	211
Porte de cassette	33
Pouls	133, 153
Prénom	Voir Renseignements personnels
Préparation du cycleur	92

R

Réglages	
Date	83
DP+ selon le cycle	60
DP+ selon le traitement.....	58
DPCC selon le cycle	52
DPCC selon le traitement	50
DPI selon le cycle	56
DPI selon le traitement.....	54
Heure	83
Langue	81
TIDAL selon le cycle	66
TIDAL selon le traitement	62
Renseignements personnels	
Date de naissance	74
Nom de famille	73
Numéro de patient	73
Poids	76
Prénom	70
Sexe	78
Rinçage des tubulures	100

S

S (traitement sommaire)	137
Sacs de solution	
Branchement.....	94
Détection.....	99
Saut.....	159
Sautez cette phase	161
Sexe.....	Voir Renseignements personnels
Sommaire du traitement.....	134
Soutien technique	15
<i>stay•safe</i>	
Conduit de tubulure.....	37
Connecteur	35

Ensemble de tubulures.....	19, 35
Nettoyage	203
Nettoyage	203
Organiseur.....	37
Support de bouchon de rallonge	37
Support de bouchon neuf	37
System	37
STOP.....	Voir Touches
Support de bouchon de rallonge	<i>Voir stay•safe</i>
Support de bouchon neuf	<i>Voir stay•safe</i>
Surcharge	17, 113, 159

T

Téléchargement USB, IQdrive ...	165
Température.....	133, 153
Tension artérielle.....	133, 153
Tension diastolique	133
Tension systolique.....	133
Thérapie	
Selon le cycle	49
Selon le traitement	49
Type	49
Tidal selon le cycle	66
Tidal selon le traitement	62
Touches	
fléchées Haut/Bas	25
OK	25
Touche STOP.....	25
Touches, Intensité	83
Tubulure à pince blanche	<i>Voir</i>
Tubulures : Solution	
Tubulure à pince bleue.....	<i>Voir</i>
Tubulure : Patient	
Tubulure à pince jaune	<i>Voir</i>
Tubulures : Drainage	
Tubulure à pince rouge	<i>Voir</i>
Tubulures : Réchaud	
Tubulure à pince verte.....	<i>Voir</i>
Tubulures : Dernier sac	
Tubulures	
Branchement.....	94
Cathéter.....	35
Dernier sac	35
Drainage.....	35, 95, 139
Ensemble	35
Étendu	107
Patient	35, 113
Réchaud	35
Solution	35, 95
Types de thérapie.....	49

U

USB activé..... 81

V

Verrou de porte 33
VIPA *Voir* Surcharge
Volume de pause 55

Volume perfusion.....51
Volume tidal63
Volume total.....51

Z

Zones
 boutons25
 principale de l'écran25